



## Element.CH stół do chiropraktyki i terapii manualnych




Rehabilitacyjny stół stacjonarny do chiropraktyki i osteopatii oraz masażu leczniczego i innych technik terapii manualnej wyposażony w elektryczną regulację wysokości standardowo przewodowym pilotem ręcznym, a opcjonalnie również przewodowym pilotem nożnym lub ramą wokół podstawy stołu sterującą wysokością leża. Zaprojektowany specjalnie do technik manualnych stół rehabilitacyjny Element-CH posiada leże składające z 3 podstawowych sekcji, z których każda regulowana jest sprężynami gazowymi. Nowatorska sekcja zagłówek zbudowana z dwóch tapicerowanych wałków i specjalnie zaprojektowanych podłokietników pozwala nie tylko na regulację kąta nachylenia zagłówek, ale także na regulację rozstawu wałków (szerokość zagłówek dostosowana do wielkości twarzy) i regulację wysokości zagłówek względem leża w zakresie +/-.

Nr katalogowy: WS-EL-CH\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ KUP TERAZ ★

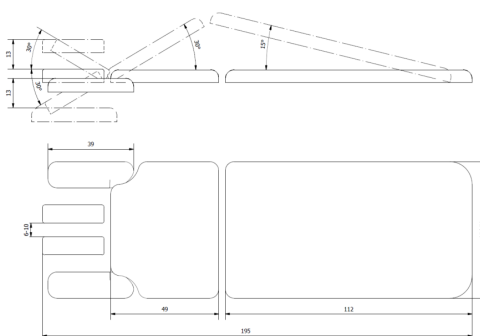



Sekcja piersiowa i sekcja lędźwiowo-nożna oferują niezależną od siebie regulację w zakresie unoszenia każdej sekcji od strony środka stołu. Po uniesieniu obu tych sekcji otrzymuje się pozycję Pivota. Niezależna regulacja obu tych sekcji pozwala na wykonywanie terapii manualnej zarówno u szczupłych pacjentów, jak i u pacjentów otyłych oraz u kobiet w ciąży. Wypełnienie leża wykonano z pianki PU wysokiej jakości. Leże o dwóch szerokościach do wyboru pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru z palety standard lub palety Prestige. Stół rehabilitacyjny wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo na biało lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania oraz promieniowanie UV. Dodatkowo rama dolna posiada estetyczną obudowę z białego tworzywa sztucznego ABS maskującą elementy sterowania stołu. Podstawa stołu do rehabilitacji wyposażona jest standardowo w cztery podgumowane stopki z regulacją umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu gabinetu. Opcjonalnie podstawa może być doposażona w system kół opuszczanych nadających mobilności stołowi rehabilitacyjnemu. Opuszczając koła dźwignią nożną następuje jednoczesne wypchnięcie stopek ku górze. Stół można wtedy przetaczać w obrębie gabinetu lub placówki bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

### W standardzie

- przewodowy pilot ręczny do sterowania regulacją wysokości
- tapicerka z palety Standard - 1 rok gwarancji
- szerokość leża 65 lub 70 cm
- zagłówek z podłokietnikami
- podstawa na podgumowanych stopkach

### Opcje dodatkowe z dopłatą

- przewodowy pilot nożny do sterowania regulacją wysokości
- rama wokół stołu do sterowania regulacją wysokości
- system kół opuszczanych z dźwignią nożną
- wieszak na podkłady w rolce
- tapicerka z palety Prestige - 3 lata gwarancji

### Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - kolory palety Standard z roczną gwarancją

Dedykowany do wyposażenia medycznego materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Sanwia M-754 jako skóropodobny materiał powlekany PCV o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz) oraz promieniowanie UV i zadrapania. Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem niepalnym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Producent: WS TECH s.c.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11  
533 99 22 01

Nr katalogowy: WS-EL-CH\*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta 220x90cm
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę	Standard - 1 rok   Prestige - 3 lata
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	Element-CH
Przeznaczenie stołu	chiropraktyka   techniki manualne
Model stołu (seria)	Element
Leże - liczba sekcji	3 sekcje
Konstrukcja ramy stołu	prostokątna
Długość leża	195 cm
Szerokość leża	65   70 cm
Wysokość - zakres regulacji	48-100 cm
Regulacja wysokości	elektryczna
Rama sterująca wysokością	opcja dodatkowa
Dopuszczalne obciążenie	160 kg
Pozycja Pivota	Tak
Funkcja fotela	Nie
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Podłokietniki w zagłówku	w standardzie
System jezdny	4 koła opcja dodatkowa
Sposób regulacji wysokości	siłownikiem elektrycznym
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Pilot nożny przewodowy	opcja dodatkowa
Regulacja wysokości ramą wokół stołu	opcja dodatkowa
Podłokietniki w zagłówku	opcja dodatkowa
Zakres regulacji podłokietników	0 do -20 cm
Sposób regulacji podłokietników	manualny

Długość sekcji zagłówka (cm)	<b>39</b>
Sposób regulacji zagłówka	<b>sprężyna gazowa</b>
Zakres regulacji zagłówka	<b>kąt nachylenia -30° do +30°   szerokość 6-10 cm   wysokość -13 do +13 cm</b>
Długość sekcji piersiowej (cm)	<b>49</b>
Sposób regulacji sekcji piersiowej	<b>sprężyna gazowa</b>
Zakres regulacji sekcji piersiowej	<b>0-30°</b>
Długość sekcji lędźwiowo-nożnej (cm)	<b>112</b>
Sposób regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej	<b>sprężyna gazowa</b>
Zakres regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej	<b>0-15°</b>
Wieszak na podkłady w rolce	<b>opcja dodatkowa</b>
System jezdny - typ	<b>system kół opuszczanych - opcja dodatkowa</b>
Zasilanie	<b>AC   230 V   50 Hz</b>
Waga stołu (kg)	<b>90</b>

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.