

PT.3ABS

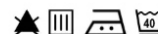
teleskopowy parawan lekarski mobilny z zasłoną zmywalną

Polski producent
Polski serwis technicznyWyrób medyczny
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

ZASŁONA PARAWANU - kolory



Tkanina poliestrowa PANAMA PU

Zgodnie na substancje szkodliwe
według Oeko-Tex® Standard 100

Teleskopowy parawan lekarski o rozpiętości wysięgnika teleskopowego 70-200 cm. Maszt parawanu i zamocowany na nim wysięgnik teleskopowy wykonane są ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Podstawa parawanu teleskopowego wykonana ze stali pokrytej pokrywą dla większej estetyki produktu tworzywem sztucznym ABS w kolorze białym lub szarym. Zakres obrotu parawanu w osi pionowej na sworzniu masztu wynosi 180°. Parawan wyposażony jest w zasłonę zmywalną o szerokości 220cm i wysokości 150cm wykonaną z tkaniny poliestrowej Panama PU z powłoką wodoodporną. Podstawa parawanu posiada 4 podgumowane koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm, każde wyposażone w hamulec postojowy (blokadę jazdy), co umożliwia manewrowanie parawanem w obrębie gabinetu lekarskiego i przetaczanie parawanu na terenie całej placówki.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Materiał wysięgnika teleskopowego	stal kwasoodporna AISI
Rozpiętość parawanu [cm]	70-200
Regulacja wysokości parawanu	Nie
Wysokość parawanu [cm]	170
Zasłona zmywalna	Tak
Materiał zasłony	Panama PU
Wymiary zasłony (szer. x wys.) [cm]	220x150
Maszt parawanu - materiał	stal kwasoodporna w gatunku 0H18N9
Sposób regulacji wysokości masztu	bez regulacji wysokości
Materiał podstawy parawanu	stal pokryta tworzywem sztucznym ABS
Kółka - rodzaj	skrzętne
Koła - średnica [mm]	75
Koła - blokowanie	hamulec (blokada jazdy)
Zakres obrotu w osi pionowej	0-180°
Szerokość podstawy [cm]	75
Głębokość podstawy [cm]	45,5
Ciężar parawanu [kg]	14,8
Numer katalogowy produktu	PT1-M(ABS6-KO-K6.6)-200-Z
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-parawany/9V
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	PT-03 parawan teleskopowy Typ PT
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa

Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	40
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24