

## PW.200x90

pokrowiec paroprzepuszczalny na materac szpitalny 200x90x12cm



Polski producent  
Polski serwis techniczny




Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

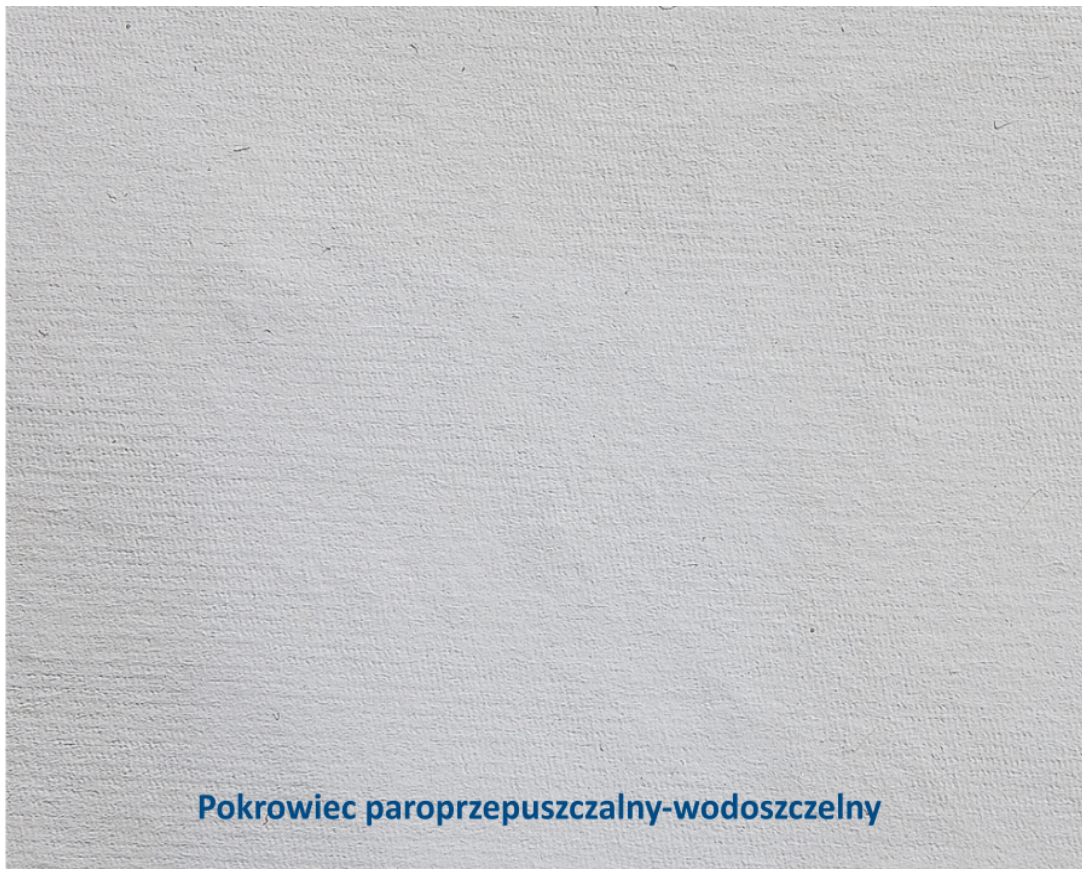

### Pokrowiec paroprzepuszczalny-wodoszczelny

Pokrowiec medyczny wykonany z białego poliestru z wodoszczelną (nieprzemakalną), paroprzepuszczalną i antyalergiczną powłoką poliuretanową. Najważniejszą cechą pokrowca paroprzepuszczalnego jest wodoszczelność przy jednoczesnej przepuszczalności pary wodnej (materiał oddychający). Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, przy zachowaniu swojej wodoszczelności na płyny z zewnątrz, pochłania w ciągu 24 godzin około 1000g/m<sup>2</sup> wilgoci z ciała pacjenta. Nie powoduje odparzeń skóry. Nadaje się również dla alergików. Pokrowiec wzdłuż dwóch boków ma wszyty suwak błyskawiczny do zapinania pokrowca na materacu.

Właściwości pokrowca: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na przenikanie mikroorganizmów oraz na zginanie, powłoka antybakteryjna i przeciwgrzybicza. Odporny na wszystkie środki dezynfekujące nie zawierające chloru.

Skład surowcowy pokrowca: 40% Poliester + 60% poliuretan, gramatura 130g/m<sup>2</sup>.

Pranie: pokrowiec można prać w temperaturze do 95°C. Należy przestrzegać oznaczeń o warunkach czyszczenia i konserwacji znajdujących się na metce wszytej w pokrowiec.

Do materaca szpitalnego z pokrowcem paroprzepuszczalnym nie należy stosować żadnych dodatkowych prześcieradeł, ochraniaczy, podkładów ani materacy powierzchniowych. Pacjent o ograniczonej zdolności ruchowej winien leżeć bezpośrednio na pokrowcu paroprzepuszczalnym materaca. Inne zastosowanie powoduje szybkie uszkodzenie pokrowca i utratę jego funkcji.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000051814](https://eudamed.europa.eu/en/med-devices/PL-MF-000051814)

PRODUCENT

 **JANPOL**  
FABRYKA MATERACY

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Rodzaj pokrowca	paroprzepuszczalny-wodoszczelny
Pokrowiec na materac	200x90x12 cm
Zapinanie pokrowca	zamek błyskawiczny (suwak)
Materiał pokrowca	poliester/poliuretan
Tkanina pokrowca	40% Poliester + 60% poliuretan, gramatura 130g/m <sup>2</sup>
Powłoka pokrowca	antybakteryjna i przeciwwgrzybicza
Sposób zapinania pokrowca	na zamek błyskawiczny wzdłuż 2 boków
Pranie wodne pokrowca	do 95°C
Suszenie bębnowe pokrowca	do 70°C
Sterylizacja w autoklawie	do 120°C
Numer katalogowy produktu	pokrowiec paroprzepuszczalny wodoszczelny
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	3
Producent wyrobu	[14] JANPOL Fabryka Materacy sp. z o.o. ul Cynkowa 2a, 43-180 Orzesze [Polska] ☎ 32 218 09 00 @ biuro@janpol.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[14] PL-MF-000051814
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 32 218 09 00 @ reklamacje@janpol.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[14] ☎ 32 218 09 00   biuro@janpol.pl

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24