

## WSR.BE Bobath

Elektryczny stół rehabilitacyjny 1-częściowy



Stół rehabilitacyjny WSR.BE do terapii wg Bobatha i Vojty wyposażony w elektryczną regulację wysokości przewodowym pilotem ręcznym lub nożnym (opcja), a także z ramy sterującej wokół stołu (opcja). Wykonany na nowatorskiej, stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo. Stół rehabilitacyjny posiada jednolite leże w 3 szerokościach do wyboru. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka wysokiej jakości o grubości 4 cm pokryta bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego. Podstawa stołu rehabilitacyjnego posiada w standardzie podgumowane stopki z możliwością stabilizacji i poziomowania stołu.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

**Wyposażenie standardowe**


- leże o szerokości 80
- przewodowy pilot ręczny do sterowania regulacją wysokości
- atestowana tapicerka z palety Standard Line
- konstrukcja ramy stołu w kolorze białym z połyskiem
- podstawa na podgumowanych stopkach z regulacją

## Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- bezprzewodowy pilot ręczny do sterowania regulacją wysokości
- przewodowy pilot nożny do sterowania regulacją wysokości
- rama wokół stołu do sterowania regulacją wysokości
- 2 opuszczane podłokietniki w sekcji zagłówka
- obustronne, opuszczane półki boczne w sekcji piersiowej
- obustronne podparcia boczne pod ręce w sekcji piersiowej stanowiące podłokietniki po ustawieniu leżą w pozycji fotela
- banany stabilizujące
- pokrowiec wielokrotnego użytku zakładany na sekcję zagłówka w pozycji fotela
- zintegrowany ze stołem wieszak na podkłady higieniczne w rolkach
- system opuszczanych kół z hamulcem
- tapicerka z palety EXCLUSIVE Line
- konstrukcja ramy stołu w jednym z pozostałych kolorów dostępnej palety lub w innym kolorze zadysponowanym przez Klienta (w uwagach do zamówienia należy podać nr koloru wg palety RAL)

## Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - paleta Standard Line

Materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Sanwia M754 jako skóropodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz), a także środki dezynfekujące zawierające aktywny chlor. Zgodna z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 (klasa I wyrobu) oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych oraz normą EN 71-3. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowana w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

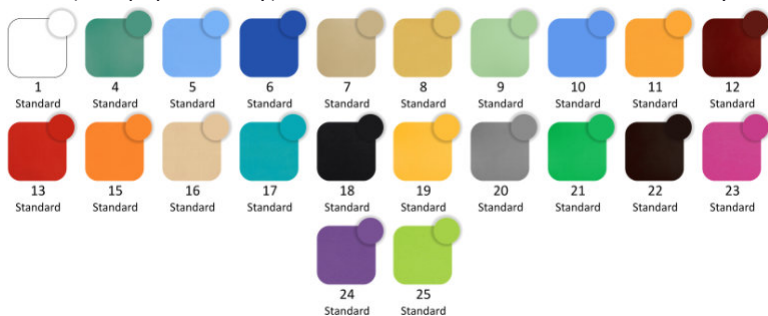

**Parametry:** grubość 0,85 ±0,15 mm | wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 2,5 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 40.000 cykli wg PN-EN ISO 5470-2 i ≥ 150.000 wg PN-EN ISO 12947-4.

**Surowce:** powłoka olejoodporna - PCW modyfikowane 100% | nośnik - poliester 100%.

**Dezynfekcja:** można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.

## Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - paleta EXCLUSIVE Line

Winyłowy materiał obiciowy produkowany przez Spradling International pod nazwami handlowymi kolekcji Silvertex i Diamante. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosowy, test zapałki). Nie zawiera ftalanów i metali ciężkich oraz formaldehydu. Posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Odporny na promieniowanie UV.



**Parametry:** gramatura: 685 g/m<sup>2</sup> | wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 2 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 300.000 cykli.

**Surowce:** powłoka - winyl 100% | nośnik - poliester 100%.

**Dezynfekcja:** można dezynfekować środkami do dezynfekcji wskazanymi w instrukcji konserwacji.

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Gabaryt przesyłki z produktem        | paleta 200x120cm                |
| Kraj producenta                      | Polska                          |
| Gwarancja ogólna                     | 2 lata                          |
| Gwarancja na konstrukcję             | 2 lata                          |
| Gwarancja na elementy elektryczne    | 1 rok                           |
| Gwarancja na tapicerkę               | 1 rok                           |
| Gwarancja - gwarant                  | gwarantem jest producent wyrobu |
| Serwis                               | fabryczny producenta            |
| Przeznaczenie stołu                  | terapia wg Bobath'a i Vojty     |
| Model stołu (seria)                  | WSR                             |
| Leże - liczba sekcji                 | 1 sekcja                        |
| Konstrukcja ramy stołu               | prostokątna                     |
| Długość leża                         | 200 cm                          |
| Szerokość leża                       | 80   100   120 cm               |
| Wysokość - zakres regulacji          | 50-92 cm                        |
| Regulacja wysokości                  | elektryczna                     |
| Rama sterująca wysokością            | opcja dodatkowa                 |
| Dopuszczalne obciążenie              | 150 kg                          |
| Pozycja Pivota                       | Nie                             |
| Funkcja fotela                       | Nie                             |
| Pozycja Trendelenburga               | Nie                             |
| Pozycja antyTrendelenburga           | Nie                             |
| Podkietniki w zagłówku               | niedostępne                     |
| System jezdny                        | 4 koła opcja dodatkowa          |
| Sposób regulacji wysokości           | silowniki elektryczne           |
| Pilot ręczny przewodowy              | w standardzie                   |
| Pilot ręczny bezprzewodowy           | opcja dodatkowa                 |
| Pilot nożny przewodowy               | opcja dodatkowa                 |
| Regulacja wysokości ramą wokół stołu | opcja dodatkowa                 |
| Podgrzewanie leża                    | Nie                             |
| Otwory w leżu                        | Nie                             |
| Relingi do pasów stabilizacyjnych    | w standardzie                   |
| Gniazda na banany stabilizujące      | Nie                             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Wieszak na podkłady w rolce | zintegrowany wieszak na podkłady higieniczne w rolkach do 60 cm szerokości - opcja dodatkowa |
| System jezdny - typ         | system kół opuszczanych - opcja dodatkowa   centralna blokada kół - opcja dodatkowa          |
| Zasilanie                   | AC   230 V   50 Hz   |
| Waga stołu (kg)             | 93   |

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>