

## TC-12

### wózek szpitalny hydrauliczny do transportu pacjenta



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Maksymalna waga  
pacjenta

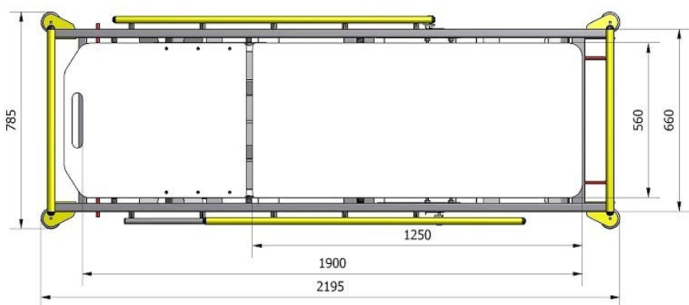

Wózek szpitalny do transportu pacjenta w pozycji leżącej i półleżącej w obrębie placówki ochrony zdrowia, a także w pozycji Trendelenburga. Wykonany na ramie stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Oferuje hydrauliczną regulację wysokości leża regulowaną obustronnymi przyciskami nożnymi. Wyposażony jest w 2-częściowe leże wykonane z płyty HPL przezierniej dla promieni RTG. Posiada długą sekcję zagłówka z pneumatyczną regulacją kąta nachylenia przy pomocy sprężyny gazowej. Pacjenta podczas transportu zabezpieczają składane barierki boczne. W opcjach wyposażenia dodatkowego wózek TC-01 może być doposażony w wysięgnik kroplówki, uchwyt na podkłady higieniczne w rolkach, kosz na butlę z tlenem oraz w prowadnicę na kasety RTG i w wielofunkcyjną półkę koszową, np. na rzeczy pacjenta, a także w pasy do unieruchomienia pacjenta na wózku.

Wózek transportowy TC-12 dostępny jest wraz z wymiennym materacem jednoczęściowym wypełnionym elastyczną pianką pokrytą tapicerką z atestowanego materiału typu MEDITAP o podwyższonej odporności na ścieranie i poddającego się dezynfekcji powszechnie stosowanymi w placówkach medycznych środkami do dezynfekcji powierzchni. W opcji dodatkowej dostępny jest materac z wżsytymi uchwytami do przenoszenia pacjenta na materacu.

Prowadzenie i manewrowanie wózkiem ułatwiają szerokie uchwyty na szczytach wózka oraz w standardzie system dużych kół kierunkowych o średnicy 125 mm z możliwością blokady jazdy każdego koła z osobną (hamulec postojowy). W opcjach wyposażenia dodatkowego wózek może być wyposażony w centralną blokadę kół uruchamianą jednym przyciśnięciem dźwigni nożnej. Wózek posiada też krążki rolkowe (odboje) zamontowane w narożnikach wózka chroniące ściany placówki.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

|  |   |
|--|---|
| Przeznaczenie wózka                        | <b>transport pacjenta</b>                                   |
| Rodzaj wózka                               | <b>transportowy</b>   |
| Pozycja transportowa pacjenta              | <b>leżąca</b>   |
| Leże wózka                                 | <b>2-częściowe</b>  |
| Regulacja zagłówka                         | <b>pneumatyczna - sprężyna gazowa</b>                       |
| Leże przeziernie dla RTG                   | <b>Tak</b>  |
| Pozycja Trendelenburga                     | <b>Tak</b>  |
| Pozycja antyTrendelenburga                 | <b>Nie</b>  |
| Regulacja wysokości leża                   | <b>hydrauliczna</b>   |
| Materac wózka                              | <b>wyjmowany</b>  |
| Barierki wózka                             | <b>składane stalowe</b>                                     |
| Dopuszczalne obciążenie                    | <b>200 kg</b>   |
| Koła wózka - średnica                      | <b>125 mm</b>   |
| Koła wózka - blokada skrętu                | <b>Nie</b>  |
| Koła wózka - blokada jazdy                 | <b>Tak</b>  |
| Usługa wniesienia wózka do lokalu          | <b>dostępna</b>   |
| Konstrukcja ramy wózka                     | <b>stalowa lakierowana proszkowo</b>                        |
| Zakres regulacji wysokości leża [cm]       | <b>47-86</b>  |
| Długość leża [cm]                          | <b>195</b>  |
| Szerokość leża [cm]                        | <b>65</b>   |
| Długość zagłówka [cm]                      | <b>64</b>   |
| Zakres regulacji zagłówka                  | <b>0 - 80°</b>  |
| Długość cz. lędźwiowo-kończynnej leża [cm] | <b>125</b>  |
| Materac - długość [cm]                     | <b>195</b>  |
| Materac - szerokość [cm]                   | <b>65</b>   |
| Materac - grubość [cm]                     | <b>4</b>  |
| Materac - chwyt do przenoszenia pacjenta   | <b>6 uchwytów - opcja wyposażenia dodatkowego</b>           |
| Prowadnica na kasetę RTG                   | <b>opcja wyposażenia dodatkowego</b>                        |
| Pozycja Trendelenburga - sposób regulacji  | <b>pneumatyczny - sprężyna gazowa</b>                       |
| Pozycja Trendelenburga - zakres regulacji  | <b>-12° do 0°</b>   |
| Wysięgnik kropłówki                        | <b>regulowany 2 haczyki - opcja wyposażenia dodatkowego</b> |
| Kosz na butę z tlenem                      | <b>opcja wyposażenia dodatkowego</b>                        |
| Pasy do unieruchomienia pacjenta           | <b>opcja wyposażenia dodatkowego</b>                        |
| Półka na rzeczy pacjenta                   | <b>opcja wyposażenia dodatkowego</b>                        |
| Krażki odbojowe                            | <b>4 krażki</b>   |
| Koła wózka                                 | <b>kierunkowe 125mm</b>                                     |
| Blokada kół - jazda                        | <b>4 koła z blokadą jazdy</b>                               |

|   |  |
|---|--|
| Centralna blokada kół   | <b>opcja wyposażenia dodatkowego</b>   |
| Długość całkowita wózka [cm]  | <b>218</b>   |
| Szerokość całkowita wózka [cm]  | <b>78</b>  |
| Ciężar wózka bez wyposażenia dodatkowego [kg]                               | <b>83</b>  |
| Numer katalogowy produktu   | <b>TC-12</b>   |
| Kod PKWiU   | <b>32.50.30.0</b>  |
| Kod CN  | <b>9018 90 84</b>  |
| Certyfikacja produktu   | <b>CE/MD/MDR</b>   |
| Dokument certyfikacji produktu  | <b>deklaracja zgodności</b>  |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR  | <b>wyrób medyczny</b>  |
| Kod Basic UDI-DI  | <b>5900415491WozkiTCW9</b>   |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego  | <b>klasa I, reguła 1</b>   |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego  | <b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b>                             |
| Nazwa zgłoszona do organu   | <b>TC-12 wózek do transportu chorych</b>   |
| Stawka podatku VAT na produkt   | <b>8%</b>  |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT  | <b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>  |
| Gwarancja ogólna  | <b>2 lata</b>  |
| Gwarant udzielający gwarancji   | <b>producent wyrobu / produktu</b>   |
| Gwarancja na konstrukcję  | <b>2 lata</b>  |
| Gwarancja na elementy hydrauliczne  | <b>1 rok</b>   |
| Gwarancja na elementy pneumatyczne  | <b>1 rok</b>   |
| Gwarancja na tapicerkę standardową  | <b>2 lata</b>  |
| Rodzaj przesyłki z produktem  | <b>przesyłka paletowa</b>  |
| Rodzaj palety   | <b>paleta przemysłowa bezzwrotna</b>   |
| Gabaryt produktu na palecie   | <b>220x80x80 cm</b>  |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]                                | <b>110</b>   |
| Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy                                 | <b>odpłatna</b>  |
| Producent wyrobu  | <b>[36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] 📠 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu</b> |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej                   | <b>[36] PL-MF-000045163</b>  |
| Serwis techniczny w Polsce  | <b>fabryczny producenta</b>  |
| Serwis techniczny - kontakt   | <b>📞 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu</b>  |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | <b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>  |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu                           | <b>producent (dane powyżej)</b>  |
| Zgłaszanie incydentów medycznych  | <b>[36] 📞 13 464 44 49   biuro@wstech.eu</b>   |

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24