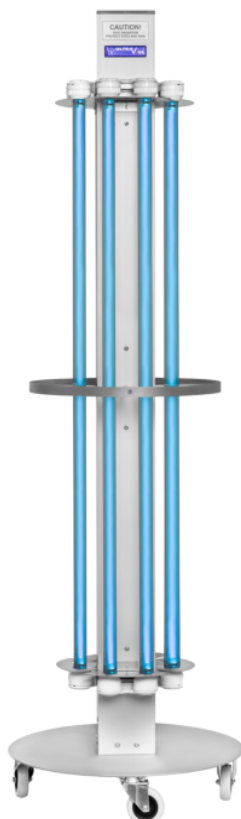


NBV-8x75P BT

wielokierunkowa lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania 600W mobilna


Polski producent
Polski serwis techniczny

Darmowa dostawa
na terenie Polski

Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE


Dookólna (wielokierunkowa) lampa bakteriobójcza dużej mocy (600W) do dezynfekcji powierzchni i powietrza w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej. Skutecznie eliminuje zalegające na powierzchniach i unoszące się w powietrzu drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśnie, wirusy i bakterie. Wyposażona jest w osiem promienników o mocy 75W każdy emitujących wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali 253,7 nm. Pole skutecznego promieniowania UV-C w modelu NBV-8x75P BT to 5 metrów od umiejscowienia lampy w każdym kierunku (zasięg 360°), również w górnych warstwach ścian i sufitu pomieszczenia, a także w dolnych warstwach pomieszczenia. Statyw lampy wykonany ze stali nierdzewnej (podstawa i uchwyty do przetaczania) oraz z anodowanego aluminium (profil pionowy statywu). Podstawa wyposażona jest w 4 kółka kierunkowe (skrętne) z miękkimi oponkami do twardych podłoży. Opcjonalnie 2 kółka mogą być wyposażone w hamulec (blokadę jazdy). Lampa emituje promieniowanie umożliwiające regulację ręczną kąta nachylenia odbłyśnika, a tym samym kąta naświetlania pomieszczenia, co umożliwia skuteczną dezynfekcję.


Wielokierunkowa lampa bakterio i wirusobójcza NBV-8x75P BT wyposażona jest w moduł komunikacji bezprzewodowej NBV BT Switch działający w systemie Bluetooth, co umożliwia zdalne sterowanie pracą lampy poprzez dedykowaną aplikację na smartfony (NBV App) z zainstalowanym systemem operacyjnym Android. Aplikacja pozwala na kontrolę nad jedną lub wybraną lampą, albo nad wszystkimi lampami z modulem NBV BT Switch znajdującymi się na terenie placówki. W aplikacji są również dostępne liczniki czasu pracy promienników, które odmierzają czas pracy poszczególnych lampy od momentu ostatniej wymiany promienników i sygnalizują konieczność ich ponownej wymiany. Lampą można też sterować ręcznie bez aplikacji za pomocą przycisków umieszczonych na panelu pionowym statywu lampy.

Na wyposażeniu lampy znajduje się też czujnik ruchu MD wstrzymujący pracę lampy i wyłączający promieniowanie UV-C w sytuacji, gdy do pomieszczenia z załączoną lampą bezpośredniego działania wejdzie pacjent lub osoba w personelu.

W placówkach ochrony zdrowia lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania, dzięki wykorzystaniu dezynfekujących właściwości promieniowania UV-C, służą utrzymywaniu czystości mikrobiologicznej powierzchni znajdujących się w pomieszczeniu (ścian, sufitu, podłóg i wykładzin, blatów, mebli, sprzętu medycznego, instrumentarium, etc.) eliminując obecne na tych powierzchniach drobnoustroje, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa mikrobiologicznego pacjentów i personelu tej placówki. Lampy wielokierunkowe bezpośredniego działania polecane są szczególnie do dużych pomieszczeń na terenie placówki, w których wykonuje się inwazyjne procedury medyczne.

Standardowo promienniki znajdujące się na wyposażeniu lampy nie są foliowane. Za dopłatą mogą być zamontowane w lampie promienniki spełniające wymagania norm higienicznych UE oraz systemu HACCP pokryte wytrzymałą i bardzo cienką folią przeciwbryzgową (foliowane FTUV75W), która zabezpiecza przed skażeniami oraz rozsypaniem szkła po podłodze i na sprzętach w przypadku ewentualnego stłuczenia promiennika. Foliowanie promienników nie wpływa na ich skuteczność i trwałość.

Lampy bakteriobójcze serii wielokierunkowych lamp NBV są urządzeniami energooszczędnymi, wyposażonymi w promienniki o długiej żywotności (9000 godzin pracy), dlatego ich stosowanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji tych lamp.

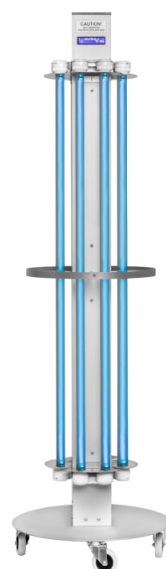

ø15 m 160 m²

360° 9,2 W/m²



Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j.
ul. Stepowizna 34; 95-100 Zgierz
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Rodzaj lampy UV-C	mobilna ze statywem
Model lampy (seria)	NBV wielokierunkowa
Moc i liczba promienników UV-C	600W (8x75W)
Natężenie promieniowania UV-C	9,2 W/m² z odległości 1m
Skuteczność w pomieszczeniu	do 160 m² [360° w promieniu 7,5m]
Żywotność promienników	9 000 godzin pracy
Licznik czasu pracy promienników	aplikacja NBV App na smartfony
Sygnalizacja wymiany promienników	akustyczna
Pilot zdalnego sterowania	aplikacja NBV App na smartfony
Przewód zasilający lamę UV-C	5 m z wtyczką do gniazda typu E
Typ promienników UV-C	UV-C TUV 36W G13 lub UV-C HNS 36W G13
Długość promienników UV-C [mm]	1199,40
Średnica promienników UV-C [mm]	28
Producent promienników UV-C	Philips lub OSRAM
Długość fali promieniowania UV-C	253,7 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki	zerowy - promienniki nie emitują fal o długości 185nm odpowiedzialnych za powstawanie ozonu
Przenikalność promieniowania UV-C przez powierzchnie	nieprzenikalne, odbicie od powierzchni
Oddziaływanie promieniowania UV-C na tworzywa sztuczne	może powodować odbarwienia i żółknięcie
Kąt naświetlania promieniami UV-C	360°
Zasięg skutecznego promieniowania UV-C - średnica pola	15 metrów
Zasięg skutecznego promieniowania UV-C - kubatura	400-480 m³
Poziom hałasu lampy UV-C	bezgłośna
Zasilanie lampy UV-C	AC 230V 50Hz
Pobór mocy przez lampę	630W
Klasa zabezpieczenia lampy	I B
Klasa szczelności obudowy lampy	IP20
Licznik czasu pracy promienników - wyświetlacz	w aplikacji sterującej NBV App na smartfony
Zdalne sterowanie pracą lampy	poprzez aplikację sterującą NBV App na smartfony
Czujnik ruchu wstrzymujący pracę lampy	MD
Czujnik ruchu - radar	CW - zakres ISM
Radar czujnika ruchu - moc transmisji	<0,2 mW
Czujnik ruchu - kąt wykrywania ruchu	360°
Czujnik ruchu - zasięg wykrywania ruchu	w promieniu 8 metrów od lampy
Czujnik ruchu - sygnalizacja wykrycia ruchu	sygnał akustyczny
Czujnik ruchu - napięcie zasilania	AC 230V 50Hz

Czujnik ruchu - pobór mocy	0,9W
Czujnik ruchu - częstotliwość pracy	5,8 GHz
Czujnik ruchu - stopień ochrony obudowy	IP20
Wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej	Bluetooth NBV BT Switch
Aplikacja sterująca pracą lampy	NBV App
Aplikacja - wymagane oprogramowanie	Android w wersji co najmniej 6.0 lub nowszy
Aplikacja - wielkość	20 MB
Aplikacja - wymagania komunikacyjne	Wi-Fi lub LTE
Aplikacja - profilu portu komunikacji	port szeregowy (Serial Port Profile)
Aplikacja - pobieranie	kod QR w instrukcji obsługi dostarczonej lampy
Aplikacja - parowanie lampy z aplikacją	poprzez Bluetooth
Długość całkowita lampy [cm]	50
Szerokość całkowita lampy [cm]	50
Wysokość całkowita lampy [cm]	162
Waga całkowita lampy [kg]	26
Numer katalogowy produktu	NBV-8x75P BT
Kod PKWiU	26.60.13.0
Kod CN	9018 20 00
Certyfikacja produktu	CE
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	50
Producent wyrobu	[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j. ☎ ul. Stępowizna 34; 95-100 Żgierz [Polska] 🇵🇱 42 717 11 76 @ biuro@ultraviol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	🇵🇱 42 715 02 16 @ reklamacje@ultraviol.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynek: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24