

## SS-E02.70 Plus

stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 3-częściowy elektryczny

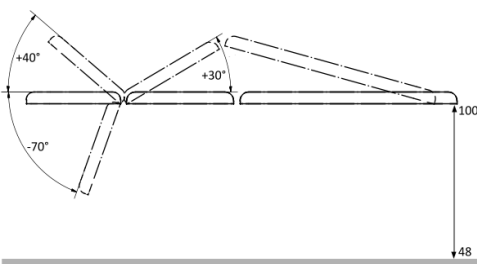
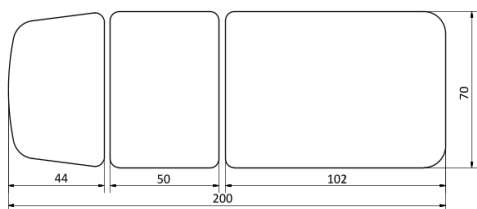

Polski producent  
Polski serwis techniczny

Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU

Darmowa dostawa  
na terenie Polski

Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

Maksymalna waga  
pacjenta

Dostępność Plus  
Dostępność AOS


TAPICERKA paleta STANDARD

Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w łamanie leża w części środkowej do pozycji Pivota oraz elektryczną regulację wysokości standardowo przewodowym pilotem ręcznym, a opcjonalnie również przewodowym pilotem nożnym lub ramą sterującą umieszczoną w podstawie stołu. Regulacja wysokości leża odbywa się płynnie i szybko dzięki zastosowaniu łożysk w systemie podnoszenia i opuszczania stołu. Wersja Plus z maksymalnym obciążeniem statycznym stołu do 200 kg, dzięki zastosowaniu silownika elektrycznego o większej sile podnoszenia.

Stół rehabilitacyjny SS-E02.70 Plus oferuje 3-częściowe leże o szerokości 70 cm i długości 200 cm z sekcją zagłówka regulowaną pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża oraz sekcjami: piersiową i lędźwiowo-nożną standardowo regulowanymi pneumatycznie (sprężyny gazowe) do pozycji Pivota z tzw. łamaniem leża ku górze, a opcjonalnie regulowane elektrycznie silownikiem elektrycznym umieszczonym pod leżem. Wypełnienie leża wykonano z pianki PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezzwłową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru z palety standard lub palety Prestige. Przy sekcji piersiowej oraz lędźwiowo-nożnej znajdują się obustronne relingi do mocowania pasów stabilizujących pacjenta.

Stół rehabilitacyjny wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania oraz promieniowanie UV. Podstawa stołu do rehabilitacji wyposażona jest standardowo w cztery podgumowane stopki z regulacją umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu gabinetu. Opcjonalnie podstawa może być wyposażona w system kół opuszczanych nadających mobilności stolowi rehabilitacyjnemu. Opuszczając koła dźwignią nożną następuje jednocześnie wypchnięcie stoppek ku górze. Stół można wtedy przetrzącać w obrębie gabinetu lub placówki bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

Stół rehabilitacyjny SS-E02.70 Plus można doposażyć w wyposażenie dodatkowe. Zagłówek może być wyposażony w otwór do oddychania z wymiową zatyczką, a także opcjonalnie w dwa opuszczane podłokietniki dla wygodnego podparcia przedramion pacjenta ułożonego na brzuchu. W sekcji piersiowej mogą być opcjonalnie wykonane półki boczne otwierane w dół, aby podczas zabiegu lub masażu ręce pacjenta ułożonego na brzuchu mogły pozostawać w swobodnym zwisie. Do leża w jego tylnej części można zamontować uchwyt na podkładki higieniczne w rolce.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](mailto:PL-MF-000045163)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Przeznaczenie stołu stacjonarnego                        | rehabilitacja   masaż klasyczny          |
| Regulacja wysokości leża                                 | elektryczna ręczna/nożna (pilot/rama)    |
| Zakres regulacji wysokości leża od podłoża               | 48-100 cm                                |
| Liczba sekcji leża                                       | 3 sekcje (3-częściowe)                   |
| Sekcja zagłówka                                          | regulowana +/- poziomiu leża             |
| Sekcja piersiowa                                         | regulowana - łamanie leża                |
| Sekcja łędźwiowo-nożna                                   | regulowana (łamanie leża)                |
| Wymiary obrysu leża (dł. x szer.)                        | 200 x 70 cm                              |
| Pozycja Pivota                                           | Tak                                      |
| Funkcja fotela                                           | Nie                                      |
| Pozycja Trendelenburga                                   | Nie                                      |
| Pozycja antyTrendelenburga                               | Nie                                      |
| Funkcja CPR                                              | Nie                                      |
| Podłokietniki przy zagłówku                              | opuszczane - wyposażenie opcjonalne      |
| System jezdny                                            | 4 koła - wyposażenie opcjonalne          |
| Dopuszczalne obciążenie                                  | 200 kg                                   |
| Usługa wniesienia stołu do lokalu                        | dostępna                                 |
| Model/seria produkcyjna stołu                            | SS (WSTech)                              |
| Statyczna wytrzymałość leża [kg]                         | 200                                      |
| Rodzaj ramy dolnej stołu                                 | prostokątna                              |
| Materiał ramy dolnej stołu                               | lakierowane profile stalowe              |
| System podnoszenia leża                                  | silownik elektryczny                     |
| Pilot ręczny przewodowy                                  | w standardzie                            |
| Pilot nożny przewodowy                                   | opcjonalnie                              |
| Regulacja wysokości ramą wokół podstawy stołu            | opcjonalnie                              |
| Długość sekcji zagłówka [cm]                             | 44                                       |
| Sposób regulacji zagłówka                                | pneumatyczny                             |
| Zakres regulacji zagłówka                                | -70° do +40°                             |
| Otwór w zagłówku                                         | opcjonalnie                              |
| Podłokietniki przy zagłówku                              | opcjonalnie                              |
| Podłokietniki - sposób regulacji                         | ręczny lub pneumatyczny                  |
| Podłokietniki - zakres regulacji                         | 0 do -18 cm od poziomu zagłówka          |
| Długość sekcji piersiowej [cm]                           | 50                                       |
| Sposób regulacji sekcji piersiowej                       | pneumatyczny lub opcjonalnie elektryczny |
| Zakres regulacji sekcji piersiowej                       | 0-30°                                    |
| Opuszczane boki sekcji piersiowej (zwis ramion pacjenta) | opcjonalnie                              |
| Sposób łamania leża w cz. środkowej                      | pneumatyczny lub opcjonalnie elektryczny |
| Zakres łamania leża w cz. środkowej                      | 0-30°                                    |
| Długość sekcji łędźwiowo-nożnej [cm]                     | 102                                      |
| Sposób regulacji sekcji łędźwiowo-nożnej                 | pneumatyczny lub opcjonalnie elektryczny |

|                                                                             |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres regulacji sekcji łędźwiowo-nożnej                                    | 0-15°                                                                                                          |
| Relingi do pasów stabilizacyjnych                                           | obustronne                                                                                                     |
| Wieszak na podkłady higieniczne                                             | opcjonalnie                                                                                                    |
| System jezdny - typ                                                         | opcjonalnie 4 opuszczane koła kierunkowe z blokadą jazdy                                                       |
| Zasilanie elektryczne                                                       | AC   230 V   50 Hz                                                                                             |
| Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]                                 | 98                                                                                                             |
| Numer katalogowy produktu                                                   | SS-E02 Plus 200x70                                                                                             |
| Kod PKWU                                                                    | 32.50.21.0                                                                                                     |
| Kod CN                                                                      | 9018 90 84                                                                                                     |
| Certyfikacja produktu                                                       | CE/MD/MDR                                                                                                      |
| Dokument certyfikacji produktu                                              | deklaracja zgodności                                                                                           |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR                                          | wyrób medyczny                                                                                                 |
| Kod Basic UDI-DI                                                            | 5900415491SEISSeCX                                                                                             |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego                                              | klasa I, reguła 13                                                                                             |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego                                          | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych                            |
| Nazwa zgłoszona do organu                                                   | SS-E02 Plus stacjonarny stół rehabilitacyjny elektrycznie sterowany                                            |
| Stawka podatku VAT na produkt                                               | 8%                                                                                                             |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT                                        | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)                                           |
| Gwarancja ogólna                                                            | 2 lata                                                                                                         |
| Gwarant udzielający gwarancji                                               | producent wyrobu / produktu                                                                                    |
| Gwarancja na konstrukcję                                                    | 2 lata                                                                                                         |
| Gwarancja na elementy elektryczne                                           | 1 rok                                                                                                          |
| Gwarancja na elementy pneumatyczne                                          | 1 rok                                                                                                          |
| Gwarancja na tapicerkę standardową                                          | 2 lata                                                                                                         |
| Gwarancja na tapicerkę premium                                              | 3 lata                                                                                                         |
| Rodzaj przesyłki z produktem                                                | przesyłka paletowa                                                                                             |
| Rodzaj palety                                                               | paleta przemysłowa bezzwrotna                                                                                  |
| Gabaryt produktu na paalecie                                                | 200x80x80 cm                                                                                                   |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]                                | 120                                                                                                            |
| Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy                                 | odpłatna                                                                                                       |
| Producent wyrobu                                                            | [36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej                   | [36] PL-MF-000045163                                                                                           |
| Serwis techniczny w Polsce                                                  | fabryczny producenta                                                                                           |
| Serwis techniczny - kontakt                                                 | ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu                                                                               |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej)                                                                     |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu                           | producent (dane powyżej)                                                                                       |
| Zgłaszanie incydentów medycznych                                            | [36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu                                                                          |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.  
Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24