

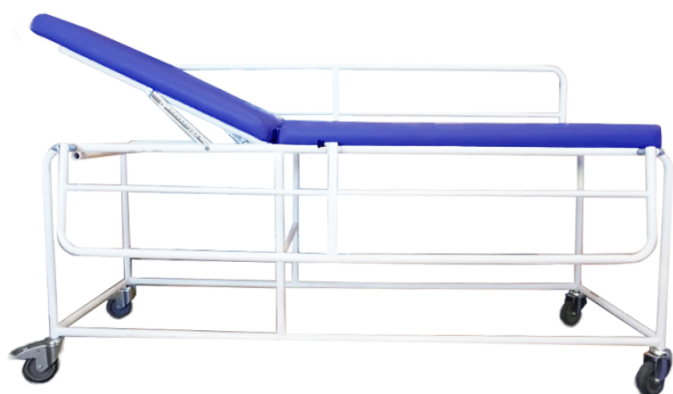
KZ.CH
wózek szpitalny do transportu pacjenta

 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta


| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Medi 01 biały | Medi 02 złoty neonowy | Medi 03 zielony neonowy | Medi 04 niebieski jasny | Medi 05 malinowy |
| Medi 06 czerwony | Medi 07 morski | Medi 08 niebieski ciemny | Medi 12 granatowy | Medi 15 czarny |
| Medi 16 błękitny | Medi 17 zielony trawlisty | Medi 18 limonkowy | Medi 20 kość słoniowa | Medi 21 piaskowy |
| Medi 22 miętowy | Medi 23 niebieski | Medi 24 szaro-niebieski | Medi 27 fioletowy | Medi 28 brzoszwinowy |
| Medi 30 bordowy | Medi 31 pomarańczowy | Medi 32 beżowy ciemny | Medi 33 beżowy jasny | Medi 34 szary jasny |
| Medi 36 szary ciemny | Medi 53 złoty ciepły | Medi 54 fioletowy | Medi 55 pomarańcz. ciemny | |

TAPICERKA - paleta Medi



Wózek transportowy o stałej wysokości 89 cm do przewożenia pacjentów w obrębie placówki medycznej w pozycji leżącej i półleżącej. Wykonany na ramie stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały. Wyposażony jest 2-częściowe leże z długą sekcją zagłówka regulowaną pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej poziomu leża. Wypełnienie leża z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezszwowo tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru. Pacjenta podczas transportu zabezpieczają opuszczane barierki boczne wykonane z lakierowanych na biało rurek stalowych. W podstawie wózek posiada 4 koła kierunkowe (skrótnie). 2 koła wyposażone są w blokadę jazdy (hamulec postojowy). W opcjach wyposażenia dodatkowego wózek może być doposażony w wysięgnik kropłówki.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000023594](https://ec.europa.eu/eudamed/)
PRODUCENT
KINESIS
Autoryzowany dystrybutor producenta
EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE PRODUKTU

| | |
|---|--------------------------------|
| Przeznaczenie wózka | transport pacjenta |
| Rodzaj wózka | transportowy |
| Pozycja transportowa pacjenta | leżąca |
| Leże wózka | 2-częściowe |
| Regulacja zagłówka | pneumatyczna - sprężyna gazowa |
| Leże przeziernie dla RTG | Nie |
| Pozycja Trendelenburga | Nie |
| Pozycja antyTrendelenburga | Nie |
| Regulacja wysokości leża | brak |
| Materac wózka | brak - leże tapicerowane |
| Barierki wózka | opuszczalne stalowe |
| Dopuszczalne obciążenie | 180 kg |
| Koła wózka - średnica | 100 mm |
| Koła wózka - blokada skrętu | Nie |
| Koła wózka - blokada jazdy | Tak |
| Usługa wniesienia wózka do lokalu | niedostępna |
| Konstrukcja ramy wózka | stalowa lakierowana proszkowo |
| Długość leża [cm] | 193 |
| Szerokość leża [cm] | 69 |
| Długość zagłówka [cm] | 63 |
| Zakres regulacji zagłówka | 0-45° |
| Wysięgnik kroplówki | opcjonalnie |
| Koła wózka | 4 kierunkowe 100mm |
| Blokada kół - jazda | 2 koła z blokadą jazdy |
| Długość całkowita wózka [cm] | 195 |
| Szerokość całkowita wózka [cm] | 71 |
| Wysokość całkowita wózka [cm] | 89 |
| Ciężar wózka bez wyposażenia dodatkowego [kg] | 38 |
| Numer katalogowy produktu | KZ-CH |
| Kod PKWiU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |

| | |
|---|---|
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 1 rok |
| Gwarancja na elementy pneumatyczne | 1 rok |
| Gwarancja na tapicerkę standardową | 1 rok |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka paletowa |
| Rodzaj palety | paleta przemysłowa bezzwrotna |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg] | 55 |
| Producent wyrobu | [16a] KINESIS sp. z o.o. ☎ ul. Dworska 19; 38-430 Miejsce Piastowe[Polska]☎13 435 06 45 @ biurokinesis@kinesis.com.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [16a] PL-MF-00023594 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 13 435 06 45 @ biurokinesis@kinesis.com.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [16a] ☎ 695 768 360 biurokinesis@kinesis.com.pl |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24