


Terapeuta E-S2.F0.69

stół rehabilitacyjny 2-częściowy elektryczny

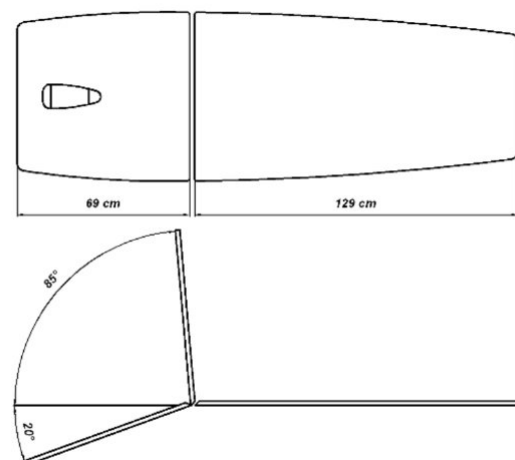

Stacjonarny stół rehabilitacyjno-zabiegowy wyposażony w elektryczną regulację wysokości sterowaną z ramy wbudowanej w podstawę stołu. Wykonany na solidnej i stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo. Stół rehabilitacyjny posiada 2-częściowe leże o szerokości 69 cm i długości 202 cm z regulowaną pneumatycznie długą sekcją zagłówek w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża. Wersja modelu o szerokości leża 80 cm dostępna jest na tej stronie w zakładce "produkty powiązane". Zagłówek wyposażony jest w otwór na twarz z zatyczką maskującą. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka PU o grubości 4 lub 5 cm pokryta tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego. Rama dolna typu F0 wyposażona jest po jednej stronie w 2 małe kółka ułatwiające przetaczanie stołu i po drugiej stronie w 2 podgumowane stopki z regulacją do 1 cm (poziomowanie)

Stacjonarny stół rehabilitacyjno-zabiegowy Terapeuta E-S2.F0.69 cechuje stabilność, niezawodność i prostota użytkowania. Znajduje zastosowanie do prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem leczniczego masażu lub innych terapii mających na celu przywrócenie sprawności poszczególnym partiom ciała pacjenta. Stosowany również jako stół (kozetka) przy przeprowadzaniu badań u pacjentów oraz w kinezyterapii do ćwiczeń z pacjentem w kabinie UGUL lub z użyciem innych systemów do ćwiczeń w podwieszeniu. Jest używany także przez wielu specjalistów w gabinetach rehabilitacji i fizjoterapii, między innymi do zabiegów z użyciem aparatów leczniczych, czy lamp naświetlających.

Producent: Meden-Inmed



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Wyposażenie standardowe

- leże bez systemu podgrzewania
- atestowana tapicerka zmywalna z palety Standard
- wypełnienie leża pianką PU o grubości 4 cm

Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- leże z elektrycznym podgrzewaniem
- wypełnienie leża pianką PU o grubości 5 cm
- atestowana tapicerka zmywalna z palety Premium
- 2 barkowe banany stabilizujące
- opuszczane bariery lub poręcze boczne zabezpieczające pacjenta albo relingi boczne do zapinania pasów stabilizujących
- pasy do stabilizacji pacjenta (długość ok. 2,5 m)
- wybrany wieszak na podkłady higieniczne w rolkach:
 - zintegrowany z leżem - na rolki podkładów $\varnothing 16$ cm i szerokości max 60 cm
 - zintegrowany z ramą dolną - na rolki podkładów $\varnothing 14$ cm i szerokości max 60 cm
- podpórka Cyriax pod nogi terapeuty stosowana przy manipulacji szyjnej

Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - paleta Standard

Wysokiej jakości funkcjonalny materiał obiciowy typu skóra ekologiczna o podwyższonej odporności na ciecze (olejki, woda, solanki) i na płyny ustrojowe (krew, pot, moczu). Odporny na działanie wysokich temperatur, wysoce wytrzymały i odporny na zadrapania. Charakteryzuje się miękką i elastyczną powłoką. Może być czyszczony wybranymi środkami do dezynfekcji, zaleca się jednak czyszczenie tapicerki wyłącznie wodą z mydłem.



TAPICERKA paleta STANDARD



Parametry: grubość $0.85 \pm 0,15$ mm | masa powierzchniowa: ≥ 540 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne $\geq 35 / \geq 20$ daN/5cm | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz $\geq 2,5 / \geq 2,5$ daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥ 40.000 cykli wg metody Martindale`a.

Surowce: powłoka olejoodporna - PCV modyfikowane 100% | nośnik - PES 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować środkami do dezynfekcji zalecanymi w instrukcji obsługi stołu.



Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - paleta Premium objęta dopłatą

Najwyższej jakości skóropodobny materiał obiciowy produkowany przez SPRADLING International GmbH pod nazwą handlową Dolce PU. Wykonany z poliuretanu na podkładzie ze sztucznego jedwabiu. Pokryty antybakteryjną warstwą z jonami srebra. Niezwykle miękki, a równocześnie odporny na zarysowania oraz rozdarcia i przetarcia. Sześciokrotnie bardziej wytrzymały od tapicerki z palety Standard. Zmywalny i łatwy do czyszczenia. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu, stąd bezpieczny w kontakcie z dziećmi i osobami uczulonymi na lateks. Zgodny z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie migracji określonych pierwiastków oraz stosowania barwników azowych, w tym z normami: EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek) i 2005/84/EC (ftalany w zabawkach i produktach pielęgnacyjnych dla dzieci).



Parametry: gramatura: 370 g/m² | pęknięcie w niskich temperaturach: -23°C | odporność powłoki na ścieranie ≥ 300.000 cykli Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2) | odporność na pleśń (podkład i warstwa wierzchnia) | odporność na promienie UV: XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479-BLUE WOOL SCALE.

Surowce: powłoka - poliuretan (PU) 100% | nośnik - sztuczny jedwab 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować środkami do dezynfekcji wskazanymi w instrukcji konserwacji.



TAPICERKA paleta PREMIUM

PERMABLOK³® PERMAGUARD[®]
OCHRONA PRZED BAKTERIAMI I PŁAMAMI | DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA PŁAMY



Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja badania i zabiegi
Barierki boczne	barierki boczne opcjonalnie
Regulacja wysokości leża	elektryczna nożna (rama)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	47-95 cm
Liczba sekcji leża	2 sekcje (2-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomu leża
Sekcja lędźwiowo-nożna	bez regulacji
Wymiary obrysowe leża (dł. x szer.)	202 x 69 cm
Pozycja Pivota	Nie
Funkcja fotela	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Pozycja Trendelenburga	Nie
System jezdny	2 kółka lub rolki w standardzie
Dopuszczalne obciążenie	225 kg
Model/seria produkcyjna stołu	Terapeuta (Meden-Inmed)
Barierki boczne - rodzaj	opcjonalnie opuszczane
Barierki boczne - materiał	lakierowane profile stalowe i aluminiowe
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	225
Rodzaj ramy dolnej stołu	prostokątna typ F0
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System autoryzacji dostępu	system PAS zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Regulacja wysokości ramą wokół podstawy stołu	w standardzie
Długość sekcji zagłówka [cm]	69
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji zagłówka	-20° do +85°
Otwór w zagłówku	w standardzie z zatyczką
Długość sekcji lędźwiowo-nożnej [cm]	129
Podgrzewanie leża	opcjonalnie
Releingi do pasów stabilizacyjnych	opcjonalnie obustronne lub barierki ochronne
Gniazda pod banany do trakcji	opcjonalnie
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie

System jezdny - typ	typ F0- 2 małe kółka ułatwiające przetaczanie stołu i 2 podgumowane stopki z regulacją do 1 cm
Zasilanie elektryczne	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	80
Numer katalogowy produktu	Terapeuta E-S2.F0 202x69cm
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMI PB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	2 lata
Gwarancja na elementy pneumatyczne	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Producent	Meden-Inmed sp. z o.o. [10]
Siedziba producenta	[10] ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[10] meden.com.pl/serwis
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Szerokość paczki [cm]	80
Długość paczki [cm]	220
Wysokość paczki [cm]	80
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą [kg]	100

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>