

## NBVE-110NL

lampa bakteriobójcza UV-C przepływowa ścienna z licznikiem



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



### OBUDOWA LAMPY





blacha ze stali nierdzewnej INOX - kolor srebrzysty matowy (naturalny)



18 - 36 m<sup>2</sup>  
45 - 90 m<sup>3</sup>



199 m<sup>3</sup>/h

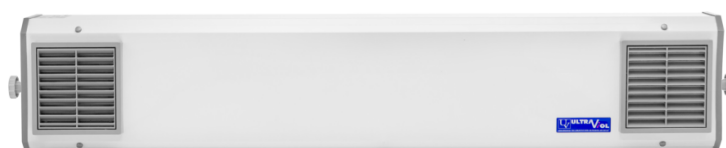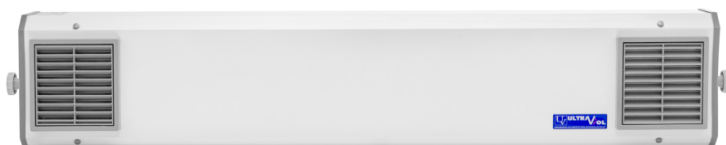

blacha lakierowana proszkowo na kolor biały

Przepływowa lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej powietrza. Skutecznie eliminuje unoszące się w powietrzu drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśnie, wirusy i bakterie. Wyposażona jest w dwa promienniki o mocy 55W emitujące wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali 235,7 nm. Promienniki zabudowane są w wykonanej ze stali nierdzewnej przepływowej komorze dezynfekcyjnej z wymuszonym przez wentylator obiegiem powietrza, dzięki czemu przepływowa lampa UV-C może być załączana podczas pobytu ludzi i zwierząt w pomieszczeniu celem permanentnej dezynfekcji powietrza nawet przez całą dobę, także w warunkach domowej opieki nad chorym. W obudowie lampy został wbudowany elektromechaniczny licznik L, który odmierza godziny pracy promienników UV-C i sygnalizuje konieczność ich wymiany. Ten model lampy przeznaczony jest do montażu na ścianie w odległości ok. 30 cm od sufitu.

Wlot powietrza do przepływowej komory dezynfekcyjnej zabezpieczony jest wymiennym filtrem przeciwpylowym. Producent lampy zaleca wymianę filtra co ok. 2160 godzin pracy promienników bakteriobójczych, czyli średnio co kwartał przy permanentnej dezynfekcji powietrza (praca lampy 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu). Opcjonalnie przy zakupie lampy dostępne są filtry zapasowe do lamp NBVE.

### Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

ULTRA-VIOL Pietras Purgał Wójcik sp.j.  
ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz  
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl



### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

# DANE TECHNICZNE

Rodzaj lampy UV-C	przepływową ścienną
Model lampy (seria)	NBVE
Moc i liczba promienników UV-C	110W [2x55W]
Skuteczność w pomieszczeniu	do 36 m <sup>2</sup> [90 m <sup>2</sup> ]
Wydajność wentylatora	199 m <sup>3</sup> /h
Żywotność promienników UV-C	8000 godzin pracy
Licznik czasu pracy promienników	mechaniczny z cyferblatem
Sygnalizacja wymiany promienników	akustyczna
Pilot zdalnego sterowania	Nie
Przewód zasilający lampę UV-C	1 m z kostką do wpięcia w instalację
Wydajność dezynfekcji powietrza	45-90 m <sup>3</sup> /h
Typ promienników UV-C	UV-C TUV G13
Producent promienników UV-C	Philips lub OSRAM
Długość promienników UV-C [mm]	894,60 mm
Długość fali promieniowania UV-C	253,7 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki	zerowy - nie wytwarzają fal o długości 185nm odpowiedzialnych za powstawanie ozonu
Zasilanie sieciowe lampy	AC   230 V   50 Hz
Pobór mocy	115 VA
Klasa zabezpieczenia lampy	I klasa
Klasa szczelności obudowy lampy	IP20
Licznik czasu pracy promienników - typ	wewnętrzny licznik elektromechaniczny L
Licznik czasu pracy promienników - wyświetlacz	cyferblat mechaniczny
Długość kopuły [cm]	112,5
Szerokość kopuły [cm]	21,5
Wysokość kopuły [cm]	13
Długość całkowita lampy [cm]	119
Szerokość całkowita lampy [cm]	21,5
Wysokość całkowita lampy [cm]	14,5
Waga całkowita lampy [kg]	9,15
Numer katalogowy produktu	NBVE-110NL
Kod PKWiU	26.60.13.0
Kod CN	9018 20 00
Certyfikacja produktu	CE
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%

Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	10
Producent wyrobu	[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j.  ul. Stepowizna34; 95-100 Zgierz [Polska]  42 717 11 76 @ <a href="mailto:biuro@ultraviol.pl">biuro@ultraviol.pl</a>
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	 42 715 02 16 @ <a href="mailto:reklamacje@ultraviol.pl">reklamacje@ultraviol.pl</a>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24