

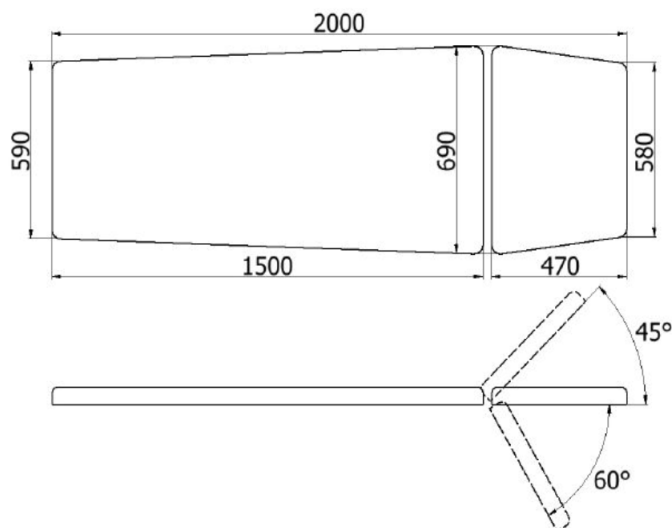
JSR.H
stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 2-częściowy hydrauliczny

 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta


Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w hydrauliczną regulację wysokości przyciskiem nożnym w ramie dolnej stołu. Wykonany na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo. Stół rehabilitacyjny posiada 2 częściowe leże z sekcją zagłówka regulowanego w zakresie powyżej i poniżej poziomu głównej części leża przy pomocy sprężyny gazowej. Wypełnienie leża z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej wysokiej jakości. Leże pokryte bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego (opcjonalnie). Po obu stronach leża znajdują się relingi do zapinania pasów stabilizujących pacjenta.

Podstawa stołu rehabilitacyjnego JSR.H posiada w standardzie podgumowane stopki z możliwością stabilizacji i poziomowania stołu na nierównym podłożu. Opcjonalnie podstawa może być doposażona dodatkowo w system kół opuszczanych umożliwiający przetaczanie stołu na terenie gabinetu i placówki. Opuszczając koła dźwignią nożną następuje jednoczesne wypchnięcie stopek ku górze. Stół można wtedy przetaczać bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

Stół rehabilitacyjny JSR.H można dodatkowo doposażyć w opuszczane ręcznie podfólkietniki w sekcji zagłówka pozwalające na wygodne oparcie przedramion pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu oraz w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części stołu i opisany wyżej system kół opuszczanych.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000035501)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE PRODUKTU

| | |
|---|--|
| Przeznaczenie stołu stacjonarnego | rehabilitacja masaż klasyczny |
| Regulacja wysokości leża | hydrauliczna nożna (dźwignia) |
| Zakres regulacji wysokości leża od podłoża | 60-88 cm |
| Liczba sekcji leża | 2 sekcje (2-częściowe) |
| Sekcja zagłówka | regulowana +/- poziomiu leża |
| Sekcja leżdziwio-nożna | bez regulacji |
| Wymiary obrysowe leża (dl. x szer.) | 200 x 69 cm |
| Pozycja Pivota | Nie |
| Funkcja fotela | Nie |
| Pozycja Trendelenburga | Nie |
| Pozycja antyTrendelenburga | Nie |
| Funkcja CPR | Nie |
| Podłokietniki przy zagłówku | opuszczane - wyposażenie opcjonalne |
| System jezdny | 4 koła - wyposażenie opcjonalne |
| Dopuszczalne obciążenie | 150 kg |
| Usługa wniesienia stołu do lokalu | dostępna |
| Model/seria produkcyjna stołu | JSR (Juventas) |
| Statyczna wytrzymałość leża [kg] | 150 |
| Rodzaj ramy dolnej stołu | prostokątna |
| Materiał ramy dolnej stołu | lakierowane profile stalowe |
| System podnoszenia leża | siłownik hydrauliczny z dźwignią nożną |
| Długość sekcji zagłówka [cm] | 47 |
| Sposób regulacji zagłówka | pneumatyczny (sprężyna gazowa) |
| Zakres regulacji zagłówka | -60° do +45° |
| Podłokietniki przy zagłówku | opcjonalnie 2 podłokietniki opuszczane |
| Podłokietniki - sposób regulacji | ręczny |
| Podłokietniki - zakres regulacji | 0 - 20 cm od poziomu zagłówka |
| Długość sekcji leżdziwio-nożnej [cm] | 150 |
| Relingi do pasów stabilizacyjnych | obustronne |
| Wieszak na podkłady higieniczne | opcjonalnie |
| System jezdny - typ | opcjonalnie 4 opuszczane koła kierunkowe z blokadą jazdy |
| Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg] | 58 |
| Numer katalogowy produktu | JSR H / JSR H Plus |

| | |
|---|--|
| Kod PKWU | 32.50.21.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod UDI | 590401370stolyhydrKP |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | JSR H stacjonarny stół rehabilitacyjny sterowany hydraulicznie |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 2 lata |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 2 lata |
| Gwarancja na elementy hydrauliczne | 2 lata |
| Gwarancja na elementy pneumatyczne | 2 lata |
| Gwarancja na tapicerkę standardową | 1 rok |
| Gwarancja na tapicerkę premium | 1 rok |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka paletowa |
| Rodzaj palety | paleta przemysłowa bezzwrotna |
| Gabaryt produktu na paletcie | 220x80x80 cm |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg] | 80 |
| Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy | odpłatna |
| Producent wyrobu | [38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurówce [Polska] ☎ 13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [38] PL-MF-000035501 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24