

## NBVE-60/30P RC

2-funkcyjna lampa bakteriobójcza przepływowa mobilna z pilotem



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



10 - 20 m<sup>2</sup>  
25 - 50 m<sup>3</sup>



132 m<sup>3</sup>/h




100 μW/cm<sup>2</sup>



### OBUDOWA LAMPY

blacha ze stali nierdzewnej INOX  
kolor srebrzysty matowy (naturalny)

blacha lakierowana proszkowo  
na kolor biały (doptata)

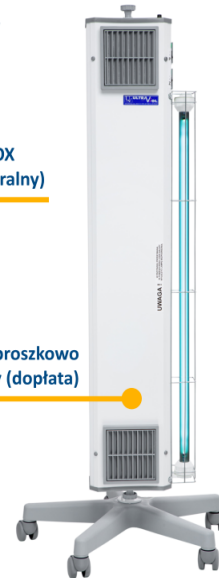

2-funkcyjna, przepływowa lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powierzchni i powietrza w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej. Skutecznie eliminuje drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśnie, wirusy i bakterie. Lampy bakteriobójcze serii NBVE są urządzeniami energooszczędnymi, wyposażonymi w promienniki o długiej żywotności (8000 godzin pracy), dlatego ich stosowanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji tych lamp.

Wlot powietrza do przepływowej komory dezynfekcyjnej zabezpieczony jest wymiennym filtrem przeciwpylowym. Producent lampy zaleca wymianę filtra co ok. 2160 godzin pracy promienników bakteriobójczych, czyli średnio co kwartał przy permanentnej dezynfekcji powietrza (praca lampy 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu). Opcjonalnie przy zakupie lampy dostępne są filtry zapasowe do lamp NBVE.

Lampa NBVE-60/30P RC osadzona jest na statywie wykonanym z tworzywa sztucznego z 5-ramienną podstawą wyposażoną w 5 kółek bez hamulca. Opcjonalnie 2 kółka mogą być wyposażone w hamulec (blokadę jazdy).

2-funkcyjna, przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE-60/30P RC z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania zapewnia pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego. Daje możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi i zwierząt (komora przepływowa UV-C – funkcja I), jak również bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia i powierzchni jego wyposażenia podczas nieobecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu (promiennik bezpośredniego działania – funkcja II). Obie funkcje są od siebie niezależne. Włączanie i wyłączanie poszczególnych funkcji następuje z panelu umieszczonego na obudowie lampy lub za pomocą pilota zdalnego sterowania pracą lampy, który znajduje się na jej wyposażeniu.

### Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j.  
ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz  
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl



### Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Rodzaj lampy UV-C	2-funkcyjna mobilna
Model lampy (seria)	NBVE 2-funkcyjna
Łączna moc i liczba promienników	90W [3]
Dezynfekcja powietrza - moc	60W [2x30W]
Dezynfekcja powierzchni- moc	30W [1x30W]
Dezynfekcja powierzchni- natężenie UV-C	100 µW/cm²
Skuteczność w pomieszczeniu	do 20 m² [50 m³]
Wydajność wentylatora	132 m³/h
Żywotność promienników UV-C	8000 godzin pracy
Liczniki czasu pracy promienników	bez liczników
Sygnalizacja wymiany promienników	akustyczna
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Przewód zasilający lampę UV-C	3 m z wtyczką do gniazda typu E
Wydajność dezynfekcji powietrza	25-50 m³/h
Typ promienników UV-C	TUV 30W lub HNS 30W
Producent promienników UV-C	Philips lub OSRAM
Długość promienników UV-C [mm]	894,60 mm
Długość fali promieniowania UV-C	253,7 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki	zerowy - nie wytwarzają fal o długości 185nm odpowiedzialnych za powstawanie ozonu
Oddziaływanie promieniowania UV-C na tworzywa sztuczne	może powodować odbarwienia i żółknięcie
Przenikalność promieniowania UV-C przez powierzchnie	zerowa, następuje odbicie promieni od powierzchni
Poziom hałasu - funkcja przepływowa	max 33 dB
Poziom hałasu - funkcja bezpośredniego działania	0 dB
Zasilanie sieciowe lampy	AC   230 V   50 Hz
Pobór mocy - obie funkcje	105 VA
Klasa zabezpieczenia lampy	I klasa
Klasa szczelności obudowy lampy	IP20
Zdalne sterowanie pracą lampy	pilot RC NBVE 2F + odbiornik radiowy
Odbiornik RC - położenie	obudowa lampy
Odbiornik RC - pobór mocy	0,1 VA
Pilot RC - zasięg działania	do 25 metrów
Pilot RC - częstotliwość pracy	433,92 MHz
Pilot RC - zasilanie	DC bateria 12V typ A23
Pilot RC - klasa zabezpieczenia	II klasa
Pilot RC - klasa szczelności obudowy	IP20

Zdalne sterowanie - zabezpieczenia	zabezpieczenie przed włączeniem lub wyłączeniem innych lamp (niestandardowy system kodowania)
Długość kopuły [cm]	112,5
Szerokość kopuły [cm]	28,5
Wysokość kopuły [cm]	13
Waga kopuły lampy [kg]	9
Wysokość statywu [cm]	134
Waga statywu [kg]	4,5
Długość całkowita lampy [cm]	60
Szerokość całkowita lampy [cm]	60
Wysokość całkowita lampy [cm]	134
Waga całkowita lampy [kg]	13,65
Numer katalogowy produktu	NBVE-60/30P RC
Kod PKWiU	26.60.13.0
Kod CN	9018 20 00
Certyfikacja produktu	CE
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	2
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	15
Producent wyrobu	[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j. ul. Stepowizna34; 95-100 Zgierz [Polska] 42 717 11 76 @ biuro@ultraviol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	42 715 02 16 @ reklamacje@ultraviol.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24