

## AsCARD Orange 07.105W elektrokardiograf 12-kanałowy




Prosty w obsłudze i wysokiej klasy 1/3/6/12-kanałowy aparat EKG wykonany w oparciu o nowoczesne technologie mikroprocesorowe - wersję 07.105 wprowadzono na rynek latem 2019 roku. Aparat umożliwia wykonywanie elektrokardiogramów w pełnym zakresie 12 odprowadzeń u zwierząt w weterynarii w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału.

Nr katalogowy: APL-07-101-0706\*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

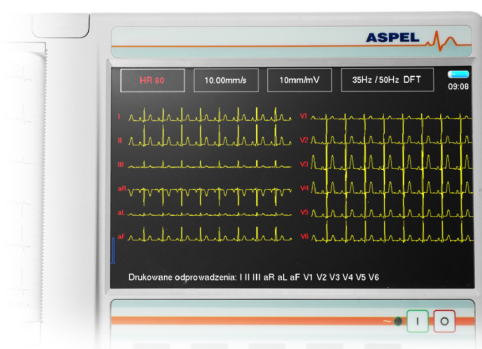

# AsCARD Orange 07.105W

## elektrokardiograf 12-kanalowy

CE 0197



Elektrokardiograf oferuje manualny i automatyczny tryb rejestracji zapisu EKG. Posiada kolorowy i dotykowy ekran graficzny LCD 7" i alfanumeryczną klawiaturę z przyciskami funkcyjnymi oraz wbudowaną drukarkę termiczną (papier 112 mm) i akumulator pozwalający na wykonanie do 130 badań bez zasilania z sieci. Wyposażony jest w szereg przydatnych funkcji, między innymi w moduł automatycznej analizy i interpretacji elektrokardiogramu oraz automatyczną detekcję zespołów QRS i ciągły pomiar częstości akcji serca HR z dowolnie wybranego odprowadzenia. Posiada wbudowaną pamięć 1000 rekordów do wykorzystania na zapis badań lub bazę pacjentów. Weterynaryjny aparat EKG AsCARD Orange 7.105W przeznaczony jest do wykonywania badań EKG w gabinetach weterynaryjnych i klinikach dla zwierząt, a także wszędzie tam, gdzie znajdują się skupiska zwierząt, np. w ogrodach zoologicznych, stadninach koni, schroniskach dla zwierząt, itp.. Spakowany w dedykowaną walizkę transportową (opcja dodatkowa) aparat EKG może służyć także podczas wizyt weterynaryjnych w gospodarstwach rolnych i w firmach hodowli zwierząt, a wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwala na badania EKG w terenie bez zasilania elektrycznego z sieci.

### W standardzie

- kabel EKG KEKG 30R - 1 szt.
- kabel EKG KEKG 30W weterynaryjny - 1 szt.
- elektrody przyssawkowe EPP - 6 szt.
- elektrody kończynowe klipsowe EKK - 4 szt.
- uchwyt szczękowy krokodylek - 10 szt.
- żel EKG 250g - 1 szt.
- papier EKG RA4 112 mm - 1 rolka
- zasilacz sieciowy medyczny M12-15 z kablem - 1 szt.
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

### Opcje dodatkowe z dopłatą

- stolik-wózek WB5 pod aparat EKG lub W30W pod aparat i drukarkę zewnętrzną
- walizka WMB5 na aparat EKG

Producent: ASPEL spółka akcyjna

**ASPEL**  
SPRZĘT MEDYCZNY

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11  
533 99 22 01

Nr katalogowy: APL-07-101-0706\*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

Zastosowanie w dziedzinie	weterynaria
Seria aparatu EKG	AsCard Orange
EKG ilość kanałów	12 kanałowy
EKG ilość odprowadzeń	12 odprowadzeń
EKG ekran / wyświetlacz	LCD TFT dotykowy 7"
Klawiatura w aparacie EKG	alfanumeryczna i funkcyjna
Zasilanie aparatu EKG	sieć i akumulator
Porty (gniazda) aparatu EKG	USB
Komunikacja Wi-Fi	Nie
Protokół HL7	Nie
Drukarka wewnętrzna EKG	termiczna EKG 112 mm
Dodatkowe cechy aparatu EKG	brak
Drukarka zewnętrzna EKG	brak (brak portu drukarki)
Wózek do aparatu EKG	dostępny opcjonalnie
Częstotliwość próbkowania jednego kanału [Hz]	2000
Aparat EKG - tryb rejestracji	manualny i automatyczny
Aparat EKG - tryb automatyczny	z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu
Drukarka wewnętrzna - szczegóły	termiczna na papier w rolkach 110-112 mm
Drukarka wewnętrzna - tryb wydruku	wydruk 1, 3, 6 lub 12 kanałów
Drukarka wewnętrzna - opcje wydruku	normalna lub pogrubiona grubość wydruku linii krzywych EKG
Zapis EKG - czułość zapisu	2,5/5/10/20 mm/mV
Zapis EKG - prędkość zapisu	5/10/25/50 mm/s
Filtr zakłóceń sieciowych	50 Hz   60 Hz
Filtr zakłóceń mięśniowych	25 Hz   35 Hz   45 Hz
Filtr izolacji	0,15 Hz   0,45 Hz   0,75 Hz   1,5 Hz
Funkcje EKG - moduł analityczny	analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE)
Funkcje EKG - detekcja QRS	automatyczna
Funkcje EKG - detekcja HR	ciągły pomiar HR z prezentacją na wyświetlaczu
Funkcje EKG - prezentacja krzywych	w układzie standardowym lub Cabrera
Funkcje EKG - detekcja częstości akcji serca	wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca
Funkcje EKG - detekcja pobudzeń	sygnalizacja dźwiękowa

Funkcje EKG - detekcja stymulatora serca	<b>tak</b>
Funkcje EKG - inne funkcje	<b>aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu</b>
Funkcje EKG - detekcja odpięcia elektrody	<b>niezależna dla każdej elektrody</b>
Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym	<b>tak</b>
Ekran aparatu EKG - typ	<b>dotykowy LCD TFT kolorowy</b>
Ekran aparatu EKG - przekątna	<b>7"</b>
Ekran aparatu EKG - funkcje	<b>prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG   graficzne menu ekranowe</b>
Pamięć aparatu EKG	<b>baza danych pamięci 1000 rekordów (1000 badań lub pacjentów)</b>
Archiwizacja danych	<b>EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna)</b>
Klawiatura aparatu EKG- rodzaj	<b>membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi</b>
Komunikacja - USB	<b>tak</b>
Komunikacja - Wi-Fi	<b>nie</b>
Komunikacja - Ethernet (LAN)	<b>nie</b>
Komunikacja - funkcje	<b>eksport badań do programu CardioTEKA   zapis badań do pamięci Flash</b>
Menu aparatu EKG	<b>j. polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski i serbski</b>
Zasilanie sieciowe	<b>AC   100-230 V   50/60 Hz</b>
Zasilanie akumulatorowe	<b>wbudowany akumulator   do 130 badań automatycznych na akumulatorze</b>
Szerokość aparatu [cm]	<b>25,8</b>
Głębokość aparatu [cm]	<b>19,9</b>
Wysokość aparatu [cm]	<b>5</b>
Waga aparatu[kg]	<b>1,3</b>
Numer katalogowy produktu	<b>07-101-0706</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg URPLWMiPB	<b>wyrób medyczny</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>

Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu		
Producent	ASPEL spółka akcyjna [18]		
Siedziba producenta	[18] os. H. Sieniewicza 33; 32-080 Zabierzów [Polska]		
Serwis techniczny w Polsce	sieć serwisowa producenta		
Serwis techniczny - kontakt	[18] aspel.com.pl/serwis,31		
Pomoc techniczna producenta - kontakt	serwis@aspel.com.pl	694 423 953	7:00 - 15:00
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)		
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	2		

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.