

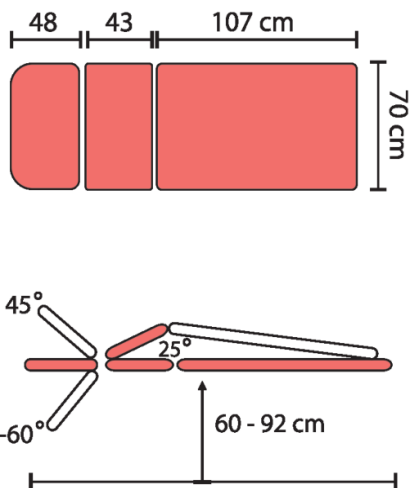
PRO.3
stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 3-częściowy elektryczny

 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta


TAPICERKA - paleta Medi



Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w mechaniczne łamanie leża w części środkowej do pozycji Pivota umieszczonym pod leżem mechanizmem korbowym oraz w elektryczną regulację wysokości ramą sterującą umieszczoną w podstawie stołu. Nożna regulacja wysokości leża odbywa się płynnie i szybko dzięki zastosowaniu w systemie podnoszenia i opuszczania stołu wydajnego silownika elektrycznego. Regulacja nożna pozwala rehabilitantowi na przeregulowanie wysokości stołu z każdego miejsca przy leżysku stołu bez odrywania rąk od pacjenta.

Stół rehabilitacyjny PRO.3 wyposażony jest 3-częściowe leże o szerokości 70 cm i długości 203 cm z sekcją zagłówka regulowaną pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża oraz z sekcjami piersiową i lędźwiowo-nożną. Wypełnienie leża z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezszwowo tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru z palety Medi lub palety V-Line. Zagłówek jest wyposażony w otwór do oddychania z wyjmowaną zatyczką. Przy sekcji lędźwiowo-nożnej znajdują się obustronne relingi do pasów stabilizujących pacjenta podczas terapii lub ćwiczeń kinezyterapeutycznych.

Stół PRO.3 wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania. Podstawa stołu wyposażona jest standardowo w cztery podgumowane stopki z regulacją umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu gabinetu, a opcjonalnie również w system kół opuszczanych umożliwiający przetaczanie stołu na terenie gabinetu i placówki. Opuszczając koła dźwigniową nożną następuje jednoczesne wypchnięcie stopek ku górze. Stół można wtedy przetaczać bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

Stół rehabilitacyjny PRO.3 można jeszcze dodatkowo doposażyć w opuszczane ręczne podłokietniki przy sekcji zagłówka pozwalające na wygodne oparcie przedramienia pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu oraz w uchwyt na podkładki higieniczne w rolce montowany w tylnej części stołu.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000023594](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000023594)
PRODUCENT

Autoryzowany dystrybutor producenta
EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE PRODUKTU

Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja masaż klasyczny
Regulacja wysokości leża	elektryczna nożna (rama)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	60-92 cm
Liczba sekcji leża	3 sekcje (3-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomiu leża
Sekcja piersiowa	regulowana - łamanie leża
Sekcja lędźwiowo-nożna	regulowana (łamanie leża)
Wymiary obrysowe leża (dl. x szer.)	203 x 70 cm
Pozycja Pivota	Tak
Funkcja fotela	Nie
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Funkcja CPR	Nie
Podłokietniki przy zagłówku	opuszczane - wyposażenie opcjonalne
System jezdny	4 koła - wyposażenie opcjonalne
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Usługa wniesienia stołu do lokalu	dostępna
Model/seria produkcyjna stołu	PRO (BH Kinesis)
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	150
Rodzaj ramy dolnej stołu	prostokątna
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Regulacja wysokości ramą wokół podstawy stołu	w standardzie
Długość sekcji zagłówka [cm]	48
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny
Zakres regulacji zagłówka	-60° do +45°
Otwór w zagłówku	w standardzie z zatyczką
Podłokietniki przy zagłówku	opcjonalnie 2 podłokietniki opuszczane
Podłokietniki - sposób regulacji	ręczny
Podłokietniki - zakres regulacji	0 do -20 cm od poziomu zagłówka
Długość sekcji piersiowej [cm]	43
Sposób regulacji sekcji piersiowej	mechaniczny
Zakres regulacji sekcji piersiowej	0° do +25°
Sposób łamania leża w cz. środkowej	mechaniczny mechanizmem korbowym
Zakres łamania leża w cz. środkowej	0° do +25°
Długość sekcji lędźwiowo-nożnej [cm]	107
Otwór w sekcji lędźwiowo-nożnej	opcjonalnie
Reeling do pasów stabilizacyjnych	obustronne

Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
System jezdny - typ	opcjonalnie 4 opuszczone koła kierunkowe z blokadą jazdy
Zasilanie elektryczne	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	82
Numer katalogowy produktu	PRO 3
Kod PKWU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904063815proKM
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 13
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	PRO 3 stół rehabilitacyjny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezwrotna
Gabaryt produktu na palecie	220x80x80 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	110
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[16] KINESIS Biuro Handlowe Andrzej Boruta - ul. Penara 23; 38-440 Iwonicz-Zdrój[Polaska]☎13 435 06 45 @biurokinesis@kinesis.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[16] PL-MF-000018445
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 435 06 45 @biurokinesis@kinesis.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[16a] ☎ 695 768 360 biurokinesis@kinesis.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należącą potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24