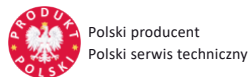



**WSR.E**
**stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 2-częściowy elektryczny**

 Polski producent  
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa  
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

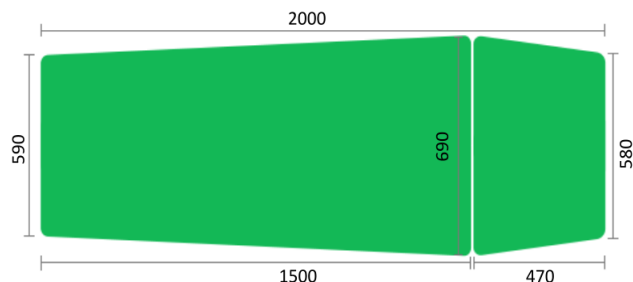 Maksymalna waga  
pacjenta

 Dostępność Plus  
Dostępność AOS


Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w elektryczną regulację wysokości przewodowym pilotem ręcznym lub nożnym (opcjonalnie), a także z ramy sterującej wokół stołu (opcjonalnie). Wykonany na nowatorskiej, stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo. Stół rehabilitacyjny posiada 2 częściowe leże z sekcją zagłówka regulowanego w zakresie powyżej i poniżej poziomu głównej części leża przy pomocy sprężyny gazowej. Wypełnienie leża z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej wysokiej jakości o grubości 4 cm, pokryte beżową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego (opcjonalnie). Po obu stronach leża znajdują się relingi do pasów stabilizujących pacjenta.

Podstawa stołu rehabilitacyjnego WSR.E posiada w standardzie podgumowane stopki z możliwością stabilizacji i poziomowania stołu na nierównym podłożu. Opcjonalnie podstawa może być doposażona dodatkowo w system kół opuszczanych umożliwiający przetaczanie stołu na terenie gabinetu i placówki. Opuszczając koła dźwigniową nożną następuje jednoczesne wypchnięcie stopek ku górze. Stół można wtedy przetaczać bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

Stół rehabilitacyjny WSR.E można dodatkowo doposażyć w pilot nożny regulacji wysokości, ramę sterującą wysokością, opuszczane ręcznie podłokietniki w sekcji zagłówka pozwalające na wygodne oparcie przedramion pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu oraz w uchwyt na podkładki higieniczne w rolce montowany w tylnej części stołu i opisany wyżej system kąt opuszczanych.


**Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny**

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00035501](https://pl-mf-00035501)
**PRODUCENT**

**Autoryzowany dystrybutor producenta**
**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

 Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja   masaż klasyczny
Regulacja wysokości leża	elektryczna ręczna/nożna (pilot/rama)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	50-92 cm
Liczba sekcji leża	2 sekcje (2-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomu leża
Sekcja łądźwiowo-nożna	bez regulacji
Wymiary obrysowe leża (dł. x szer.)	200 x 69 cm
Pozycja Pivota	Nie
Funkcja fotela	Nie
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja anty-Trendelenburga	Nie
Funkcja CPR	Nie
Podkietniki przy zagłówku	opuszczane - wyposażenie opcjonalne
System jezdny	4 koła - wyposażenie opcjonalne
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Usługa wniesienia stołu do lokalu	dostępna
Model/seria produkcyjna stołu	WSR (Juventas)
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	150
Rodzaj ramy dolnej stołu	prostokątna
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Pilot ręczny bezprzewodowy	opcjonalnie
Pilot nożny przewodowy	opcjonalnie
Regulacja wysokości ramą wokół podstawy stołu	opcjonalnie
Długość sekcji zagłówka [cm]	47
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji zagłówka	-60° do +45°
Otwór w zagłówku	opcjonalnie
Podkietniki przy zagłówku	opcjonalnie 2 podkietniki opuszczane
Podkietniki - sposób regulacji	ręczny
Podkietniki - zakres regulacji	0 - 20 cm od poziomu zagłówka
Długość sekcji łądźwiowo-nożnej [cm]	150
Otwór w sekcji łądźwiowo-nożnej	opcjonalnie
Relingi do pasów stabilizacyjnych	obustronne
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
System jezdny - typ	opcjonalnie 4 opuszczane koła kierunkowe z blokadą jazdy

Zasilanie elektryczne	AC   230 V   50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	88
Numer katalogowy produktu	WSR E / WSR E Plus
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370stoylektrUS
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 13
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	WSR E stacjonarny stół rehabilitacyjny sterowany elektrycznie
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	2 lata
Gwarancja na elementy pneumatyczne	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na palecie	220x80x100 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	110
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska] ☎ 13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520   michal@juventas.pl

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24