

## T30P.200x90x12.PW10

materac przeciwdleżynowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym - 10 kompletów

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

Przeciwdleżynowe, piankowe materace szpitalne T30P o wymiarach katalogowych 200x90x12 cm do łóżek medycznych i rehabilitacyjnych przeznaczone dla osób obłożnie chorych o ograniczonych możliwościach ruchowych, u których poprzez długotrwałe leżenie w bezruchu mogą powstawać odleżyny. Wkład każdego materaca wykonany jest ze średnio twardej pianki poliuretanowej PU o gęstości 30 kg/m<sup>3</sup> pokrytej tkaniną obiciową składającą się z bawełny, polipropylenu i poliestru. Materace T30P charakteryzują się wysoką sprężystością z jednoczesną możliwością zginania w łóżkach medycznych z regulowanymi segmentami leża (np. zagłówek i segment nożny) oraz dobrą cyrkulacją powietrza wewnątrz wkładu, co pozwala zapewnić higieniczne warunki użytkowania. Grubość każdego materaca 12 cm zapewnia odpowiedni komfort dla pacjenta. Wycięcia wkładu na górnej płaszczyźnie każdego materaca (gofrowanie) tworzą bezdotykowe strefy z poduszkami powietrza co zmniejsza wielkość kontaktu ciała pacjenta z materacem, przez co krążenie krwi u pacjenta nie jest ograniczane a tym samym zmniejszona zostaje podatność na powstawanie odleżyn.

Materace wyposażone są w pokrowce medyczne wykonane z bielonego poliestru z wodoszczelną (nieprzemakalną), paroprzepuszczalną i antyalergiczną powłoką poliuretanową. Najważniejszą cechą pokrowców paroprzepuszczalnych jest wodoszczelność przy jednoczesnej przepuszczalności pary wodnej (materiał oddychający). Pokrowiec paroprzepuszczalny, przy zachowaniu swojej wodoszczelności na płyny z zewnątrz, pochłania w ciągu 24 godzin około 1000g/m<sup>2</sup> wilgoci z ciała pacjenta, co nie sprzyja powstawaniu odleżyn. Nie powoduje odparzeń skóry. Nadaje się również dla alergików. Pokrowce wzdłuż dwóch boków mają wszyty suwak błyskawiczny do zapinania pokrowca na materacu.

Właściwości pokrowca: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na przenikanie mikroorganizmów oraz na zginanie, powłoka antybakteryjna i przeciwgrzybicza. Odporny na wszystkie środki dezynfekujące nie zawierające chloru.

Skład surowcowy pokrowca: 40% Poliester + 60% poliuretan, gramatura 130g/m<sup>2</sup>.

Pranie: pokrowiec można prać w temperaturze do 95°C. Należy przestrzegać oznaczeń o warunkach czyszczenia i konserwacji znajdujących się na metce wszytej w pokrowiec.

Do materaca szpitalnego z pokrowcem paroprzepuszczalnym nie należy stosować żadnych dodatkowych prześcieradeł, ochraniaczy, podkładów ani materacy powierzchniowych. Pacjent o ograniczonej zdolności ruchowej winien leżeć bezpośrednio na pokrowcu paroprzepuszczalnym materaca. Inne zastosowanie powoduje szybkie uszkodzenie pokrowca i utratę jego funkcji.

Oferta Epic Premium obejmuje 10 kompletów materacy przeciwdleżynowych T30P.200x90x12.PW wraz z pokrowcami paroprzepuszczalnymi nieprzemakalnymi (wodoszczelnymi). Oferta nie jest dostępna dla zamawiających materace z dostawą do domu pod adresy prywatne (nie firmowe).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00051814](https://ec.europa.eu/eudamed/entry/PL-MF-00051814)

PRODUCENT

**JANPOL**  
FABRYKA MATERACY

Autoryzowany dystrybutor producenta


EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

## Pokrowiec paroprzepuszczalny nieprzemakalny

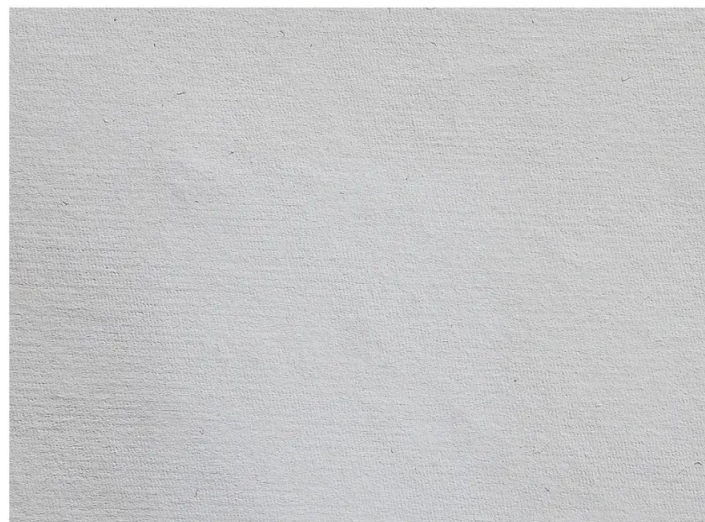

|  |  |
|--|--|
| Rodzaj oferty                              | <b>Epic Premium: 10 kompletów</b>  |
| Rodzaj materaca szpitalnego                | <b>piankowy przeciwodleżynowy</b>  |
| Rozmiar materaca                           | <b>200x90 cm</b>   |
| Twardość materaca                          | <b>średnio twardy</b>  |
| Pokrowiec materaca                         | <b>paroprzepuszczalny wodoodporny</b>  |
| Wkład materaca - materiał                  | <b>pianka poliuretanowa</b>  |
| Gęstość pianki wkładu materaca             | <b>30 kg/m³</b>  |
| Pokrowiec materaca - materiał              | <b>poliester z powłoką poliuretanową</b>   |
| Zapięcie pokrowca na materacu              | <b>suwak błyskawiczny</b>  |
| Pokrowiec - temperatura prania             | <b>95°C</b>  |
| Oferta Epic Premium - ilość                | <b>10 materacy T30P.200x90x12.PW z pokrowcami paroprzepuszczalnymi</b>                     |
| Długość materaca [cm]                      | <b>200 ±2</b>  |
| Szerokość materaca [cm]                    | <b>90 ±2</b>   |
| Grubość materaca [cm]                      | <b>12 ±1</b>   |
| Ciężar materaca z pokrowcem [kg]           | <b>18</b>  |
| Numer katalogowy produktu                  | <b>T30P 200x90x12 PW 10 kompletów</b>  |
| Kod PKWU                                   | <b>31.03.12.0</b>  |
| Kod CN                                     | <b>9404 21 90</b>  |
| Certyfikacja produktu                      | <b>CE/MDD/MDR</b>  |
| Dokument certyfikacji produktu             | <b>deklaracja zgodności</b>  |
| Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR        | <b>wyrób medyczny</b>  |
| Kod Basic UDI-DI                           | <b>5906267MATPOD3J</b>   |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego             | <b>klasa I, reguła 1</b>   |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego         | <b>Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych</b> |
| Nazwa zgłoszona do organu                  | <b>szpitalny materac przeciwodleżynowy</b>   |
| Numer wpisu do rejestru wyrobów medycznych | <b>PL/DR 011823</b>  |
| Stawka podatku VAT na produkt              | <b>8%</b>  |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT       | <b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>                |
| Gwarancja ogólna                           | <b>2 lata</b>  |
| Gwarant udzielający gwarancji              | <b>producent wyrobu / produktu</b>   |
| Gwarancja na wkład piankowy                | <b>2 lata</b>  |
| Gwarancja na pokrowiec materaca            | <b>2 lata</b>  |
| Rodzaj przesyłki z produktem               | <b>przesyłka niestandardowa z dostawą transportem własnym producenta</b>                   |

|   |   |
|---|---|
| Szerokość paczki [cm]   | <b>92</b>   |
| Długość paczki [cm]   | <b>202</b>  |
| Wysokość paczki [cm]  | <b>130</b>  |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg]   | <b>185</b>  |
| Producent wyrobu  | <b>[14] JANPOL Fabryka Materacy sp. z o.o. ul Cynkowa 2a, 43-180 Orzesze [Polska] ☎32 218 09 00 @ biuro@janpol.pl</b> |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej                   | <b>[14] PL-MF-000051814</b>   |
| Serwis techniczny w Polsce  | <b>fabryczny producenta</b>   |
| Serwis techniczny - kontakt   | <b>☎ 32 218 09 00 @ reklamacje@janpol.pl</b>  |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | <b>producent wyrobu medycznego (dane powyżej)</b>   |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu                           | <b>producent (dane powyżej)</b>   |
| Zgłaszanie incydentów medycznych  | <b>[14] ☎ 32 218 09 00   biuro@janpol.pl</b>  |

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
 GSM/SMS: **533 99 22 01**  
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
 ul. Staromiejska 6/10d  
 40-013 Katowice  
 NIP 9542784362  
 NIP UE: PL9542784362  
 REGON 368734116  
 KRS 0000703242  
 identyfikator celný: ID SISC/EORI PL954278436200000  
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24