

MDBW/1s.5005

szafa lekarska 1-skrzydłowa 2-komorowa niebieska



Polski producent
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa
na terenie Polski



ral 7035
jasny popielaty



ral 9010
biały




ral 1015
jasny beż



ral 5010
ciemny niebieski




ral 6033
mętowy zielony

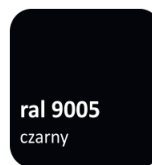

ral 9005
czarny



ral 7032
szary

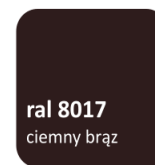

ral 8017
ciemny brąz



ral 2011
pomarańczowy



ral 3020
czerwony

Kolorystyka szaf
lakier proszkowy



Wolnostojąca szafa lekarska 1-skrzydłowa z oddzielnie zamykaną górną i dolną komorą szafy, wykonana z czarnej blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 5005 (niebieski sygnałowy). Górna komora szafy posiada od frontu stalowe drzwi w typie witrzyn z przeszkleniem wykonanym z bezpiecznego szkła hartowanego. Z tego samego szkła przeszklono również boki górnej komory korpusu szafy. Dolna komora posiada pełne drzwi stalowe bez przeszklenia. Wszystkie drzwi osadzone są na zawiasach kołkowych. Każde skrzydło drzwi posiada 3-punktowe ryglowanie zwalniane umieszczonym w drzwiach zamkiem baszkwilowym (bębenkowy, patentowy) z obracającym uchwytem klamkowym.

Standardowym wyposażeniem szafy lekarskiej są 3 półki, których położenie można regulować w pionie przenosząc półkę na kolejne wsporniki umieszczone w narożnikach szafy. 2 półki znajdują się w górnej komorze szafy, a 1 w dolnej komorze. Półki wykonane są z bezpiecznego szkła hartowanego. Nośność każdej półki wynosi 25 kg. W opcjach wyposażenia dodatkowego szafę można doposażyć w jedną lub dwie dodatkowe półki.

Standardowo podstawa szafy lekarskiej wyposażona jest w podgumowane stopki z regulacją do poziomowania szafy. W opcjach wyposażenia dodatkowego dostępne są podwyższające szafę o 10 cm nóżki stalowe z podgumowaniem albo z podgumowanymi stopkami regulacyjnymi do poziomowania szafy.

Szafa lekarska MDBW/1s.5005 spełnia wymagania zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do leków i środków medycznych na poziomie podstawowym i jest dedykowana do powszechnego stosowania w gabinetach lekarskich i zabiegowych placówek ochrony zdrowia, a także w szkolnych gabinetach pielęgniarskich oraz w stacjonarnych punktach pierwszej pomocy przedlekarskiej znajdujących się na terenie biur, zakładów pracy i innych obiektów niemedycejskich.

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

KART-MAP Spółka Jawna
Nikiełkowo, ul. Parkowa 3; 10-376 Olsztyn
89 535 71 50 | biuro@janpol.pl



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl <https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE TECHNICZNE

Rodzaj szafy	wolnostojąca na stopkach
Typ szafy lekarskiej	1-skrzydłowa 2-drzwiowa
Podział szafy	2-komorowa
Kolor korpusu szafy	RAL 5005 niebieski sygnałowy
kolor drzwi szafy	dostępne różne kolory
Materiał szafy	blacha stalowa
Przeszklenie witrynowe szafy	tylko górna komora - drzwi i boki
Wysokość całkowita korpusu szafy	180 cm
Szerokość całkowita szafy	60 cm
Głębokość całkowita szafy	42 cm
Podstawa szafy	4 stopki
Usługa wniesienia szafy do lokalu	dostępna
Konstrukcja	metalowa
Konstrukcja - materiał	czarna blacha stalowa
Grubość blachy [mm]	0,8
Powłoka malarska szafy	lakier proszkowy (epoksydowo-poliestrowy)
Zawiasy szafy	kolkowe
Rodzaj zamka drzwi	baskwilowy z obrotowym uchwytem klamkowym
Ryglowanie drzwi	3-punktowe
Przeszklenie drzwi - materiał	bezpieczne szkło hartowane
Przeszklenie korpusu na bokach - materiał	bezpieczne szkło hartowane
Liczba półek na wyposażeniu	3 półki
Materiał półek	bezpieczne szkło hartowane
Rozstaw półek w pionie	regulowany
Maksymalne obciążenie 1 półki [kg]	25
Wysokie stopki w podstawie	opcjonalnie wys. 10 cm
Szerokość szafy [cm]	60
Głębokość szafy [cm]	42
Wysokość szafy bez wyposażenia dodatkowego [cm]	180
Wysokość szafy z nóżkami [cm]	N: 190 cm NS: 192 - 193,4 cm
Ciężar szafy [kg]	55
Numer katalogowy produktu	MDBW/1s RAL 5005
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Dokument certyfikacji produktu	atest bezpieczeństwa (nie wymaga zmkau CE)
Stawka podatku VAT na produkt	23%

Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	70
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[15] KART-MAP Krzysztof Lachacz sp.j. ☎ Nikielkowo, ul. Parkowa 3; 10-376 Olsztyn [Polska] ☎89 535 71 50 @ biuro@janpol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 89 535 71 50 @ handlowy@kart-map.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24