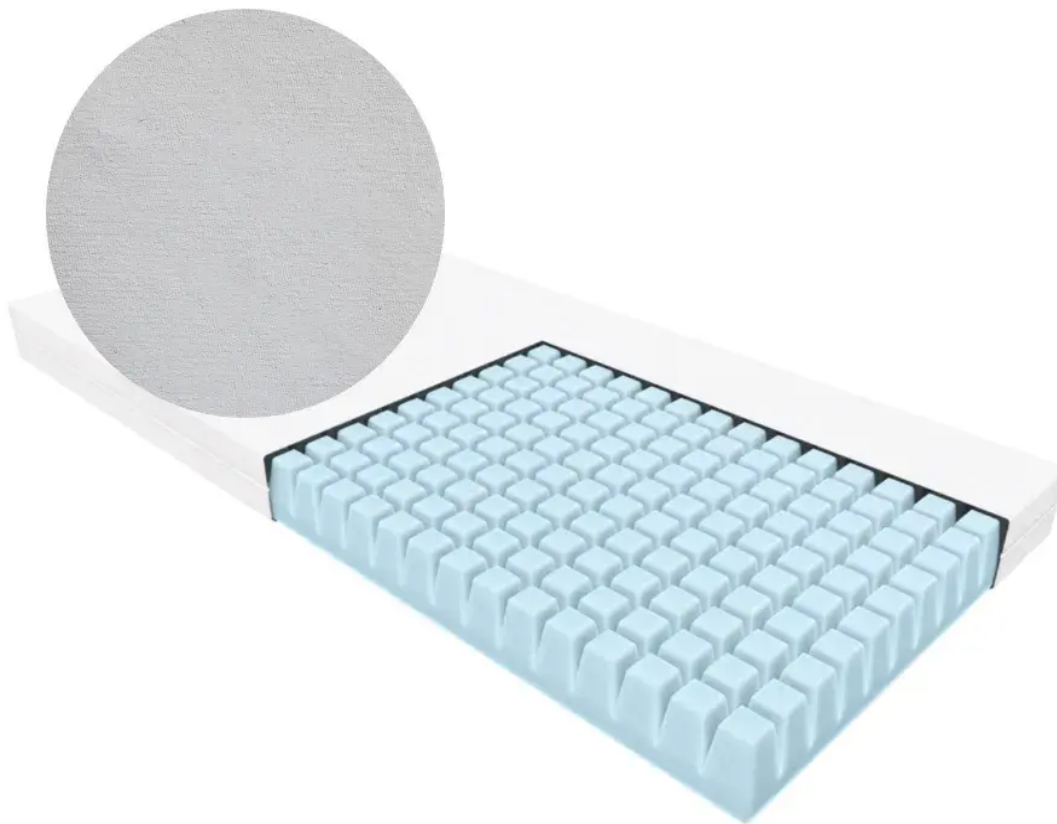


## T30P.200x90x12.PW

piankowy materac przeciwdoleźnowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym

Polski producent  
Polski serwis technicznyWyrób medyczny  
MDR 2017/745/EUDarmowa dostawa  
na terenie PolskiDeklaracja zgodności  
Oznakowanie CE

Przeciwdoleźnowy, piankowy materac szpitalny T30P o wymiarach katalogowych 200x90x12 cm do łóżek medycznych i rehabilitacyjnych przeznaczony dla osób obłożnie chorych o ograniczonych możliwościach ruchowych, u których poprzez długotrwałe leżenie w bezruchu mogą powstawać odleżyny. Wkład materaca wykonany jest ze średnio twardej pianki poliuretanowej PU o gęstości 30 kg/m<sup>3</sup> pokrytej tkaniną obiciową składającą się z bawełny, polipropylenu i poliestru. Materac T30P charakteryzuje się wysoką sprężystością z jednoczesną możliwością zginania w łóżkach medycznych z regulowanymi segmentami leża (np. zagłówek i segment nożny) oraz dobrą cyrkulacją powietrza wewnątrz wkładu, co pozwala zapewnić higieniczne warunki użytkowania. Grubość materaca 12 cm zapewni odpowiedni komfort dla pacjenta. Wycięcia wkładu na górnej jego płaszczyźnie (gofrowanie) tworzą bezdotykowe strefy z poduszkami powietrza co zmniejsza wielkość kontaktu ciała pacjenta z materacem, przez co krążenie krwi u pacjenta nie jest ograniczane a tym samym zmniejszona zostaje podatność na powstawanie odleżyn.

Materac wyposażony jest w pokrowiec medyczny wykonany z białego poliestru z wodoszczelną (nieprzemakalną), paroprzepuszczalną i antyalergiczną powłoką poliuretanową. Najważniejszą cechą pokrowca paroprzepuszczalnego jest wodoszczelność przy jednoczesnej przepuszczalności pary wodnej (materiał oddychający). Pokrowiec paroprzepuszczalny, przy zachowaniu swojej wodoszczelności na płyny z zewnątrz, pochłania w ciągu 24 godzin około 1000g/m<sup>2</sup> wilgoci z ciała pacjenta, co nie sprzyja powstawaniu odleżyn. Nie powoduje odparzeń skóry. Nadaje się również dla alergików. Pokrowiec wzdłuż dwóch boków ma wszyty suwak błyskawiczny do zapinania pokrowca na materacu.

Właściwości pokrowca: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na przenikanie mikroorganizmów oraz na zginanie, powłoka antybakteryjna i przeciwgrzybicza. Odporny na wszystkie środki dezynfekujące nie zawierające chloru.

Skład surowcowy pokrowca: 40% Poliester + 60% poliuretan, gramatura 130g/m<sup>2</sup>.

Pranie: pokrowiec można prać w temperaturze do 95°C. Należy przestrzegać oznaczeń o warunkach czyszczenia i konserwacji znajdujących się na metce wszytej w pokrowiec.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000051814](https://ec.europa.eu/eudamed/)

PRODUCENT

**JANPOL**  
FABRYKA MATERACY

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

## Pokrowiec paroprzepuszczalny nieprzemakalny



# DANE PRODUKTU

Rodzaj oferty	standard: pojedyncze sztuki
Rodzaj materaca szpitalnego	piankowy przeciwodleżynowy
Rozmiar materaca	200x90 cm
Twardość materaca	średnio twardy
Pokrowiec materaca	paroprzepuszczalny wodoodporny
Wkład materaca - materiał	pianka poliuretanowa
Gęstość pianki wkładu materaca	30 kg/m <sup>3</sup>
Pokrowiec materaca - materiał	poliester z powłoką poliuretanową
Zapięcie pokrowca na materacu	suwak błyskawiczny
Pokrowiec - temperatura prania	95°C
Długość materaca [cm]	200 ±2
Szerokość materaca [cm]	90 ±2
Grubość materaca [cm]	12 ±1
Ciężar materaca z pokrowcem [kg]	18
Numer katalogowy produktu	T30P 200x90x12 PW
Kod PKWiU	31.03.12.0
Kod CN	9404 21 90
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5906267MATPOD3J
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	szpitalny materac przeciwodleżynowy
Numer wpisu do rejestru wyrobów medycznych	PL/DR 011823
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na wkład piankowy	2 lata
Gwarancja na pokrowiec materaca	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	1) adres firmowy - zafoliowany materac rozłożony (transport producenta)   2) adres domowy: zafoliowany materac zrolowany (przesyłka niestandardowa)
Szerokość paczki [cm]	rozłożony 90 cm   zrolowany 65 cm

Długość paczki [cm]	rozłożony 200 cm   zrolowany 90 cm
Wysokość paczki [cm]	rozłożony 13 cm   zrolowany 65 cm
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	20
Producent wyrobu	[14] JANPOL Fabryka Materacy sp. z o.o. ☒ ul Cynkowa 2a, 43-180 Orzesze [Polska] ☎32 218 09 00 @ biuro@janpol.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[14] PL-MF-000051814
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 32 218 09 00 @ reklamacje@janpol.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[14] ☎ 32 218 09 00   biuro@janpol.pl

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24