

AP.3B

stolik-wózek z regulacją wysokości pod 2 aparaty medyczne



Polski producent
Polski serwis techniczny




Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

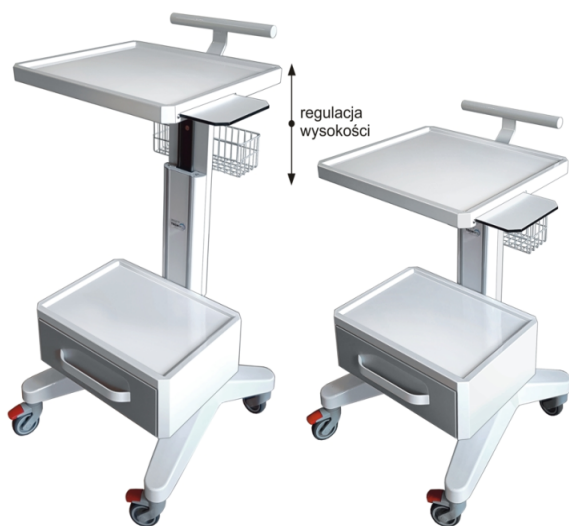

LAKIER PROSZKOWY - kolory



Mobilny stolik na kółkach pod aparaty medyczne lub aparaty do fizykoterapii oferuje dwa profilowane blaty oraz praktyczną szufladę na akcesoria i kable. Blaty, korpus szuflady i szuflada wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo. Profilowane pogłębienie blatów zabezpiecza aparaty przed zsunieniem z blatu podczas przetaczania stolika. Posiada pneumatyczną regulację wysokości górnego blatu siłownikiem gazowym. Wyposażony jest ponadto w stalowy koszyk na kable i akcesoria do aparatów i wysuwaną z górnego blatu w obie strony półkę wykonaną z płyty meblowej HPL, np. pod myszkę komputerową, a także w uchwyt pomocny przy przetaczaniu stolika. Stelaż stolika wykonany jest z zamkniętego profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo. Podstawa stalowa pokryta tworzywem ABS posiada 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm z oponkami do twardej powierzchni, nadające stolikowi mobilności w obrębie gabinetu i placówki. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

W aluminiowym stelażu stolika znajdują się 2 kanały montażowe (zewnętrzny i wewnętrzny) umożliwiające regulację pionową mocowania elementów stolika na stelażu (blaty/półki, korpus szuflady, koszyk) a w przyszłości także doposażenie stolika w szereg akcesoriów dodatkowych, montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek.

Stolik pod aparat medyczny AP.3B znajduje zastosowanie w placówkach ochrony zdrowia pod różnego rodzaju i przeznaczenia aparaturę medyczną. Polecany jest również do gabinetów fizjoterapii pod aparat do fizykoterapii. Sprawdza się także w laboratoriach oraz w przedsiębiorstwach o innym profilu jako stolik-wózek pod elektronikę użytkową i przemysłową albo pod aparaturę kontrolną i pomiarową.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://www.pl-mf-000009262)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Przeznaczenie stolika / wózka	uniwersalne - różne aparaty
Seria produkcyjna stolików pod aparaty	APAR-1 (ZTM Tech-Med)
Konstrukcja stelaża stolika / wózka	aluminium lakierowane
Liczba pólek (blatów) pod aparaty	2 blaty
Materiał pólek (blatów) pod aparaty	stal lakierowana
Szuflada/szuflady na akcesoria w standardzie	Tak
Szuflada na akcesoria opcjonalnie	Nie
Stolik z regulacją wysokości	Tak
Wysokość całkowita stolika (wózka) [cm]	75-105 (regulowana)
Szerokość całkowita stolika (wózka) [cm]	51
Głębokość całkowita stolika (wózka) [cm]	52
Uchwyt monitora ekranowego	bez uchwytu do monitora
Wysięgnik podtrzymujący kable	bez wysięgnika kabli
Wysięgnik z głowicą na kropłówki	bez wysięgnika na kropłówki
Koszyk na kable do aparatów	1 koszyk na kable
Listwa zasilająca aparaty	opcjonalnie 5 gniazdz
Stolik mobilny na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	35
Stelaż stolika - materiał	profil aluminiowy z kanałami montażowymi
Półki/blaty stolika - materiał	stal lakierowana proszkowo
Półki/blaty stolika - szerokość [cm]	45
Półki/blaty stolika - głębokość [cm]	górný 40 dolny 32
Półka/błat stolika - maksymalne obciążenie [kg]	10
Szuflada(y) - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szuflada - szerokość [cm]	37,5
Szuflada - głębokość [cm]	27
Szuflada - wysokość [cm]	10,5
Szuflada(y) - zamknięcia	opcjonalnie zamek patentowy z kluczem
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	5
Podstawa stolika	stalowa z osłoną z tworzywa z ABS
Kółka - rodzaj	skrętnie
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą
Szerokość podstawy [cm]	51
Waga stolika [kg]	20

Numer katalogowy produktu	AP1-02-B(M3)S(1)-75-ABSSA2-0000-SG(A)-K6.3-W KR2. (295)x95x85.ST.0000-100 UC9.25.L300.ST.0000-75
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-APAR/D8
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	AP1 wózek pod aparaturę medyczną serii APAR-1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	półpaleta EUR 6 (80x60 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	45
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ☎ ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producent
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] ☎ 58 360 58 50 techmed@techmed.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISCE/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24