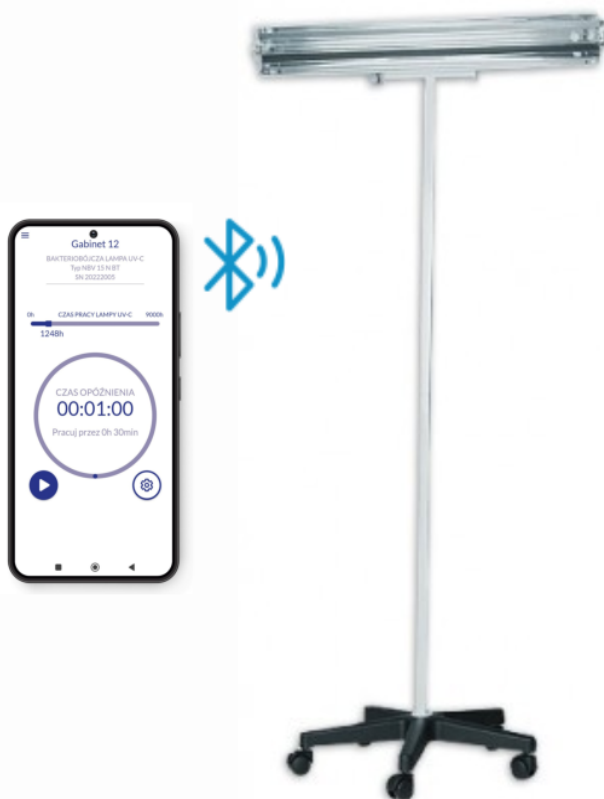


NBV-30P BT

lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania 1x30W mobilna

Polski producent
Polski serwis technicznyDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej powierzchni. Skutecznie eliminuje zalegające na powierzchniach drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśń, wirusy i bakterie. Wyposażona jest w promiennik o mocy 30W emitujący wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali 253,7 nm. Lampa wyposażona jest w specjalny odbłyśnik o wysokim współczynniku odbicia promieniowania, wykonany z wysokogatunkowego aluminium o charakterystyce zbliżonej do lustra. Kopuła lampy umożliwia regulację ręczną kąta nachylenia odbłyśnika, a tym samym kąta naświetlania pomieszczenia, co umożliwia skuteczną dezynfekcję górnych warstw ścian i sufitu. Kopuła lampy osadzona jest na statywie stalowym o stałej wysokości 180 cm z 5-ramienną podstawą z tworzywa sztucznego wyposażoną w 5 kółek bez hamulca. Opcjonalnie 2 kółka mogą być wyposażone w hamulec (blokady jazdy).

Lampa bakterio i wirusobójcza NBV-30P BT wyposażona jest w moduł komunikacji bezprzewodowej NBV BT Switch działający w systemie Bluetooth, co umożliwia zdalne sterowanie pracą lampy poprzez dedykowaną aplikację na smartfony (NBV App) z zainstalowanym systemem operacyjnym Android. Aplikacja pozwala na kontrolę nad jedną lub wybraną lampą, albo nad wszystkimi lampami z modulem NBV BT Switch znajdującymi się na terenie placówki. W aplikacji są również dostępne liczniki czasu pracy promienników, które odmierzają czas pracy poszczególnych lamp od momentu ostatniej wymiany promienników i sygnalizują konieczność ich ponownej wymiany. Lampę można też sterować ręcznie bez aplikacji.

W placówkach ochrony zdrowia lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania, dzięki wykorzystaniu dezynfekujących właściwości promieniowania UV-C, służą utrzymywaniu czystości mikrobiologicznej powierzchni znajdujących się w pomieszczeniu (ścian, sufitu, podłóg i wykładzin, blatów, mebli, sprzętu medycznego, instrumentarium, etc.) eliminując obecne na tych powierzchniach drobnoustroje, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa mikrobiologicznego pacjentów i personelu tej placówki. Polecane są szczególnie do gabinetów zabiegowych i stomatologicznych oraz innych pomieszczeń, w których wykonuje się inwazyjne procedury medyczne.

Standardowo promiennik nie jest foliowany. Za dopłatą może być zamontowany w lampie promiennik spełniający wymagania norm higienicznych systemu HACCP pokryty folią przeciwbryzgową (foliowany FTUV30W), która zabezpiecza przed skażeniami oraz rozsypaniem szkła po podłodze i na sprzętach w przypadku ewentualnego stłuczenia promiennika. Foliowanie promiennika nie wpływa na jego skuteczność i właściwości.

Lampy bakteriobójcze serii NBV są urządzeniami energooszczędnymi, wyposażonymi w promienniki o długiej żywotności (8000 godzin pracy), dlatego ich stosowanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji tych lamp.

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

ULTRA-VIOL Pietras Purgał Wójcik sp.j.
ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

12 - 15 m²2,3 W/m²

Rodzaj lampy UV-C	mobilna ze statywem
Model lampy (seria)	NBV 1-kierunkowa
Moc i liczba promienników UV-C	30W [1 x 30W]
Natężenie promieniowania UV-C	2,3 W/m² z odległości 1m
Skuteczność w pomieszczeniu	do 15 m² [45 m³]
Żywotność promienników	8 000 godzin pracy
Licznik czasu pracy promienników	aplikacja NBV App na smartfony
Sygnalizacja wymiany promienników	akustyczna
Pilot zdalnego sterowania	aplikacja NBV App na smartfony
Przewód zasilający lamę UV-C	3 m z wtyczką do gniazda typu E
Typ promienników UV-C	UV-C TUV 15W G13 lub UV-C HNS 15W G13
Długość promienników UV-C [mm]	894,60
Producent promienników UV-C	Philips lub OSRAM
Długość fali promieniowania UV-C	253,7 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki	zerowy - promienniki nie emitują fal o długości 185nm odpowiedzialnych za powstawanie ozonu
Przenikalność promieniowania UV-C przez powierzchnie	nieprzenikalne, odbicie od powierzchni
Oddziaływanie promieniowania UV-C na tworzywa sztuczne	może powodować odbarwienia i żółknięcie
Regulacja kąta naświetlania	270°
Powłoka odbłyśnika lampy	lustrzana z aluminium
Poziom hałasu lampy UV-C	bezgłośna
Zasilanie lampy UV-C	AC 230V 50Hz
Pobór mocy przez lampę	40 VA
Klasa zabezpieczenia lampy	I B
Klasa szczelności obudowy lampy	IP20
Wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej	Bluetooth NBV BT Switch
Aplikacja sterująca pracą lampy	NBV App
Aplikacja - wymagane oprogramowanie	Android w wersji co najmniej 6.0 lub nowszy
Aplikacja - wielkość	20 MB
Aplikacja - wymagania komunikacyjne	Wi-Fi lub LTE
Aplikacja - profilu portu komunikacji	port szeregowy (Serial Port Profile)
Aplikacja - pobieranie	kod QR w instrukcji obsługi dostarczonej lampy
Aplikacja - parowanie lampy z aplikacją	poprzez Bluetooth
Długość kopuły [cm]	92,5
Szerokość kopuły [cm]	8,5
Wysokość kopuły [cm]	13,5

Waga kopuły lampy [kg]	3
Wysokość statywu [cm]	180
Waga statywu [kg]	6
Długość całkowita lampy [cm]	60
Szerokość całkowita lampy [cm]	60
Wysokość całkowita lampy [cm]	194
Waga całkowita lampy [kg]	9
Numer katalogowy produktu	NBV 30 P BT
Kod PKWiU	26.60.13.0
Kod CN	9018 20 00
Certyfikacja produktu	CE
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	2
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	10
Producent wyrobu	[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j. ☎ ul. Stępowizna34; 95-100 Zgierz [Polska] ☎42 717 11 76 @ biuro@ultraviol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 42 715 02 16 @ reklamacje@ultraviol.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celný: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24