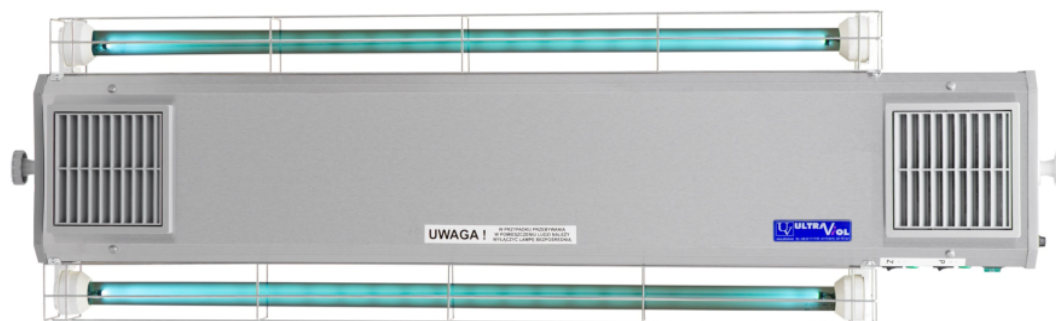


NBVE-110/110N RC

2-funkcyjna lampa bakteriobójcza przepływową ścienna z pilotem

Polski producent
Polski serwis technicznyDarmowa dostawa
na terenie PolskiDeklaracja zgodności
Oznakowanie CE

2-funkcyjna, przepływowa lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powierzchni i powietrza w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej. Skutecznie eliminuje drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśnie, wirusy i bakterie. Lampy bakteriobójcze serii NBVE są urządzeniami energooszczędnymi, wyposażonymi w promienniki o długiej żywotności (8000 godzin pracy), dlatego ich stosowanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji tych lamp. Ten model lampy przeznaczony jest do montażu na ścianie w odległości ok. 30 cm od sufitu.

Wlot powietrza do przepływowej komory dezynfekcyjnej zabezpieczony jest wymiennym filtrem przeciwpyłowym. Producent lampy zaleca wymianę filtra co ok. 2160 godzin pracy promienników bakteriobójczych, czyli średnio co kwartał przy permanentnej dezynfekcji powietrza (praca lampy 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu). Opcjonalnie przy zakupie lampy dostępne są filtry zapasowe do lamp NBVE.

2-funkcyjna, przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE-110/110N RC z dwoma zewnętrznymi promiennikami bezpośredniego działania zapewnia pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego. Daje możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi i zwierząt (komora przepływowa UV-C – funkcja I), jak również bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia i powierzchni jego wyposażenia podczas nieobecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu (promienniki bezpośredniego działania – funkcja II). Obie funkcje są od siebie niezależne. Włączanie i wyłączanie poszczególnych funkcji następuje z panelu umieszczonego na obudowie lampy lub poprzez włączniki zamontowane we własnym zakresie w obu obwodach prądowych zasilających jedną i drugą funkcję lampy, np. w ścianie gabinetu.

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

ULTRA-VIOL Pietras Purgał Wójcik sp.j.
ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



 18 - 36 m²
45 - 90 m³

 199 m³/h

 150 μW/cm²



Rodzaj lampy UV-C	2-funkcyjna ścienna
Model lampy (seria)	NBVE 2-funkcyjna
Łączna moc i liczba promienników	220W [4]
Dezynfekcja powietrza - moc	110W [2x55W]
Dezynfekcja powierzchni- moc	110W [2x55W]
Dezynfekcja powierzchni- natężenie UV-C	150 µW/cm²
Skuteczność w pomieszczeniu	do 36 m² [90 m³]
Wydajność wentylatora	199 m³/h
Żywotność promienników UV-C	8000 godzin pracy
Liczniki czasu pracy promienników	bez liczników
Sygnalizacja wymiany promienników	akustyczna
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Przewód zasilający lamę UV-C	1 m z kostką do wpięcia w instalację
Wydajność dezynfekcji powietrza	45-90 m³/h
Typ promienników UV-C	TUV 55W lub HNS 55W
Producent promienników UV-C	Philips lub OSRAM
Długość promienników UV-C [mm]	894,60 mm
Długość fali promieniowania UV-C	253,7 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki	zerowy - nie wytwarzają fal o długości 185nm odpowiedzialnych za powstawanie ozonu
Oddziaływanie promieniowania UV-C na tworzywa sztuczne	może powodować odbarwienia i żółknięcie
Przenikalność promieniowania UV-C przez powierzchnie	zerowa, następuje odbicie promieni od powierzchni
Poziom hałasu - funkcja przepływowa	max 38 dB
Poziom hałasu - funkcja bezpośredniego działania	0 dB
Zasilanie sieciowe lampy	AC 230 V 50 Hz
Pobór mocy - obie funkcje	180W
Klasa zabezpieczenia lampy	I klasa
Klasa szczelności obudowy lampy	IP20
Zdalne sterowanie pracą lampy	pilot RC NBVE 2F + odbiornik radiowy
Odbiornik RC - położenie	obudowa lampy
Odbiornik RC - pobór mocy	0,1 VA
Pilot RC - zasięg działania	do 25 metrów
Pilot RC - częstotliwość pracy	433,92 MHz
Pilot RC - zasilanie	DC bateria 12V typ A23
Pilot RC - klasa zabezpieczenia	II klasa
Pilot RC - klasa szczelności obudowy	IP20

Zdalne sterowanie - zabezpieczenia	zabezpieczenie przed włączeniem lub wyłączeniem innych lamp (niestandardowy system kodowania)
Długość kopuły [cm]	112,5
Szerokość kopuły [cm]	28,5
Wysokość kopuły [cm]	13
Długość całkowita lampy [cm]	119
Szerokość całkowita lampy [cm]	28,5
Wysokość całkowita lampy [cm]	17
Waga całkowita lampy [kg]	11,65
Numer katalogowy produktu	NBVE-110/110 N RC
Kod PKWiU	26.60.13.0
Kod CN	9018 20 00
Certyfikacja produktu	CE
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	13
Producent wyrobu	[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j. ☒ ul. Stępowizna34; 95-100 Zgierz [Polska] ☎ 42 717 11 76 @ biuro@ultraviol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 42 715 02 16 @ reklamacje@ultraviol.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24