

JSR.3E.RW1

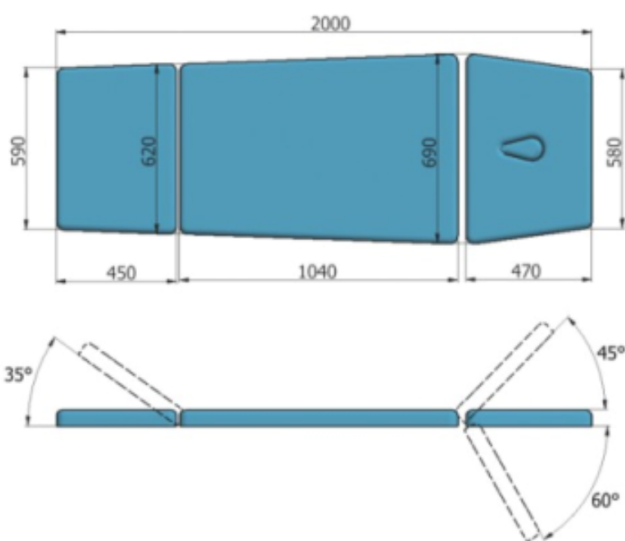
stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 3-częściowy elektryczny


Polski producent
Polski serwis techniczny

Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

Darmowa dostawa
na terenie Polski

Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Maksymalna waga
pacjenta


Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w elektryczną regulację wysokości przewodowym pilotem ręcznym lub nożnym (opcjonalnie). Wykonany na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo. Stół rehabilitacyjny posiada 3 częściowe leże z sekcją zagłówka regulowanego pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej i poniżej poziomu głównej części leża oraz sekcją podnóżka regulowanego pneumatycznie w zakresie powyżej poziomu głównej części leża. Zagłówek wyposażony jest w otwór do oddychania z zatyczką. Wypełnienie leża z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej wysokiej jakości. Leże pokryte beżową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego (opcjonalnie). Po obu stronach leża znajdują się relingi do zapinania pasów stabilizujących pacjenta.

Podstawa stołu rehabilitacyjnego JSR.3E.RW1 posiada w standardzie podgumowane stopki z możliwością stabilizacji i poziomowania stołu na nierównym podłożu. Opcjonalnie podstawa może być doposażona dodatkowo w system kół opuszczanych umożliwiających przetaczanie stołu na terenie gabinetu i placówki. Opuszczając koła dźwignią nożną następuje jednoczesne wypchnięcie stópki ku górze. Stół można wtedy przetaczać bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

Stół rehabilitacyjny JSR.3E.RW1 można dodatkowo doposażyć w pilot nożny regulacji wysokości i opuszczane ręcznie podłokietniki w sekcji zagłówka pozwalające na wygodne oparcie przedramion pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu oraz w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części stołu i opisany wyżej system kół opuszczanych.

Stół stacjonarny JSR.3E.RW1 cechuje stabilność oraz prostota użytkowania. Znajdzie zastosowanie do prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem leczniczego masażu klasycznego. Może być stosowany również w kinezyterapii do ćwiczeń z pacjentem w kabinach UGUL lub z użyciem innych systemów do ćwiczeń w podwieszeniu.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](#)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja masaż klasyczny
Regulacja wysokości leża	elektryczna ręczna/nożna (pilot)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	50-100 cm
Liczba sekcji leża	3 sekcje (3-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomiu leża
Sekcja lędźwiowo-pośladkowa	bez regulacji
Sekcja podnóżka	regulowana (podnoszona)
Wymiary obrysowe leża (dł. x szer.)	200 x 69 cm
Pozycja Pivota	Nie
Funkcja fotela	Nie
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Funkcja CPR	Nie
Podłokietniki przy zagłówku	opuszczane - wyposażenie opcjonalne
System jezdny	4 koła - wyposażenie opcjonalne
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Usługa wniesienia stołu do lokalu	dostępna
Model/seria produkcyjna stołu	JSR (Juventas)
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	150
Rodzaj ramy dolnej stołu	prostokątna
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Pilot ręczny bezprzewodowy	opcjonalnie
Pilot nożny przewodowy	opcjonalnie
Długość sekcji zagłówka [cm]	47
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji zagłówka	-60° do +45°
Otwór w zagłówku	w standardzie wraz zatyczką
Podłokietniki przy zagłówku	opcjonalnie 2 podłokietniki opuszczane
Podłokietniki - sposób regulacji	ręczny
Podłokietniki - zakres regulacji	0 - 20 cm od poziomu zagłówka
Długość sekcji lędźwiowo-pośladkowej [cm]	104
Sposób regulacji sekcji lędźwiowo-pośladkowej	bez regulacji
Długość sekcji podnóżka [cm]	45
Sposób regulacji sekcji podnóżka	pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji sekcji podnóżka	0° do +35°
Reeling do pasów stabilizacyjnych	obustronne
Gniazda pod banany do trakcji	opcjonalnie

Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
System jezdny - typ	opcjonalnie 4 opuszczane koła kierunkowe z blokadą jazdy
Zasilanie elektryczne	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	60
Numer katalogowy produktu	JSR 3 E RW1 / JSR 3 E RW1 Plus
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370stolyelektrUS
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 13
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	JSR 3 E RW1 stacjonarny stół rehabilitacyjny sterowany elektrycznie
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	2 lata
Gwarancja na elementy pneumatyczne	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na paletcie	220x80x80 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	80
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ☎ Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce[Polaska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.
Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celný: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24