

PRO.2

stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 2-częściowy elektryczny



Polski producent
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU




Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta

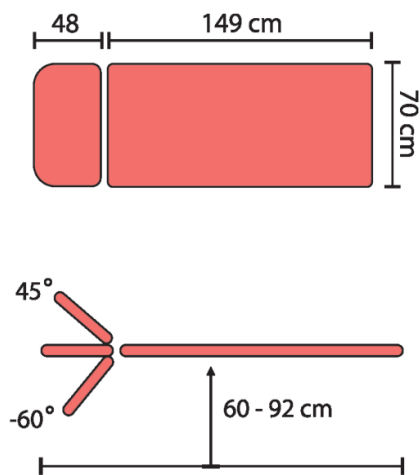

TAPICERKA - paleta Medi



Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w elektryczną regulację wysokości ramą sterującą umieszczoną w podstawie stołu. Nożna regulacja wysokości leża odbywa się płynnie i szybko dzięki zastosowaniu w systemie podnoszenia i opuszczania stołu wydajnego silownika elektrycznego. Regulacja nożna pozwala rehabilitantowi na przeregulowanie wysokości stołu bez odrywania rąk od pacjenta z każdego miejsca przy leżysku stołu.

Stół rehabilitacyjny PRO.2 wyposażony jest 2-częściowe leże o szerokości 70 cm i długości 203 cm z sekcją zagłówka regulowaną pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża. Wypełnienie leża z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezszwowo tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru z palety Medi lub palety V-Line. Zagłówek jest wyposażony w otwór do oddychania z wyjmowaną zatyczką. Przy sekcji łędźwiowo-nożnej znajdują się obustronne relingi do pasów stabilizujących pacjenta podczas terapii lub ćwiczeń kinezyterapeutycznych.

Stół PRO.2 wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania. Podstawa stołu wyposażona jest standardowo w cztery podgumowane stopki z regulacją umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu gabinetu, a opcjonalnie również w system kół opuszczanych umożliwiający przetaczanie stołu na terenie gabinetu i placówki. Opuszczając koła dźwigni nożną następuje jednoczesne wypchnięcie stopek ku górze. Stół można wtedy przetaczać bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży. Stół rehabilitacyjny PRO.2 można jeszcze dodatkowo doposażyć w opuszczone ręcznie podtętniki przy sekcji zagłówka pozwalające na wygodne oparcie przedramion pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu oraz w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części stołu.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000023594](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000023594)

PRODUCENT

KINESIS

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

| | |
|---|--|
| Przeznaczenie stołu stacjonarnego | rehabilitacja masaż klasyczny |
| Regulacja wysokości leża | elektryczna nożna (rama) |
| Zakres regulacji wysokości leża od podłoża | 60-92 cm |
| Liczba sekcji leża | 2 sekcje (2-częściowe) |
| Sekcja zagłówka | regulowana +/- poziomu leża |
| Sekcja lędźwiowo-nożna | bez regulacji |
| Wymiary obrysowe leża (dł. x szer.) | 203 x 70 cm |
| Pozycja Pivota | Nie |
| Funkcja fotela | Nie |
| Pozycja Trendelenburga | Nie |
| Pozycja antyTrendelenburga | Nie |
| Funkcja CPR | Nie |
| Podłokietniki przy zagłówku | opuszczane - wyposażenie opcjonalne |
| System jezdny | 4 koła - wyposażenie opcjonalne |
| Dopuszczalne obciążenie | 150 kg |
| Usługa wniesienia stołu do lokalu | dostępna |
| Model/seria produkcyjna stołu | PRO (BH Kinesis) |
| Statyczna wytrzymałość leża [kg] | 150 |
| Rodzaj ramy dolnej stołu | prostokątna |
| Materiał ramy dolnej stołu | lakierowane profile stalowe |
| System podnoszenia leża | silownik elektryczny |
| Regulacja wysokości ramą wokół podstawy stołu | w standardzie |
| Długość sekcji zagłówka [cm] | 48 |
| Sposób regulacji zagłówka | pneumatyczny (sprężyna gazowa) |
| Zakres regulacji zagłówka | -60° do +45° |
| Otwór w zagłówku | w standardzie z zatyczką |
| Podłokietniki przy zagłówku | opcjonalnie 2 podłokietniki opuszczane |
| Podłokietniki - sposób regulacji | ręczny |
| Podłokietniki - zakres regulacji | 0 do -20 cm od poziomu zagłówka |
| Długość sekcji lędźwiowo-nożnej [cm] | 149 |
| Otwór w sekcji lędźwiowo-nożnej | opcjonalnie |
| Relingi do pasów stabilizacyjnych | obustronne |
| Wieszak na podkłady higieniczne | opcjonalnie |
| System jezdny - typ | opcjonalnie 4 opuszczone koła kierunkowe z blokadą jazdy |
| Zasilanie elektryczne | AC 230 V 50 Hz |

| | |
|---|--|
| Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg] | 82 |
| Numer katalogowy produktu | PRO 2 |
| Kod PKWiU | 32.50.21.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 5904063815proKM |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 13 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | PRO 2 stół rehabilitacyjny |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 2 lata |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 2 lata |
| Gwarancja na elementy elektryczne | 1 rok |
| Gwarancja na elementy pneumatyczne | 1 rok |
| Gwarancja na tapicerkę standardową | 1 rok |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka paletowa |
| Rodzaj palety | paleta przemysłowa bezzwrotna |
| Gabaryt produktu na palecie | 220x80x80 cm |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg] | 110 |
| Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy | odpłatna |
| Producent wyrobu | [16] KINESIS Biuro Handlowe Andrzej Boruta ^{sp. z o.o.} ul. Penara 23; 38-440 Iwonicz-Zdrój[Polaska] ☎ 13 435 06 45 @ biurokinesis@kinesis.com.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [16] PL-MF-000018445 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 13 435 06 45 @ biurokinesis@kinesis.com.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [16a] ☎ 695 768 360 biurokinesis@kinesis.com.pl |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24