

## PJ3MR.210

niemagnetyczny parawan lekarski 3-skrzydłowy zmywalny na kółkach



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Niemagnetyczny, wolnostojący i mobilny parawan lekarski 3-skrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości całkowitej 213 cm, wykonany w ramie z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor RAL 7035 (popielaty jasny) o podwyższonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Parawan wyposażony jest w zasłony zmywalne wykonane z tkaniny poliestrowej Panama PU z powłoką wodoodporną, dostępne w 6 kolorach do wyboru, mocowane do ramy parawanu za pomocą rzepów. Podstawa parawanu posiada 6 podwójnych kół kierunkowych (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w miękkie oponki nie rysujące twardych podłoży. Wszystkie koła wyposażone są w hamulec postojowy (blokadę jazdy) i nie zawierają elementów metalowych.

Warunkowa kompatybilność z rezonansem magnetycznym o mocy do 3,0 Tesli włącznie. Parawan niemagnetyczny testowany w zakresie dopuszczalności do stosowania w pracowniach MR przy użyciu skanera GE Healthcare SIGNA Pioneer 3.0T. Podczas testów produkt był umieszczany bezpośrednio przy obudowie rezonansu, jak i w jego otworze.

Niemagnetyczne parawany lekarskie znajdują zastosowanie w pracowniach obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MR, MRI, RM, RNM, NMR] zapewniając pacjentom standard intymności, między innymi w szpitalach i klinikach weterynaryjnych oraz w placówkach medycznej diagnostyki obrazowej.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-00009262](#)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11


### ZASŁONA PARAWANU - kolory



Tkanina poliestrowa PANAMA PU



Zbadane na substancje szkodliwe według Oeko-Tex® Standard 100

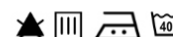

# DANE TECHNICZNE

Rodzaj parawanu	3-skrzydłowy
Materiał ramy parawanu	aluminium lakierowane
Materiał ekranu (zasłony) w parawanie	tkanina zmywalna poliestrowa
Wysokość całkowita parawanu	170 cm
Szerokość całkowita parawanu	210 cm
Szerokość skrzydła parawanu	70 cm
Łączenie skrzydeł parawanu	zawiasy
Rodzaj podstawy parawany	mobilna z kółkami
Parawan niemagnetyczny MR	Tak
Konstrukcja parawanu	profile aluminiowe
Wykończenie konstrukcji	lakier proszkowy
Tkanina zasłony parawanu	Panama PU zmywalna
Kółka - rodzaj	kierunkowe skrętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - materiał	tworzywo sztuczne
Kółka - blokada jazdy	wszystkie koła z blokadą jazdy
Głębokość podstawy [cm]	45
Ciężar parawanu [kg]	24
Numer katalogowy produktu	PJ1-03-AL-ZP_-70-K6.6-MR
Kod PKWU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904126-PJ-MR/B2
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Parawan jezdny MR Typ PJ1-03MR
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna

Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	45
Producent wyrobu	[37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[37] PL-MF-000009262
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[37] ☎ 58 360 58 50   techmed@techmed.com.pl

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF. Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów. Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty. © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24