

MD/2s.9010


szafa lekarska 2-skrzydłowa 1-komorowa biała



Polski producent
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa
na terenie Polski

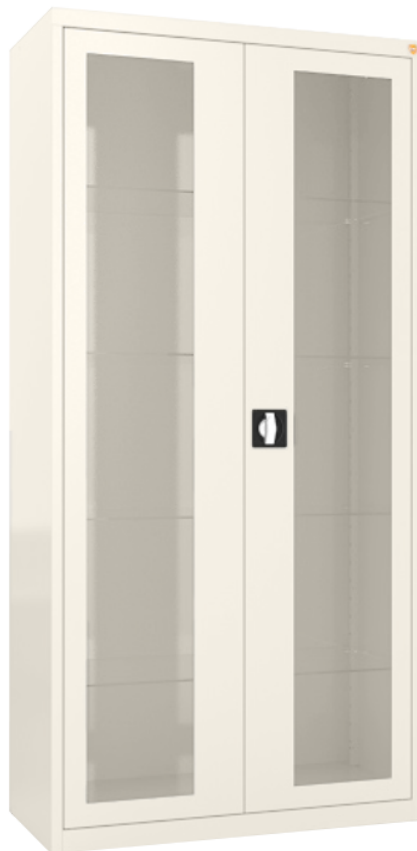

ral 7035
jasny popielaty

ral 9010
biały

ral 1015
jasny beż

ral 5010
ciemny niebieski

ral 6033
mętowy zielony

ral 9005
czarny

ral 7032
szary

ral 8017
ciemny brąz

ral 2011
pomarańczowy

ral 3020
czerwony

Kolorystyka szaf
lakier proszkowy



Wolnostojąca szafa lekarska 2-skrzydłowa wykonana z czarnej blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9010 (biały alpejski). 1-komorowy korpus szafy posiada od frontu 2 stalowe skrzydła drzwi w typie witryny z przeszkleniami wykonanymi z bezpiecznego szkła hartowanego. Oba skrzydła drzwi osadzone są na zawiasach kołkowych, a każde z nich posiada 3-punktowe ryglowanie. Ryglowanie zwalniane jest typowym dla wysokich frontów mebli jednym zamkiem baswilowym (bębenkowy, patentowy) z obracającym uchwytem klamkowym.

Standardowym wyposażeniem szafy lekarskiej są 4 półki, których położenie można regulować w pionie przenosząc półkę na kolejne wsporniki umieszczone w narożnikach szafy. Półki wykonane są z bezpiecznego szkła hartowanego. Nośność każdej półki wynosi 25 kg. W opcjach wyposażenia dodatkowego szafę można doposażyć w jedną lub dwie dodatkowe półki.

Standardowo podstawa szafy lekarskiej wyposażona jest w podgumowane stopki z regulacją do poziomowania szafy. W opcjach wyposażenia dodatkowego dostępne są podwyższające szafę o 10 cm nóżki stalowe z podgumowaniem albo z podgumowanymi stopkami regulacyjnymi do poziomowania szafy.

Szafa lekarska MD/2s.9010 spełnia wymagania zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do leków i środków medycznych na poziomie podstawowym i jest dedykowana do powszechnego stosowania w gabinetach lekarskich i zabiegowych placówek ochrony zdrowia, a także w szkolnych gabinetach pielęgniarskich oraz w stacjonarnych punktach pierwszej pomocy przedlekarskiej znajdujących się na terenie biur, zakładów pracy i innych obiektów niemedycejskich.

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

KART-MAP Spółka Jawna
Nikiełkowo, ul. Parkowa 3; 10-376 Olsztyn
89 535 71 50 | biuro@janpol.pl



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl <https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Rodzaj szafy	wolnostojąca na stopkach
Typ szafy lekarskiej	2-skrzydłowa 2-drzwiowa
Podział szafy	1-komorowa
Kolor korpusu szafy	RAL 9010 biały alpejski
kolor drzewi szafy	dostępne różne kolory
Materiał szafy	blacha stalowa
Przeszklenie witrynowe szafy	tylko drzwi
Wysokość całkowita korpusu szafy	180 cm
Szerokość całkowita szafy	90 cm
Głębokość całkowita szafy	42 cm
Podstawa szafy	4 stopki
Usługa wniesienia szafy do lokalu	dostępna
Konstrukcja	metalowa
Konstrukcja - materiał	czarna blacha stalowa
Grubość blachy [mm]	0,8
Powłoka malarska szafy	lakier proszkowy (epoksydowo-poliestrowy)
Zawiasy szafy	kolkowe
Rodzaj zamka drzwi	baskwilowy z obrotowym uchwytem klamkowym
Ryglowanie drzwi	3-punktowe w każdym skrzydle
Przeszklenie drzwi - materiał	bezpieczne szkło hartowane
Liczba półek na wyposażeniu	4 półki
Materiał półek	bezpieczne szkło hartowane
Rozstaw półek w pionie	regulowany
Maksymalne obciążenie 1 półki [kg]	25
Wysokie stopki w podstawie	opcjonalnie wys. 10 cm
Szerokość szafy [cm]	90
Głębokość szafy [cm]	42
Wysokość szafy bez wyposażenia dodatkowego [cm]	180
Wysokość szafy z nóżkami [cm]	N: 190 cm NS: 192 - 193,4 cm
Ciężar szafy [kg]	75
Numer katalogowy produktu	MD/2s RAL 9010
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Dokument certyfikacji produktu	atest bezpieczeństwa (nie wymaga zmkau CE)
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	2 lata

Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	90
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[15] KART-MAP Krzysztof Lachacz sp. z o.o. Nikielkowo, ul. Parkowa 3; 10-376 Olsztyn [Polska] ☎ 89 535 71 50 @ biuro@janpol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 89 535 71 50 @ handlowy@kart-map.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowi reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24