

TC-21

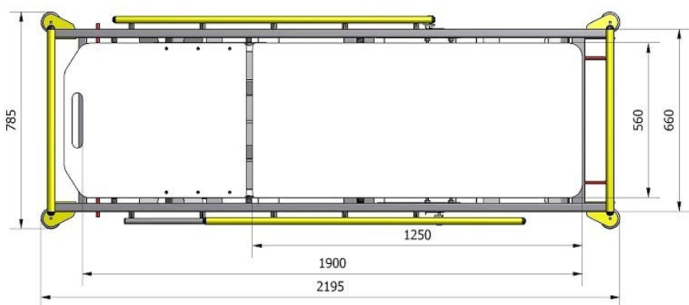
wózek szpitalny hydrauliczny do transportu pacjenta


 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta


Wózek szpitalny do transportu pacjenta w pozycji leżącej i półleżącej w obrębie placówki ochrony zdrowia, a także w pozycji Trendelenburga. Wykonany na ramie stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Oferuje hydrauliczną regulację wysokości leża regulowaną obustronnymi przyciskami nożnymi. Wyposażony jest w 2-częściowe leże wykonane z płyty HPL przezierniej dla promieni RTG. Posiada długą sekcję zagłówka z pneumatyczną regulacją kąta nachylenia przy pomocy sprężyny gazowej. Przechył leża do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga uzyskuje się sprężynami gazowymi z możliwością blokady pozycji. Pacjenta podczas transportu zabezpieczają składane barierki boczne. W opcjach wyposażenia dodatkowego wózek TC-01 może być doposażony w wysięgnik kropłówki, uchwyt na podkłady higieniczne w rolkach, kosz na butlę z tlenem oraz w prowadnicę na kasety RTG i w wielofunkcyjną półkę koszową, np. na rzeczy pacjenta, a także w pasy do unieruchomienia pacjenta na wózku.

Wózek transportowy TC-21 dostępny jest wraz z wymiennym materacem jednoczęściowym wypełnionym elastyczną pianką pokrytą tapicerką z atestowanego materiału typu MEDITAP o podwyższonej odporności na ścieranie i poddającego się dezynfekcji powszechnie stosowanymi w placówkach medycznych środkami do dezynfekcji powierzchni. W opcji dodatkowej dostępny jest materac z wszytymi uchwytami do przenoszenia pacjenta na materacu.

Prowadzenie i manewrowanie wózkiem ułatwiają szerokie uchwyty na szczytach wózka oraz w standardzie system dużych kół kierunkowych o średnicy 125 mm z możliwością blokady jazdy każdego koła z osobną (hamulec postojowy). W opcjach wyposażenia dodatkowego wózek może być wyposażony w centralną blokadę kół uruchamianą jednym przyciśnięciem dźwigni nożnej. Wózek posiada też krążki rolkowe (odboje) zamontowane w narożnikach wózka chroniące ściany placówki.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://www.eudamed.eu/PL-MF-000045163)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE PRODUKTU

Przeznaczenie wózka	transport pacjenta
Rodzaj wózka	transportowy
Pozycja transportowa pacjenta	leżąca
Leże wózka	2-częściowe
Regulacja zagłówka	pneumatyczna - sprężyna gazowa
Leże przeziernie dla RTG	Tak
Pozycja Trendelenburga	Tak
Pozycja antyTrendelenburga	Tak
Regulacja wysokości leża	hydrauliczna
Materac wózka	wyjmowany
Barierki wózka	składane stalowe
Dopuszczalne obciążenie	200 kg
Koła wózka - średnica	125 mm
Koła wózka - blokada skrętu	Nie
Koła wózka - blokada jazdy	Tak
Usługa wniesienia wózka do lokalu	dostępna
Konstrukcja ramy wózka	stalowa lakierowana proszkowo
Zakres regulacji wysokości leża [cm]	47-86
Długość leża [cm]	195
Szerokość leża [cm]	65
Długość zagłówka [cm]	64
Zakres regulacji zagłówka	0 - 80°
Długość cz. leżdwio-kojowej leża [cm]	125
Materac - długość [cm]	195
Materac - szerokość [cm]	65
Materac - grubość [cm]	4
Materac - chwyt do przenoszenia pacjenta	6 uchwytów - opcja wyposażenia dodatkowego
Prowadnica na kasetę RTG	opcja wyposażenia dodatkowego
Pozycja Trendelenburga - sposób regulacji	pneumatyczny - sprężyna gazowa
Pozycja Trendelenburga - zakres regulacji	-12° do 0°
Pozycja antyTrendelenburga - sposób regulacji	pneumatyczny - sprężyna gazowa
Pozycja antyTrendelenburga - zakres regulacji	0-12°
Wysięgnik kroplówki	regulowany 2 haczyki - opcja wyposażenia dodatkowego
Kosz na butle z tlenem	opcja wyposażenia dodatkowego
Pasy do unieruchomienia pacjenta	opcja wyposażenia dodatkowego
Półka na rzeczy pacjenta	opcja wyposażenia dodatkowego
Krażki odbojowe	4 krażki
Koła wózka	kierunkowe 125mm

Blokada kół - jazda	4 koła z blokadą jazdy
Centralna blokada kół	opcja wyposażenia dodatkowego
Długość całkowita wózka [cm]	218
Szerokość całkowita wózka [cm]	78
Ciężar wózka bez wyposażenia dodatkowego [kg]	85
Numer katalogowy produktu	TC-21
Kod PKWU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491WozkiTCW9
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	TC-21 wózek do transportu chorych
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy hydrauliczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na paletę	220x80x80 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	120
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24