

GAIA.II

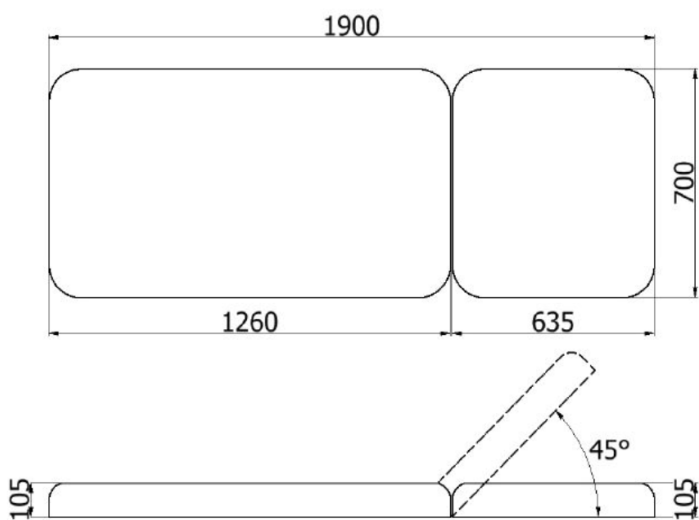
leżanka medyczna 2-częściowa drewniana


 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta


Leżanka medyczna ze skokową regulacją wysokości za pomocą łatwych w obsłudze drewnianych gałek, wykonana na stabilnej konstrukcji z wyselekcjonowanego drewna bukowego w trzech kolorach wybarwienia drewna do wyboru. Na stelażu drewnianym oparte jest dwuczęściowe leże z komfortowym wypełnieniem pianką PU o grubości 10 cm. Sekcja zagłówka regulowana jest mechanizmem grzebieniowo-zapadkowym i umożliwia przyjęcie przez pacjenta pozycji półsiedzącej. Leże pokryte jest beższwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego. Leżanka wyposażona jest w funkcjonalną półkę na akcesoria do fizykoterapii lub masażu albo zabiegów kosmetycznych.

W opcjach wyposażenia dodatkowego leżanka może być wykonana z otworem do oddychania wraz z zatyczką w sekcji zagłówka oraz doposażona w uchwyt na podkłady higieniczne w rolkach o szerokości 60 cm i w podgłówek prosty lub regulowany montowany do krawędzi leża w przygotowanych do tego celu gniazdach.

Drewniane leżanki medyczne stosowane są szeroko w gabinetach lekarskich do ogólnego badania pacjentów i przeprowadzania badań z użyciem elektrokardiografu, ultrasonografu lub innej aparatury medycznej oraz w innych placówkach ochrony zdrowia, np. w gabinetach rehabilitacji do prowadzenia zabiegów z użyciem aparatów do fizykoterapii i lamp naświetlających. Sprawdzają się również w salonach kosmetycznych i salonach tatuażu.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000035501](https://eudamed.europa.eu/en/med-devices/PL-MF-000035501)
PRODUCENT

Autoryzowany dystrybutor producenta
EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Leże leżanki medycznej	2-częściowe
Regulowany zagłówek	Tak
Odlączany podglówek	Nie
Podłokietniki w standardzie lub opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy leżanki medycznej	drewno bukowe
Ciemny kolor ramy - opcjonalnie	Tak
Długość całkowita leżanki	190 cm
Szerokość całkowita leżanki	70 cm
Skokowa regulacja wysokości leża leżanki	Tak
Wysokość całkowita leżanki	55-83 cm
Dopuszczalne obciążenie leżanki	200 kg
Uchwyt na podkłady (standard / opcjonalnie)	Tak
Koła w standardzie lub opcjonalnie	Nie
Materiał ramy dolnej - szczegóły	wyselekcjonowane drewno bukowe
Wytrzymałość statyczna [kg]	200
Sposób regulacji wysokości leża	skokowo za pomocą łatwych w obsłudze gałek
Zakresy skokowej regulacji wysokości	55-83
Sekcja zagłówka	tapicerowana regulowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	mechanizm grzebleniowo-zapadkowy
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	0-45°
Otwór w zagłówku	opcjonalnie otwór z zatyczką
Podglówek	opcjonalnie
Półka pod leżem	w standardzie
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości do 60 cm
Długość całkowita leżanki z podglówkiem [cm]	190 (220)
Długość sekcji zagłówka [cm]	63,5
Długość sekcji łędźwiowo-nożnej [cm]	126
Waga leżanki [kg]	32
Numer katalogowy produktu	GAIA II
Kod PKWiU	32.50.30.0

Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektywy MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	590401370lezdrew43
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	GAIA II leżanka drewniana
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	35
Producent wyrobu	[38] Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. ✉ Srogów Górny 172, 38-507 Jurówce[Polaska] ☎13 463 80 35 @ biuro@juventas.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[38] PL-MF-000035501
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 463 80 35 @ reklamacje@juventas.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[38] ☎ 881 090 520 michal@juventas.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24