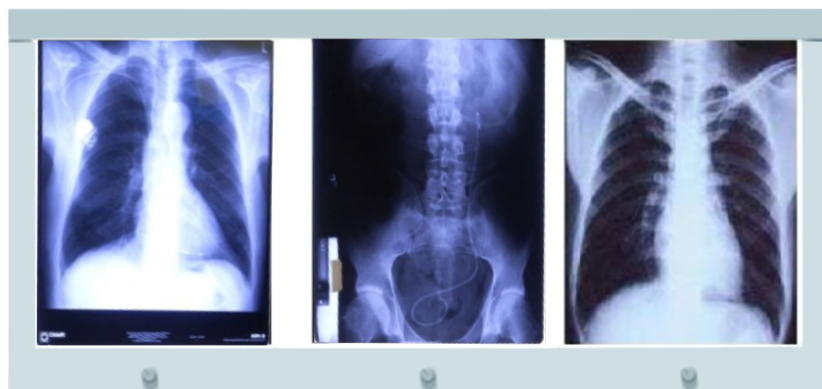


## NGP-31 Ultra Slim LED

negatoskop ścienny z ekranem 108x43cm

Automatyczne włączanie/wyłączanie  
przy zmianie kliszy – brak oślnienia.

Negatoskop Ultra-Viol LED NGP-31 z serii ultra płaskich negatoskopów Ultra Slim posiada 3-klatkowy ekran LED o szerokości 108 cm i wysokości 43 cm do przeglądania i analizy klisz rentgenowskich. Źródłem luminacji w tym negatoskopie są energooszczędne diody LED o wysokiej żywotności, zapewniające równomierne podświetlenie na całości ekranu bez efektu migotania stroboskopowego. Akrylowy panel czołowy odpowiada za równomierne rozproszenie światła. Negatoskop wyposażony jest w system płynnej regulacji luminacji (natężenia światła) umieszczonymi pod ekranem pokrętłami z wyłącznikiem poszczególnych klatek. W uchwycie klisz dla każdej klatki zastosowano automatyczny włącznik i wyłącznik podświetlenia eliminujący zjawisko oślnienia przy włączaniu negatoskopu oraz przy zmianie kliszy. Negatoskop montowany jest do ściany lub innej pionowej i stabilnej powierzchni.

Producent: Ultra-Viol



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 15 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	LED NGP 31
Rodzaj negatoskopu	uniwersalny
Źródło luminacji	diody LED
Regulacja luminacji	płynna
Liczba klatek/pól opisowych	3-klatkowy
Ekran wymiary [szer. x wys.]	108x43 cm
Negatoskopy wg montażu	zawieszany na ścianie
Natężenie światła	6.000 cd/m <sup>2</sup> - 19.000 lux
Równomierność oświetlenia	> 95%
Zakres regulacji luminacji	płynna regulacja w zakresie 10-100% [600-6000 cd/m <sup>2</sup> ]
Źródło światła	technologia LED
Żywotność źródła światła	< 50.000 godzin
Automatyczny wyłącznik światła	Tak - w uchwycie kliszy
Pobór mocy	180 W
Zasilanie sieciowe	AC   230 V   50 Hz
Klasa ochronności	klasa I
Szerokość całkowita [cm]	116
Wysokość całkowita [cm]	52
Grubość całkowita [cm]	3,5
Waga negatoskopu [kg]	12

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>