


## SS-E01.70

stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 2-  
częściowy elektryczny

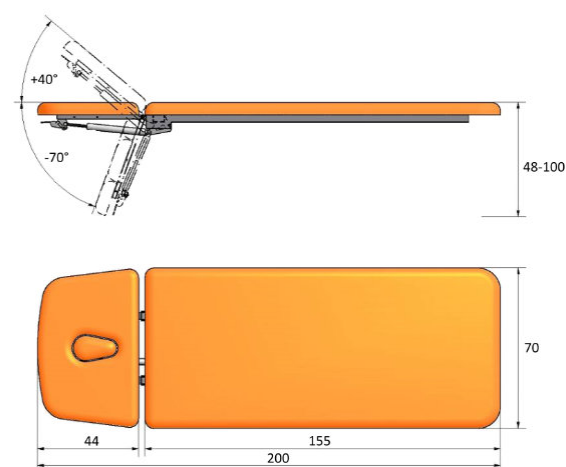

Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w elektryczną regulację wysokości standardowo przewodowym pilotem ręcznym, a opcjonalnie również przewodowym pilotem nożnym lub ramą sterującą umieszczoną w podstawie stołu. Regulacja wysokości leża odbywa się płynnie i szybko dzięki zastosowaniu łożysk w systemie podnoszenia i opuszczania stołu.

Stół rehabilitacyjny SS-E01.70 oferuje 2-częściowe leże o szerokości 70 cm i długości 200 cm z sekcją zagłówka regulowaną pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża. Wypełnienie leża z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej wysokiej jakości. Leże pokryte jest beższwowo tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru z palety Standard lub palety Prestige. Zagłówek może być wyposażony w otwór do oddychania z wyjmowaną zatyczką. Przy sekcji lędźwiowo-kończynnej znajdują się obustronne relingi do pasów stabilizujących pacjenta podczas terapii lub ćwiczeń kinezyterapeutycznych.

Stół SS-E01.70 wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania. Podstawa stołu wyposażona jest standardowo w cztery podgumowane stopki z regulacją umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu gabinetu. Opcjonalnie podstawa może być doposażona dodatkowo w system kół opuszczanych umożliwiając przetaczanie stołu na terenie gabinetu i placówki. Opuszczając koła dźwignią nożną następuje jednoczesne wypchnięcie stopek ku górze. Stół można wtedy przetaczać bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

Stół rehabilitacyjny SS-E01.70 można dodatkowo doposażyć w pilot nożny regulacji wysokości, ramę sterującą wysokością, opuszczane ręcznie podłokietniki w sekcji zagłówka pozwalające na wygodne oparcie przedramion pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu, opuszczane boki w części piersiowej leża pozwalające na swobodne zwisanie kończyn górnych pacjenta oraz w system opuszczanych kół jezdnych z hamulcem i uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części stołu.

Producent: **WS TECH S.C.**

**W S T E C H**

Dystrybucja: **EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne**



**32 720 94 11**

## **Zestawy zabiegowe dedykowane do stołu stacjonarnego SS-M01.80**

Stacjonarny stół rehabilitacyjny SS-E01.70 z zestawem zabiegowym zwiększa zakres możliwości wykorzystania stołu w placówce ochrony zdrowia przekształcając go w stół rehabilitacyjno-zabiegowy. Takie rozszerzenie funkcjonalności stołu jest alternatywą dla standardowych kozetek lekarskich i leżanek medycznych. Na stole rehabilitacyjno-zabiegowym z zamontowanym zestawem zabiegowym można wykonywać szereg mało inwazyjnych i krótkotrwałych procedur zabiegowych w warunkach ambulatoryjnych bez stosowania znieczulenia ogólnego lub konieczności wspomaganie oddychania, np. iniekcje, punkcje, wlewy, pobrania materiału do badań laboratoryjnych, unieruchamianie i gipsowanie kończyn, zakładanie i zmiana opatrunków, etc. Dedykowanymi do stołu SS-E01.70 zestawami zabiegowymi są zestawy M14 oraz M14K.

### **Zestaw zabiegowy M14p obejmuje:**

Komplet szyn Euro (2 odcinki o długości 40 cm) zamontowanych po obu stronach ramy sekcji lędźwiowo-nożnej leża, tuż za sekcją zagłówka na wysokości klatki piersiowej pacjenta, służących szybkiemu montażowi i demontażowi osprzętu zabiegowego.

Obustronne, tapicerowane podpory rąk pacjenta montowane na szynach Euro dociskami śrubowymi, wyposażone w regulację kąta odwiedzenia od leża do 90° w płaszczyźnie poziomej, a także w regulację położenia na całym odcinku szyny. Wszystkie regulacje są niezależne dla prawej i lewej podpory.

### **Zestaw zabiegowy M14pn obejmuje:**

Dwa komplety szyn Euro (4 odcinki o długości 40 cm) zamontowane po obu stronach ramy sekcji lędźwiowo-nożnej leża, pierwszy komplet tuż za sekcją zagłówka na wysokości klatki piersiowej pacjenta i drugi komplet w tylnej części leża na wysokości podudzi pacjenta, służących szybkiemu montażowi i demontażowi osprzętu zabiegowego.

Obustronne, tapicerowane podpory rąk pacjenta montowane na szynach Euro dociskami śrubowymi, wyposażone w regulację kąta odwiedzenia od leża do 90° w płaszczyźnie poziomej, a także w regulację położenia na całym odcinku szyny. Wszystkie regulacje są niezależne dla prawej i lewej podpory.

Zestawy zabiegowe M14Kp i M14Kpn, poza odpowiednio wymienionymi wyżej szynami i podporami rąk, obejmują dodatkowo regulowany wysięgnik teleskopowy na kroplówki z 2 zaczepami do zawieszania woreczków.

### **Wyposażenie standardowe**

- przewodowy pilot ręczny do sterowania wysokością leża
- leże bez wyposażenia dodatkowego
- tapicerka z palety Standard - 1 rok gwarancji
- zagłówek bez otworu
- rama lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL producenta - lakier standardowy
- podstawa na stopkach bez systemu jezdnego

### **Opcje dodatkowe z dopłatą**

- przewodowy pilot nożny lub rama sterująca do sterowania wysokością leża
- 2 podłokietniki w sekcji zagłówka opuszczane ręcznie lub pneumatycznie sprężyną gazową
- zagłówek wyposażony w otwór na twarz wraz z zatyczką
- opuszczane boki w części piersiowej na wysokości ramion lub wybrany zestaw zabiegowy (opisy zestawów powyżej)
- komplet 2 pasów o długości 220 cm do stabilizacji pacjenta
- system kół opuszczanych z dźwignią nożną i blokadą jazdy (hamulcem postojowym)
- wieszak na podkłady higieniczne w rolce
- tapicerka z palety Prestige z jonami srebra - 3 lata gwarancji
- rama lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL producenta - lakier antybakteryjny z jonami srebra

## Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - kolory palety Standard z roczną gwarancją

Dedykowany do wyposażenia medycznego materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Sanwia M-754 jako skóropodobny materiał powlekany PCV o podwyższonej odporności na oleje do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, moczu) oraz promieniowanie UV i zadrapania. Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem uniepalnionym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



**Parametry:** grubość 0.85 ±0,15 mm | masa powierzchniowa: ≥540 g/m<sup>2</sup> | wytrzymałość na rozdieranie wzdłużne ≥35 /≥20 daN/5cm | wytrzymałość na rozdieranie wszerz ≥2,5/≥2,5 daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥40.000 cykli wg metody Martindale`a.

**Surowce:** powłoka olejoodporna - PCV modyfikowane 100% | nośnik - PES 100%.  
**Dezynfekcja:** można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.



## Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - kolory palety Prestige z 3-letnią gwarancją

Vinyłowy materiał obiciowy produkowany przez Spradling International pod nazwą handlową kolekcji Silvertex i Diamante. Posiada wykończenie PermaBlok3 chroniące przed plamami oraz powłokę antybakteryjną, antywirusową i przeciwwgrzybiczą, która dzięki zawartym jonom srebra chroni w dużym stopniu przed bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz przed powstawaniem na powierzchni zarodników grzybów, mączniaków i pleśni i drożdży. Jest materiałem odpornym na promieniowanie UV oraz na pęknięcie, rozerwanie i utratę elastyczności, a przy tym trudnopalnym wg normy PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosowy, test zapalaki). Nie zawiera ftalanów i metali ciężkich oraz formaldehydu.

**Aktywność wirusobójcza** powłoki potwierdzona spełnieniem norm ISO 18184 (redukcja obecności koronawirusa o ponad 90% w ciągu jednej godziny od kontaktu) oraz ISO 21702 (redukcja aktywności koronawirusa o 99,9% w ciągu 24 godzin od ekspozycji na powierzchni). Testy przeprowadzono na materiale wystawionym na działanie koronawirusa Feline (ta sama rodzina koronawirusów, struktury i mechanizmy podobne do SARS-Cov2).

**Właściwości bakteriostatyczne** potwierdzone spełnieniem normy ISO 22196 (wartość aktywności przeciwbakteryjnej R> 2) - zapewnia utrzymanie powierzchni tapicerowanych wolnych od bakterii. Badanie przeprowadzono na materiale narażonym na działanie Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae.



**Parametry:** gramatura: 685 g/m<sup>2</sup> | wytrzymałość na rozdieranie ≥ 2 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 300.000 cykli.

**Surowce:** nośnik - Hi-Loft (tkanina produkowana w 100% z poliestrowej przędzy) | powłoka - vinyl 100% | warstwa ochronna - PermaBlok3 i SilverGuard z jonami srebra.

**Dezynfekcja:** można dezynfekować środkami do dezynfekcji wskazanymi w instrukcji konserwacji.

PERMABLOK<sup>3</sup>  
OCHRONA PRZED BAKTERIAMI I PLAMAMI

Ag SILVERGUARD<sup>®</sup>  
ANTYBakteryjny i Antygrzybiczy

Hi-Loft<sup>™</sup>  
100% POLIESTROWY PRZĘDZY

SilverTex<sup>®</sup>



Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja   masaż klasyczny
Regulacja wysokości leża	elektryczna ręczna/nożna (pilot/rama)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	48-100 cm
Liczba sekcji leża	2 sekcje (2-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomiu leża
Sekcja leżdziwio-nożna	bez regulacji
Wymiary obrysowe leża (dł. x szer.)	200 x 70 cm
Pozycja Pivota	Nie
Funkcja fotela	Nie
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Podłokietniki przy zagłówku	opuszczane - wyposażenie opcjonalne
System jezdny	4 koła - wyposażenie opcjonalne
Dopuszczalne obciążenie	160 kg
Usługa wniesienia stołu do lokalu	dostępna
Model/seria produkcyjna stołu	SS (WSTech)
Rodzaj ramy dolnej stołu	prostokątna
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Pilot nożny przewodowy	opcjonalnie
Regulacja wysokości ramą wokół podstawy stołu	opcjonalnie
Długość sekcji zagłówka [cm]	44
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji zagłówka	-70° do +40°
Otwór w zagłówku	opcjonalnie
Podłokietniki przy zagłówku	opcjonalnie 2 podłokietniki opuszczane
Podłokietniki - sposób regulacji	ręczny lub pneumatyczny
Podłokietniki - zakres regulacji	0 do -18 cm od poziomu zagłówka
Długość sekcji leżdziwio-nożnej [cm]	155
Relingi do pasów stabilizacyjnych	obustronne
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
System jezdny - typ	opcjonalnie 4 opuszczane koła kierunkowe z blokadą jazdy
Zasilanie elektryczne	AC   230 V   50 Hz

Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	89
Numer katalogowy produktu	SS-E01 200x70cm
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 13
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	3 lata
Producent	WS TECH spółka cywilna [2]
Siedziba producenta	[2] ul. Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[2] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Szerokość paczki [cm]	80
Długość paczki [cm]	220
Wysokość paczki [cm]	80
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą [kg]	110
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>