


Cross.2k

stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 2-częściowy elektryczny

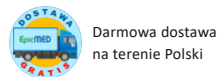

Medi 01 biały	Medi 02 żółty neonowy	Medi 03 zielony neonowy	Medi 04 niebieski jasny	Medi 05 malinowy
Medi 06 czerwony	Medi 07 morski	Medi 08 szkła medyczna	Medi 12 granatowy	Medi 15 czarny
Medi 16 błękitny	Medi 17 zielony trawiasty	Medi 18 limonkowy	Medi 20 kość słoniowa	Medi 21 płaskowy
Medi 22 miętowy	Medi 23 niebieski	Medi 24 szaro-niebieski	Medi 27 turkusowy	Medi 28 szoswinowy
Medi 30 bordowy	Medi 31 pomarańczowy	Medi 32 beżowy ciemny	Medi 33 beżowy jasny	Medi 34 szary jasny
Medi 36 szary ciemny	Medi 53 szary ciepły	Medi 54 różowy	Medi 55 pomarańcz. ciemny	

TAPICERKA - paleta Medi



Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w elektryczną regulację wysokości przewodowym pilotem ręcznym. Regulacja wysokości leża odbywa się płynnie i szybko dzięki zastosowaniu w systemie podnoszenia i opuszczania stołu wydajnego siłownika elektrycznego.

Stół rehabilitacyjny Cross.2k wyposażony jest 2-częściowe leże o szerokości 67 cm i długości 200 cm z sekcją zagłówka regulowaną pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża. Wypełnienie leża z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezszwowo tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru z palety Medi lub palety V-Line. Zagłówek jest wyposażony w otwór do oddychania z wyjmowaną zatyczką.

Stół Cross.2k wykonany jest na stabilnej ramie stalowej o konstrukcji krzyżakowej, lakierowanej proszkowo lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania. Podstawa stołu rehabilitacyjnego posiada dwa punkty podparcia od strony zagłówka, wyposażone w podgumowane stopki z regulacją umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu gabinetu. W ramie dolnej, tuż za stopkami, umieszczono 2 kółka kierunkowe (skrętne) ułatwiające manewrowanie stołem przy maksymalnie opuszczonym leżu stołu. W tylnej części stołu podstawa wyposażona jest w stałe 2 kółka. Kółka posiadają miękkie oponki do twardych podłoży i pozwalają na przetaczanie stołu w obrębie gabinetu i placówki bez konieczności jego podnoszenia. W zakładce "produkty powiązane" oferujemy wersję stołu Cross.2 wyposażonych tylko w 2 kółka tylne.

Stół rehabilitacyjny Cross.2k można dodatkowo doposażyć w opuszczane ręcznie podłokietniki przy sekcji zagłówka pozwalające na wygodne oparcie przedramion pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu oraz w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części stołu.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny
(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)
[PL-MF-000023594](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT

KINESIS

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja masaż klasyczny
Regulacja wysokości leża	elektryczna ręczna (pilot)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	48-93 cm
Liczba sekcji leża	2 sekcje (2-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomiu leża
Sekcja lędźwiowo-nożna	bez regulacji
Wymiary obrysowe leża (dł. x szer.)	200 x 67 cm
Pozycja Pivota	Nie
Funkcja fotela	Nie
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Funkcja CPR	Nie
Podłokietniki przy zagłówku	opuszczane - wyposażenie opcjonalne
System jezdny	4 koła w standardzie
Dopuszczalne obciążenie	200 kg
Usługa wniesienia stołu do lokalu	dostępna
Model/seria produkcyjna stołu	CROSS (BH Kinesis)
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	200
Rodzaj ramy dolnej stołu	krzyżakowa
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Długość sekcji zagłówka [cm]	47
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji zagłówka	-46° do +65°
Otwór w zagłówku	w standardzie z zatyczką
Podłokietniki przy zagłówku	opcjonalnie 2 podłokietniki opuszczane
Podłokietniki - sposób regulacji	ręczny
Podłokietniki - zakres regulacji	0 do -20 cm od poziomu zagłówka
Długość sekcji lędźwiowo-nożnej [cm]	152
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
System jezdny - typ	2 kółka do przetaczania + 2 kółka skrętne
Zasilanie elektryczne	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	57
Numer katalogowy produktu	CROSS 2k

Kod PKWU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5904063815crossVU
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 13
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	CROSS 2 stół rehabilitacyjny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na palecie	220x80x80 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	85
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[16] KINESIS Biuro Handlowe Andrzej Boruta © ul. Penara 23; 38-440 Iwnicz-Zdrój[Polaska] ☎ 13 435 06 45 @ biurokinesis@kinesis.com.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[16] PL-MF-000018445
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 13 435 06 45 @ biurokinesis@kinesis.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[16a] ☎ 695 768 360 biurokinesis@kinesis.com.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24