


GAIA I

drewniana leżanka medyczna 1-częściowa

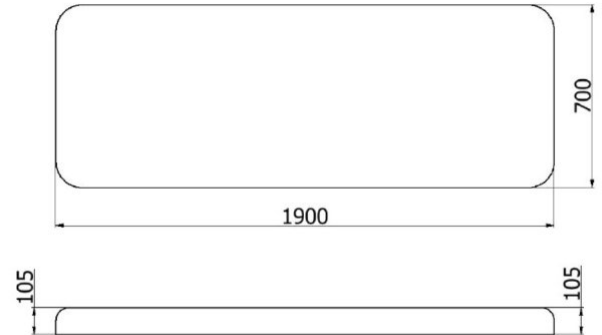

Leżanka medyczna GAIA I ze skokową regulacją wysokości za pomocą łatwych w obsłudze drewnianych gałek, wykonana na stabilnej konstrukcji z wyselekcjonowanego drewna bukowego w trzech kolorach do wyboru. Na stelażu drewnianym oparte jest jednoczęściowe leże z komfortowym wypełnieniem pianką PU o grubości 10 cm. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego. Leżanka wyposażona jest w funkcjonalną półkę na akcesoria do fizykoterapii lub masażu albo zabiegów kosmetycznych. W opcjach dodatkowych leżanka można być wykonana z otworem do oddychania w przedniej części leża (z zatyczką lub bez) oraz doposażona w uchwyt na podkłady higieniczne w rolkach o szerokości 60 cm i w podgłówek (prosty lub regulowany) montowany do krawędzi leża w przygotowanych do tego celu gniazdach.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Wyposażenie standardowe


- atestowana tapicerka z palety Standard Line
- drewniana konstrukcja leżanki i półka w kolorze naturalnego buku

Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- podgłówek prosty lub regulowany montowany do szczytu leżą
- otwór do oddychania w przedniej części leża z zatyczką
- wieszak na podkłady higieniczne w rolkach o szerokości 70 cm
- tapicerka z palety EXCLUSIVE Line
- drewniana konstrukcja leżanki i półka w kolorze palisander lub wenge

Tapicerka leżanki medycznej - paleta Standard Line

Materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Sanwia M754 jako skóropodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz), a także środki dezynfekujące zawierające aktywny chlor. Zgodna z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 (klasa I wyrobu) oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych oraz normą EN 71-3. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowana w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

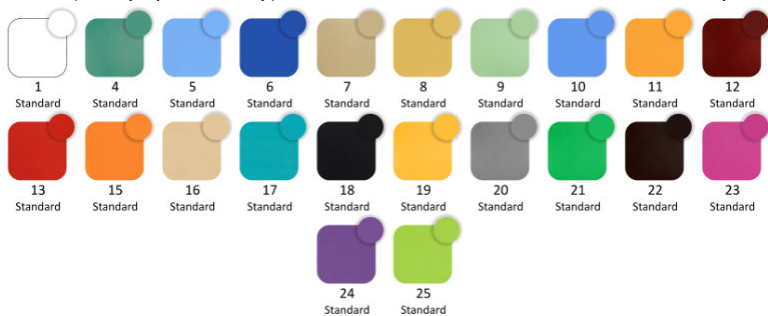

Parametry: grubość 0,85 ±0,15 mm | wytrzymałość na rozdieranie ≥ 2,5 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 40.000 cykli wg PN-EN ISO 5470-2 i ≥ 150.000 wg PN-EN ISO 12947-4.

Surowce: powłoka olejoodporna - PCW modyfikowane 100% | nośnik - poliester 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.

Tapicerka leżanki medycznej - paleta EXCLUSIVE Line

Wynylowy materiał obiciowy produkowany przez Spradling International pod nazwami handlowymi kolekcji Silvertext i Diamante. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosowy, test zapałki). Nie zawiera ftalanów i metali ciężkich oraz formaldehydu. Posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Odporny na promieniowanie UV.



Parametry: gramatura: 685 g/m² | wytrzymałość na rozdieranie ≥ 2 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 300.000 cykli.

Surowce: powłoka - winyl 100% | nośnik - poliester 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować środkami do dezynfekcji wskazanymi w instrukcji konserwacji.

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta 200x80cm
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	(nie dotyczy)
Gwarancja na elementy hydrauliczne	(nie dotyczy)
Gwarancja na elementy pneumatyczne	(nie dotyczy)
Gwarancja na przetwornik pomiarowy	(nie dotyczy)
Gwarancja na aparat	(nie dotyczy)
Gwarancja na aplikatory	(nie dotyczy)
Gwarancja na akcesoria	(nie dotyczy)
Gwarancja na tapicerkę	1 rok
Gwarancja do użytku domowego	(nie dotyczy)
Gwarancja komercyjna (dla firm)	(nie dotyczy)
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	GAIA I
Konstrukcja leżanki / kozetki	drewniana
Leże	1-częściowe
Długość	190 cm
Szerokość	70 cm
Wysokość	55-83 cm
Regulacja wysokości	Tak
Dopuszczalne obciążenie	200 kg
Kółka	bez kółek
Materiał ramy	wyselekcjonowane drewno bukowe w trzech kolorach do wyboru
Zakres regulacji wysokości (cm)	55-83
Sposób regulacji wysokości	skokowo za pomocą łatwych w obsłudze gałek
Zakres regulacji zagłówek	bez zagłówek
Otwory w leżu	opcja dodatkowa: otwór do oddychania z zatyczką w przedniej części leża
Półka pod leżem	w standardzie
Wieszak na podkłady w rolce	opcja dodatkowa

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>