


## Terapeuta M-S2.F4.69

stół rehabilitacyjny 2-częściowy elektryczny

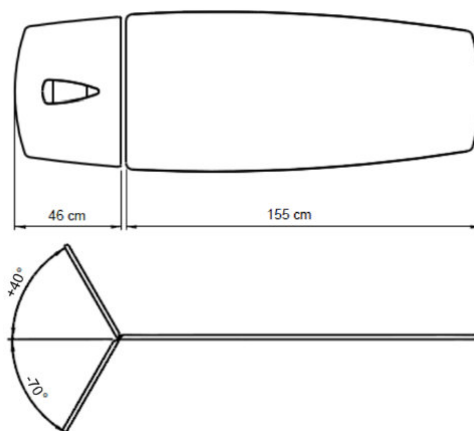

Stół rehabilitacyjny wyposażony jest w elektryczną regulację wysokości sterowaną z ramy wbudowanej w podstawę stołu. Wykonany na solidnej i stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo. Stół rehabilitacyjny posiada 2-częściowe leże o szerokości 69 cm i długości 202 cm z regulowaną pneumatycznie sekcją zagłówek w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża. Wersja modelu o szerokości leża 80 cm dostępna jest na tej stronie w zakładce "produkty powiązane". Zagłówek wyposażony jest w otwór na twarz z zatyczką maskującą. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka PU o grubości 4 lub 5 cm pokryta tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego. Po obu stronach leża znajdują się relingi do pasów stabilizujących pacjenta. Rama dolna typu F4 wyposażona jest w 4 podgumowane stopki z regulacją do 1 cm (poziomowanie) oraz w system 4 opuszczanych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania.

Stacjonarny stół rehabilitacyjny Terapeuta M-S2.F4.69 cechuje stabilność, niezawodność i prostota użytkowania. Znajduje zastosowanie do prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem leczniczego masażu lub innych terapii mających na celu przywrócenie sprawności poszczególnym partiom ciała pacjenta. Stosowany również w kinezyterapii do ćwiczeń z pacjentem w kabinie UGUL lub z użyciem innych systemów do ćwiczeń w podwieszeniu. Jest używany także przez wielu specjalistów w gabinetach rehabilitacji i fizjoterapii.

Producent: Meden-Inmed



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

## Wyposażenie standardowe

- leże bez systemu podgrzewania
- atestowana tapicerka zmywalna z palety Standard
- wypełnienie leża pianką PU o grubości 4 cm

## Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- leże z elektrycznym podgrzewaniem
- wypełnienie leża pianką PU o grubości 5 cm
- atestowana tapicerka zmywalna z palety Premium
- 2 barkowe banany stabilizujące
- pasy do stabilizacji pacjenta (długość ok. 2,5 m)
- wybrany wieszak na podkłady higieniczne w rolkach:
  - zintegrowany z leżem - na rolki podkładów  $\varnothing 16$  cm i szerokości max 60 cm
  - zintegrowany z ramą dolną - na rolki podkładów  $\varnothing 14$  cm i szerokości max 60 cm
- podpórka Cyriax pod nogi terapeuty stosowana przy manipulacji szyjnej

## Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - paleta Standard

Wysokiej jakości funkcjonalny materiał obiciowy typu skóra ekologiczna o podwyższonej odporności na ciecze (olejki, woda, solanki) i na płyny ustrojowe (krew, pot, moczu). Odporny na działanie wysokich temperatur, wysoce wytrzymały i odporny na zadrapania. Charakteryzuje się miękką i elastyczną powłoką. Może być czyszczony wybranymi środkami do dezynfekcji, zaleca się jednak czyszczenie tapicerki wyłącznie wodą z mydłem.



TAPICERKA paleta STANDARD



**Parametry:** grubość  $0.85 \pm 0,15$  mm | masa powierzchniowa:  $\geq 540$  g/m<sup>2</sup> | wytrzymałość na rozdieranie wzdłużne  $\geq 35$  /  $\geq 20$  daN/5cm | wytrzymałość na rozdieranie wszerz  $\geq 2,5$  /  $\geq 2,5$  daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie  $\geq 40.000$  cykli wg metody Martindale`a.

**Surowce:** powłoka olejoodporna - PCV modyfikowane 100% | nośnik - PES 100%.

**Dezynfekcja:** można dezynfekować środkami do dezynfekcji zalecanymi w instrukcji obsługi stołu.



## Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - paleta Premium objęta dopłatą

Najwyższej jakości skóropodobny materiał obiciowy produkowany przez SPRADLING International GmbH pod nazwą handlową Dolce PU. Wykonany z poliuretanu na podkładzie ze sztucznego jedwabiu. Pokryty antybakteryjną warstwą z jonami srebra. Niezwykle miękki, a równocześnie odporny na zarysowania oraz rozdarcia i przetarcia. Sześciokrotnie bardziej wytrzymały od tapicerki z palety Standard. Zmywalny i łatwy do czyszczenia. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu, stąd bezpieczny w kontakcie z dziećmi i osobami uczulonymi na lateks. Zgodny z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie migracji określonych pierwiastków oraz stosowania barwników azowych, w tym z normami: EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek) i 2005/84/EC (ftalany w zabawkach i produktach pielęgnacyjnych dla dzieci).



**Parametry:** gramatura: 370 g/m<sup>2</sup> | pęknięcie w niskich temperaturach: -23°C | odporność powłoki na ścieranie  $\geq 300.000$  cykli Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2) | odporność na pleśń (podkład i warstwa wierzchnia) | odporność na promienie UV: XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479-BLUE WOOL SCALE.

**Surowce:** powłoka - poliuretan (PU) 100% | nośnik - sztuczny jedwab 100%.

**Dezynfekcja:** można dezynfekować środkami do dezynfekcji wskazanymi w instrukcji konserwacji.



TAPICERKA paleta PREMIUM

PERMABLOK<sup>3</sup>® PERMAGUARD<sup>®</sup>  
OCHRONA PRZED BAKTERIAMI I PŁAMAMI | DOSKONAŁA ODPORNOSĆ NA PŁAMY



Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja   masaż klasyczny
Regulacja wysokości leża	elektryczna nożna (rama)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	47-95 cm
Liczba sekcji leża	2 sekcje (2-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomiu leża
Sekcja łądźwiowo-nożna	bez regulacji
Wymiary obrysowe leża (dł. x szer.)	202 x 69 cm
Pozycja Pivota	Nie
Funkcja fotela	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Pozycja Trendelenburga	Nie
System jezdny	4 koła w standardzie
Dopuszczalne obciążenie	225 kg
Model/seria produkcyjna stołu	Terapeuta (Meden-Inmed)
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	225
Rodzaj ramy dolnej stołu	prostokątna
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System autoryzacji dostępu	system PAS zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Regulacja wysokości ramą wokół podstawy stołu	w standardzie
Długość sekcji zagłówka [cm]	46
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny (sprężyna gazowa)
Zakres regulacji zagłówka	-70° do +40°
Otwór w zagłówku	w standardzie z zatyczką
Długość sekcji łądźwiowo-nożnej [cm]	155
Relingi do pasów stabilizacyjnych	obustronne
Gniazda pod banany do trakcji	opcjonalnie
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
System jezdny - typ	typ F4-4 koła kierunkowe i 4 podgumowane stopki z regulacją do 1 cm
Zasilanie elektryczne	AC   230 V   50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	95
Numer katalogowy produktu	Terapeuta M-SZ.F4 202x69cm

Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	2 lata
Gwarancja na elementy pneumatyczne	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	1 rok
Producent	Meden-Inmed sp. z o.o. [10]
Siedziba producenta	[10] ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[10] meden.com.pl/serwis
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Szerokość paczki [cm]	80
Długość paczki [cm]	220
Wysokość paczki [cm]	80
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą [kg]	115

## Biuro handlowe sklepu

### EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED

### Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>