

NBV-15N BT

lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania 1x15W ścienna




Polski producent
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

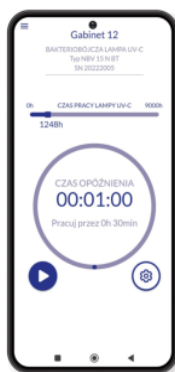

Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej powierzchni. Skutecznie eliminuje zalegające na powierzchniach drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśń, wirusy i bakterie. Wyposażona jest w promiennik o mocy 15W emitujący wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali 235,7 nm. Lampa wyposażona jest w specjalny odbłyśnik o wysokim współczynniku odbicia promieniowania, wykonany z wysokogatunkowego aluminium o charakterystyce zbliżonej do lustra. Kopuła lampy umożliwia regulację ręczną kąta nachylenia odbłyśnika, a tym samym kąta naświetlania pomieszczenia, co umożliwia skuteczną dezynfekcję górnych warstw ścian i sufitu. Ten model lampy przeznaczony jest do montażu na ścianie w odległości ok. 30 cm od sufitu.



6 - 8 m²

Lampa bakterio i wirusobójcza NBV-15N BT wyposażona jest w moduł komunikacji bezprzewodowej NBV BT Switch działający w systemie Bluetooth, co umożliwia zdalne sterowanie pracą lampy poprzez dedykowaną aplikację na smartfony (NBV App) z zainstalowanym systemem operacyjnym Android. Aplikacja pozwala na kontrolę nad jedną lub wybraną lampą, albo nad wszystkimi lampami z modułem NBV BT Switch znajdującymi się na terenie placówki. W aplikacji są również dostępne liczniki czasu pracy promienników, które odmierzają czas pracy poszczególnej lampy od momentu ostatniej wymiany promienników i sygnalizują konieczność ich ponownej wymiany. Lampą można też sterować ręcznie bez aplikacji.



W placówkach ochrony zdrowia lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania, dzięki wykorzystaniu dezynfekujących właściwości promieniowania UV-C, służą utrzymaniu czystości mikrobiologicznej powierzchni znajdujących się w pomieszczeniu (ścian, sufitu, podłóg i wykładzin, blatów, mebli, sprzętu medycznego, instrumentarium, etc.) eliminując obecne na tych powierzchniach drobnoustroje, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa mikrobiologicznego pacjentów i personelu tej placówki. Polecane są szczególnie do gabinetów zabiegowych i stomatologicznych oraz innych pomieszczeń, w których wykonuje się inwazyjne procedury medyczne.

Standardowo promiennik nie jest foliowany. Za dopłatą może być zamontowany w lampie promiennik spełniający wymagania norm higienicznych systemu HACCP pokryty folią przeciwwzrostkową (foliowany FTUV15W), która zabezpiecza przed skażeniami oraz rozsypaniem szkła po podłodze i na sprzętach w przypadku ewentualnego stłuczenia promiennika. Foliowanie promiennika nie wpływa na jego skuteczność i właściwości.



0,9 W/m²

Lampy bakteriobójcze serii NBV są urządzeniami energooszczędnymi, wyposażonymi w promienniki o długiej żywotności (8000 godzin pracy), dlatego ich stosowanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji tych lamp.

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

ULTRA-VIOL Pietras Purgał Wójcik sp.j.
ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl



ULTRA-VIOL

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



Rodzaj lampy UV-C	ścienna
Model lampy (seria)	NBV 1-kierunkowa
Moc i liczba promienników UV-C	15W [1 x 15W]
Natężenie promieniowania UV-C	0,9 W/m² z odległości 1m
Skuteczność w pomieszczeniu	do 8 m² [24 m³]
Żywotność promienników	8 000 godzin pracy
Licznik czasu pracy promienników	aplikacja NBV App na smartfony
Sygnalizacja wymiany promienników	akustyczna
Pilot zdalnego sterowania	aplikacja NBV App na smartfony
Przewód zasilający lamę UV-C	1 m z kostką do wplęcia w instalację
Typ promienników UV-C	UV-C TUV 15W G13 lub UV-C HNS 15W G13
Długość promienników UV-C [mm]	437,40
Producent promienników UV-C	Philips lub OSRAM
Długość fali promieniowania UV-C	253,7 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki	zerowy - promienniki nie emitują fal o długości 185nm odpowiedzialnych za powstawanie ozonu
Przenikalność promieniowania UV-C przez powierzchnie	nieprzenikalne, odbicie od powierzchni
Oddziaływanie promieniowania UV-C na tworzywa sztuczne	może powodować odbarwienia i żółknięcie
Regulacja kąta naświetlania	200°
Powłoka odbłyśnika lampy	lustrzana z aluminium
Poziom hałasu lampy UV-C	bezgłośna
Zasilanie lampy UV-C	AC 230V 50Hz
Pobór mocy przez lampę	25 VA
Klasa zabezpieczenia lampy	I B
Klasa szczelności obudowy lampy	IP20
Licznik czasu pracy promienników - wyświetlacz	w aplikacji sterującej NBV App na smartfony
Zdalne sterowanie pracą lampy	poprzez aplikację sterującą NBV App na smartfony
Wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej	Bluetooth NBV BT Switch
Aplikacja sterująca pracą lampy	NBV App
Aplikacja - wymagane oprogramowanie	Android w wersji co najmniej 6.0 lub nowszy
Aplikacja - wielkość	20 MB
Aplikacja - wymagania komunikacyjne	Wi-Fi lub LTE
Aplikacja - profilu portu komunikacji	port szeregowy (Serial Port Profile)
Aplikacja - pobieranie	kod QR w instrukcji obsługi dostarczonej lampy
Aplikacja - parowanie lampy z aplikacją	poprzez Bluetooth
Długość kopuły [cm]	46,5

Szerokość kopuły [cm]	8,5
Wysokość kopuły [cm]	13,5
Waga kopuły lampy [kg]	2
Długość wysięgnika ściennego [cm]	12
Długość całkowita lampy [cm]	50
Szerokość całkowita lampy [cm]	21
Wysokość całkowita lampy [cm]	13,5
Waga całkowita lampy [kg]	3,2
Numer katalogowy produktu	NBV-15N BT
Kod PKWiU	26.60.13.0
Kod CN	9018 20 00
Certyfikacja produktu	CE
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	5
Producent wyrobu	[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j. ☎ ul. Stępowizna34; 95-100 Zgierz [Polska] ☎42 717 11 76 @ biuro@ultraviol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 42 715 02 16 @ reklamacje@ultraviol.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.
Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24