

SS-E04.80

stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 3-częściowy elektryczny

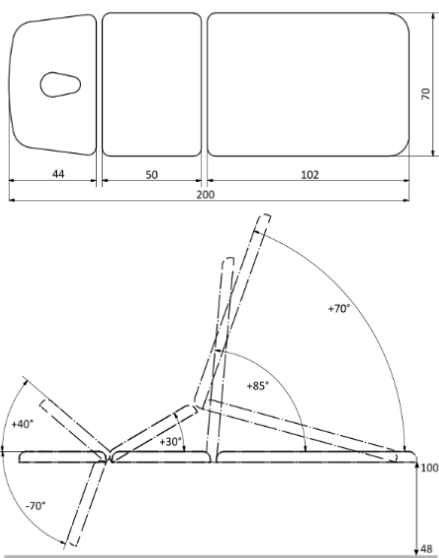

Polski producent
Polski serwis techniczny

Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

Darmowa dostawa
na terenie Polski

Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

Maksymalna waga
pacjenta

Dostępność Plus
Dostępność AOS


TAPICERKA paleta STANDARD

Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w łamanie leża w części środkowej do pozycji Pivot i podnoszenie tylnej części leża do funkcji fotela umożliwiającą pacjentowi przyjęcie pozycji siedzącej i półleżącej oraz w elektryczną regulację wysokości standardowo przewodowym pilotem ręcznym, a opcjonalnie również przewodowym pilotem nożnym lub ramą sterującą umieszczoną w podstawie stołu. Regulacja wysokości leża odbywa się płynnie i szybko dzięki zastosowaniu łożysk w systemie podnoszenia i opuszczania stołu.

Stół rehabilitacyjny SS-E04.80 oferuje 3-częściowe leże o szerokości 80 cm i długości 200 cm z sekcją zagłówek regulowaną pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża oraz sekcjami: piersiową i lędźwiowo-nożną standardowo regulowanymi pneumatycznie (sprężyny gazowe) do pozycji Pivot a tzw. łamaniem leża ku górze oraz do funkcji fotela i przechyłu całego leża do pozycji Trendelenburga. Opcjonalnie pozycjonowanie leża do pozycji Pivot a i funkcji fotela może być regulowane elektrycznie siłownikami elektrycznymi umieszczonymi pod leżem. Wypełnienie leża wykonano z pianki PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru z palety standard lub palety Prestige. Przy sekcji piersiowej oraz lędźwiowo-nożnej znajdują się obustronne relingi do mocowania pasów stabilizujących pacjenta.

Stół rehabilitacyjny wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania oraz promieniowanie UV. Podstawa stołu do rehabilitacji wyposażona jest standardowo w cztery podgumowane stopki z regulacją umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu gabinetu. Opcjonalnie podstawa może być doposażona w system kół opuszczanych nadających mobilności stołowi rehabilitacyjnemu. Opuszczając koła dźwignią nożną następuje jednoczesne wypchnięcie stopków ku górze. Stół można wtedy przetrzącać w obrębie gabinetu lub placówki bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

Stół rehabilitacyjny SS-E04.80 można doposażyć w wyposażenie dodatkowe. Zagłówek może być wyposażony w otwór do oddychania z wymiową zatyczką, a także opcjonalnie w dwa opuszczane podłokietniki dla wygodnego podparcia przedramion pacjenta ułożonego na brzuchu. W sekcji piersiowej mogą być opcjonalnie wykonane półki boczne otwierane w dół, aby podczas zabiegu lub masażu ręce pacjenta ułożonego na brzuchu mogły pozostawać w swobodnym zwisie. Do leża w jego tylnej części można zamontować uchwyt na podkłady higieniczne w rolce.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](mailto:sklep@epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym


Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Przeznaczenie stołu stacjonarnego	rehabilitacja badania i zabiegi
Regulacja wysokości leża	elektryczna ręczna/nożna (pilot/rama)
Zakres regulacji wysokości leża od podłoża	48-100 cm
Liczba sekcji leża	3 sekcje (3-częściowe)
Sekcja zagłówka	regulowana +/- poziomiu leża
Sekcja piersiowa	regulowana - łamanie leża
Sekcja lędźwiowo-nożna	regulowana (podnoszona)
Wymiary obrysowe leża (dł. x szer.)	200 x 80 cm
Pozycja Pivota	Tak
Funkcja fotela	Tak
Pozycja Trendelenburga	Tak
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Funkcja CPR	Nie
Podłokietniki przy zagłówku	opuszczane - wyposażenie opcjonalne
System jezdny	4 koła - wyposażenie opcjonalne
Dopuszczalne obciążenie	160 kg
Usługa wniesienia stołu do lokalu	dostępna
Model/seria produkcyjna stołu	SS (WSTech)
Statyczna wytrzymałość leża [kg]	160
Rodzaj ramy dolnej stołu	prostokątna
Materiał ramy dolnej stołu	lakierowane profile stalowe
System podnoszenia leża	silownik elektryczny
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Pilot nożny przewodowy	opcjonalnie
Regulacja wysokości ramą wokół podstawy stołu	opcjonalnie
Długość sekcji zagłówka [cm]	44
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny
Zakres regulacji zagłówka	-70° do +40°
Otwór w zagłówku	opcjonalnie
Podłokietniki przy zagłówku	opcjonalnie
Podłokietniki - sposób regulacji	ręczny lub pneumatyczny
Podłokietniki - zakres regulacji	0 do -18 cm od poziomu zagłówka
Długość sekcji piersiowej [cm]	50
Sposób regulacji sekcji piersiowej	pneumatyczny lub opcjonalnie elektryczny
Zakres regulacji sekcji piersiowej	0-30°
Opuszczane boki sekcji piersiowej (zwis ramion pacjenta)	opcjonalnie
Sposób łamania leża w cz. środkowej	pneumatyczny lub opcjonalnie elektryczny
Zakres łamania leża w cz. środkowej	0-30°
Długość sekcji lędźwiowo-nożnej [cm]	102
Sposób regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej	pneumatyczny lub opcjonalnie elektryczny
Zakres regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej	0-15° do Pivota 0-85° do fotela

Sposób regulacji do pozycji Trendelenburga	pneumatyczny lub opcjonalnie mieszany pneumatyczny/elektryczny
Zakres regulacji pozycji Trendelenburga	od -30° do 0°
Relingi do pasów stabilizacyjnych	obustronne
Wieszak na podkłady higieniczne	opcjonalnie
System jezdny - typ	opcjonalnie 4 opuszczane koła kierunkowe z blokadą jazdy
Zasilanie elektryczne	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]	103
Numer katalogowy produktu	SS-E04 200x80
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	5900415491SIEISSeCX
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 13
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	SS-E04 stacjonarny stół rehabilitacyjny elektrycznie sterowany
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Gwarancja na tapicerkę premium	3 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na paletcie	200x80x80 cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	130
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[36] WS TECH Lorens sp.j.  ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska]  13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[36] PL-MF-000045163
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[36]  13 464 44 49 biuro@wstech.eu

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24