
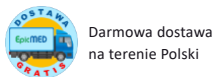


FoZa Basic Plus

fotel zabiegowy uniwersalny

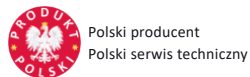

Nr 01 biały	Nr 03 beżowy	Nr 05 turkusowy	Nr 06 morski	Nr 07 niebieski
Nr 08 granatowy	Nr 09 brązowy	Nr 10 czarny	Nr 11 czerwony	Nr 12 ciemny zielony
Nr 13 fiososioły	Nr 14 złoty	Nr 16 szary	Nr 17 pomarańczowy	Nr 18 burgund
Nr 19 amarantowy	Nr 20 jasny zielony	Nr 21 zielony	Nr 22 brązowy jasny	Nr 23 różowy jasny
Nr 24 szaro-fioletowy				

TAPICERKA kolory

Fotel zabiegowy o uniwersalnych właściwościach do powszechnego zastosowania w gabinetach lekarskich i zabiegowych. Z powodzeniem może być wykorzystany do dializ lub chemioterapii, a także do badań pacjenta oraz pobrání i iniekcji lub innych drobnych procedur zabiegowych. Fotel zabiegowy oparty jest na ramie z profili stalowych pokrytej lakierem proszkowym w kolorze szarym, odpornym na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne oraz środki do mycia i dezynfekcji. Wyposażony w bezszwowe tapicerowane siedzisko i oparcie pleców z regulacją kąta nachylenia przy pomocy sprężyny gazowej oraz w regulowany sprężyną gazową tapicerowany segment podudzia z podnóżkiem. Dzięki regulacji oparcia pacjent może przyjąć nie tylko pozycję siedzącą, ale również pozycję półleżącą i leżącą. Oparcie pleców w fotelu zabiegowym posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS w kolorze zbliżonym z kolorem ramy fotela. Po obu stronach fotela zabiegowego znajdują się wygodne i tapicerowane podłokietniki z regulacją w dwóch płaszczyznach. Funkcjonalność fotela zabiegowego można zwiększyć dobierając do niego dostępne wyposażenie dodatkowe: blat zabiegowy, zintegrowany z fotelem uchwyt do zawieszania kroplówki oraz profilowany i tapicerowany podglówek w kształcie półwałka. Standardowo fotel w podstawie posiada stopki pozwalające na poziomowanie konstrukcji fotela a w opcji dodatkowej podstawę można wyposażyć w kółka nadające fotelowi mobilności, tylne koła wyposażone są w blokadę (hamulec).

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000043708](https://www.epicmed.pl)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

DANE PRODUKTU

Wyrób medyczny [MDD/MDR]	Tak
Rodzaj fotela zabiegowego	uniwersalny (wielofunkcyjny)
Maksymalne obciążenie z pacjentem	do 150 kg
Regulacja wysokości siedziska	bez regulacji (stała wysokość)
Wysokość siedziska do podłoża - minimum	50 cm (stała)
Wysokość siedziska do podłoża - maksimum	50 cm (stała)
Rozkładanie do pozycji leżącej	Tak
Sekcja podnóżka	podnózek regulowany
Podłokietniki regulowane	Tak
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Dostępność PLUS (AOS)	Tak
Błat zabiegowy/instrumentalny	błat zabiegowy opcjonalnie
Koła - system jezdny	koła opcjonalnie
Usługa wniesienia fotela do lokalu	dostępna
Konstrukcja fotela	stalowa lakierowana proszkowo
Oparcie pleców	tapicerowane
Sposób regulacji oparcia pleców	pneumatyczny
Zakres regulacji oparcia pleców	10-75°
Siedzisko	tapicerowane
Sposób regulacji siedziska	bez regulacji
Wysokość siedziska od podłoża [cm]	50
Podglówek	opcjonalnie
Podłokietniki	obustronne, tapicerowane z regulacją kąta nachylenia od -20° do +60°
Sposób regulacji podłokietników	manualny
Zakres regulacji podłokietników - wysokość	15-25 cm od poziomu siedziska
Zakres regulacji podłokietników - obrót w poziomie	-45° do +45°
Podnózek	tapicerowany
Sposób regulacji podnóżka	pneumatyczny
Zakres regulacji podnóżka [cm]	+7° do -70°
Podpora stóp	zintegrowana z podnóżkiem
Sposób regulacji podpory stóp	bez regulacji
Wieszak kropłówki	opcjonalnie
Maksymalne obciążenie wieszaka kropłówki [kg]	4
Błat zabiegowy - długość [cm]	34,8
Błat zabiegowy - szerokość [cm]	24,8
Maksymalne obciążenie blatu zabiegowego [kg]	10
Podstawa fotela	4 stopki, opcjonalnie 4 koła

Szerokość siedziska [cm]	55
Głębokość siedziska [cm]	45
Długość całkowita fotela w pozycji leżącej z podnóżkiem [cm]	187
Szerokość całkowita fotela [cm]	88
Wysokość całkowita fotela w pozycji siedzącej [cm]	150
Waga fotela [kg]	37
Numer katalogowy produktu	FoZA Basic Plus
Kod PKWUI	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR	wyrób medyczny
Kod Basic UDI-DI	59048836100116K
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Organ zgłoszenia wyrobu medycznego	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwa zgłoszona do organu	Fotel zabiegowy FoZA BASIC PLUS
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	2 lata
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	paleta przemysłowa bezzwrotna
Gabaryt produktu na palecie	122x102x170cm
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	60
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	odpłatna
Producent wyrobu	[34] U.B.M. Katarzyna Kotasińska ☺ ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów [Polska] ☎77 410 52 57 @ info@meble-medyczne.pl
SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej	[34] PL-MF-000043708
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 77 412 70 78 @ biuro@meble-medyczne.pl
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce	producent wyrobu medycznego (dane powyżej)
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)
Zgłaszanie incydentów medycznych	[34] ☎ 77 410 52 57 info@meble-medyczne.pl

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24