


## SS-H03.65

### stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 2-częściowy hydrauliczny



Polski producent  
Polski serwis techniczny

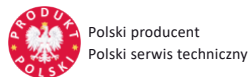

Wyrób medyczny  
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa  
na terenie Polski




Deklaracja zgodności  
Oznakowanie CE



Maksymalna waga  
pacjenta



Dostępność Plus  
Dostępność AOS

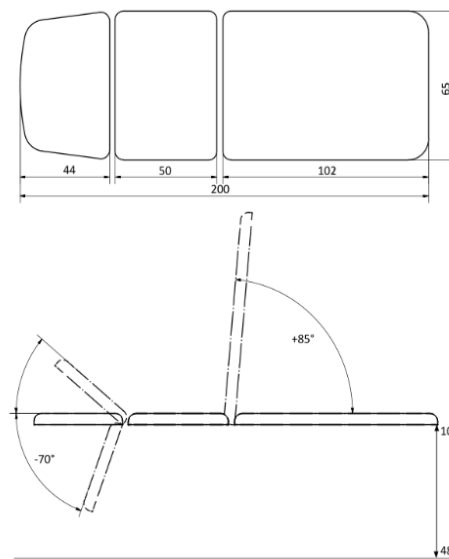

Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w podnoszenie tylnej części leża do funkcji fotela umożliwiającą pacjentowi przyjęcie pozycji siedzącej i półleżącej oraz w hydrauliczną regulację wysokości obustronnym przyciskiem nożnym umieszczonym w ramie stołu. Regulacja wysokości leża odbywa się płynnie i szybko dzięki zastosowaniu łożysk w systemie podnoszenia i opuszczania stołu.

Stół rehabilitacyjny SS-H03.65 oferuje 3-częściowe leże o szerokości 65 cm i długości 200 cm z sekcją zagłówka regulowaną pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża oraz nieruchomą sekcją piersiową i sekcją łądzwiowo-nożną podnoszoną pneumatycznie (sprężyna gazowa) do funkcji fotela. Wypełnienie leża wykonano z pianki PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezzwłókną tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru z palety standard lub palety Prestige. Przy sekcji piersiowej oraz łądzwiowo-nożnej znajdują się obustronne relingi do mocowania pasów stabilizujących pacjenta.

Stół rehabilitacyjny wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania oraz promieniowanie UV. Podstawa stołu do rehabilitacji wyposażona jest standardowo w cztery podgumowane stopki z regulacją umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu gabinetu. Opcjonalnie podstawa może być doposażona w system kół opuszczanych nadających mobilności stołowi rehabilitacyjnemu. Opuszczając koła dźwigni nożną następuje jednocześnie wypchnięcie stopek ku górze. Stół można wtedy przetrzącać w obrębie gabinetu lub placówki bez konieczności jego podnoszenia. Kola ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

Stół rehabilitacyjny SS-H03.65 można doposażyć w wyposażenie dodatkowe. Zagłówek może być wyposażony w otwór do oddychania z wymiową zatyczką, a także w dwa opuszczane podłokietniki dla wygodnego podparcia przedramion pacjenta ułożonego na brzuchu. W sekcji piersiowej mogą być opcjonalnie wykonane półki boczne otwierane w dół, aby podczas zabiegu lub masażu ręce pacjenta ułożonego na brzuchu mogły pozostawać w swobodnym zwisie. Do leża w jego tylnej części można zamontować uchwyt na podkłady higieniczne w rolce.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

PL-MF-000045163

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



TAPICERKA paleta STANDARD



# DANE TECHNICZNE

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Przeznaczenie stołu stacjonarnego                        | rehabilitacja   badania i zabiegi   |
| Regulacja wysokości leża                                 | hydrauliczna nożna (dźwignia)       |
| Zakres regulacji wysokości leża od podłoża               | 48-100 cm                           |
| Liczba sekcji leża                                       | 3 sekcje (3-częściowe)              |
| Sekcja zagłówka  | regulowana +/- poziomemu leża       |
| Sekcja piersiowa   | bez regulacji                       |
| Sekcja łądziwiowo-nożna                                  | regulowana (podnoszona)             |
| Wymiary obrysowe leża (dl. x szer.)                      | 200 x 65 cm                         |
| Pozycja Pivota   | Nie                                 |
| Funkcja fotela   | Tak                                 |
| Pozycja Trendelenburga                                   | Nie                                 |
| Pozycja antyTrendelenburga                               | Nie                                 |
| Funkcja CPR  | Nie                                 |
| Podłokietniki przy zagłówku                              | opuszczane - wyposażenie opcjonalne |
| System jezdny  | 4 koła - wyposażenie opcjonalne     |
| Dopuszczalne obciążenie                                  | 160 kg                              |
| Usługa wniesienia stołu do lokalu                        | dostępna                            |
| Model/seria produkcyjna stołu                            | SS (WSTech)                         |
| Statyczna wytrzymałość leża [kg]                         | 160                                 |
| Rodzaj ramy dolnej stołu                                 | prostokątna                         |
| Materiał ramy dolnej stołu                               | lakierowane profile stalowe         |
| System podnoszenia leża                                  | siłownik hydrauliczny               |
| Długość sekcji zagłówka [cm]                             | 44                                  |
| Sposób regulacji zagłówka                                | pneumatyczny                        |
| Zakres regulacji zagłówka                                | -70° do +40°                        |
| Otwór w zagłówku   | opcjonalnie                         |
| Podłokietniki przy zagłówku                              | opcjonalnie                         |
| Podłokietniki - sposób regulacji                         | ręczny lub pneumatyczny             |
| Podłokietniki - zakres regulacji                         | 0 do -18 cm od poziomu zagłówka     |
| Długość sekcji piersiowej [cm]                           | 50                                  |
| Sposób regulacji sekcji piersiowej                       | bez regulacji                       |
| Opuszczane boki sekcji piersiowej (zwis ramion pacjenta) | opcjonalnie                         |
| Długość sekcji łądziwiowo-nożnej [cm]                    | 102                                 |
| Sposób regulacji sekcji łądziwiowo-nożnej                | pneumatyczny                        |
| Zakres regulacji sekcji łądziwiowo-nożnej                | 0-85°                               |
| Relingi do pasów stabilizacyjnych                        | obustronne                          |

|   |   |
|---|---|
| Wieszak na podkłady higieniczne   | opcjonalnie   |
| System jezdny - typ   | opcjonalnie 4 opuszczane koła kierunkowe z blokadą jazdy  |
| Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg]                                 | 93  |
| Numer katalogowy produktu   | SS-H03 200x65   |
| Kod PKWiU   | 32.50.21.0  |
| Kod CN  | 9018 90 84  |
| Certyfikacja produktu   | CE/MDD/MDR  |
| Dokument certyfikacji produktu  | deklaracja zgodności  |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR  | wyrób medyczny  |
| Kod Basic UDI-DI  | 5900415491STMHSSPZ  |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego  | klasa I, reguła 1   |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego  | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych                                       |
| Nazwa zgłoszona do organu   | SS-H03 stacjonarny stół rehabilitacyjny   |
| Stawka podatku VAT na produkt   | 8%  |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT  | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)  |
| Gwarancja ogólna  | 2 lata  |
| Gwarant udzielający gwarancji   | producent wyrobu / produktu   |
| Gwarancja na konstrukcję  | 2 lata  |
| Gwarancja na elementy hydrauliczne  | 1 rok   |
| Gwarancja na elementy pneumatyczne  | 1 rok   |
| Gwarancja na tapicerkę standardową  | 2 lata  |
| Gwarancja na tapicerkę premium  | 3 lata  |
| Rodzaj przesyłki z produktem  | przesyłka paletowa  |
| Rodzaj palety   | paleta przemysłowa bezzwrotna   |
| Gabaryt produktu na paletę  | 200x80x80 cm  |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]                                | 120   |
| Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy                                 | odpłatna  |
| Producent wyrobu  | [36] WS TECH Lorens sp.j. <sup>®</sup> ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej                   | [36] PL-MF-000045163  |
| Serwis techniczny w Polsce  | fabryczny producenta  |
| Serwis techniczny - kontakt   | ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu  |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej)  |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu                           | producent (dane powyżej)  |
| Zgłaszanie incydentów medycznych  | [36] ☎ 13 464 44 49   biuro@wstech.eu   |

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24