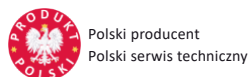


SR.4A

kozetka lekarska 3-częściowa


 Polski producent
Polski serwis techniczny

 Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU

 Darmowa dostawa
na terenie Polski

 Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

 Maksymalna waga
pacjenta

 Dostępność Plus
Dostępność AOS

TAPICERKA kolory

Kozetka lekarska o stałej wysokości 50 cm na stabilnym stelażu wykonanym z zamkniętych profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Kozetka lekarska wyposażona jest w 3-częściowe leże z regulowanym zagłówkiem i regulowanym podnóżkiem w zakresie +/- od poziomu leża. Regulacje sekcji zagłówka i podnóżka przy pomocy mechanizmów zapadkowych. Leże kozetki wypełnione jest elastyczną pianką PU i obszyte bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru. Tapicerka kozetki poddaje się dezynfekcji dostępnymi na rynku środkami do dezynfekcji powierzchni medycznych. Nogi kozetki zakończone są podgumowanymi stopkami z regulacją pozwalającą wypoziomować kozetkę na nierównej powierzchni gabinetu. Standardowo kozetka wyposażona jest w wieszak na podkłady higieniczne w rolkach o szerokości 50 cm zamontowany od strony zagłówka. Kozetka nie wymaga montażu po dostawie, dostarczana jest na palecie w stanie gotowym do użytku.

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000009262](https://ec.europa.eu/eudamed/entry/PL-MF-000009262)
PRODUCENT

Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

 Email: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE PRODUKTU

| | |
|--|--|
| Leże kozetki lekarskiej | 3-częściowe |
| Kozetka niemagnetyczna do MR | Nie |
| Kozetka składana do transportu | Nie |
| Kozetka przyścienna (składana do ściany) | Nie |
| Regulowany zagłówek | Tak |
| Otwór w leżu do badań kardiologicznych | Nie |
| Podłokietniki w standardzie | Nie |
| Podłokietniki opcjonalnie | Nie |
| Sekcja podnóżka | Nie |
| Sekcja podnóżka z regulacją | Tak |
| Materiał ramy dolnej kozetki | stal lakierowana |
| Długość całkowita kozetki | 185 cm |
| Szerokość całkowita kozetki | 56 cm |
| Skokowa regulacja wysokości kozetki | Nie |
| Wysokość całkowita kozetki | 50 cm |
| Dopuszczalne obciążenie kozetki | 200 kg |
| Kozetka z barierkami bocznymi | Nie |
| Relingi do pasów stabilizujących | Nie |
| Uchwyt na podkłady w standardzie | Tak |
| Uchwyt na podkłady opcjonalnie | Nie |
| Koła w standardzie | Nie |
| Koła opcjonalnie | Nie |
| Usługa wniesienia kozetki do lokalu | niedostępna |
| Materiał ramy dolnej - szczegóły | zamknięte profile stalowe lakierowane proszkowo |
| Sekcja zagłówka | tapicerowana |
| Sekcja zagłówka - sposób regulacji | mechanizm zapadkowy |
| Sekcja zagłówka - zakres regulacji | 0° do +45° |
| Sekcja podnóżka | tapicerowana |
| Sekcja podnóżka - sposób regulacji | mechanizm zapadkowy |
| Sekcja podnóżka - zakres regulacji | -45° do +45° |
| Wieszak na podkłady higieniczne | w standardzie, montowany do ramy od strony zagłówka |
| Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność | 1 rolka o szerokości 50 cm |
| Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm] | 52 |

| | |
|---|--|
| Długość sekcji zagłówka [cm] | 50 |
| Długość sekcji środkowej [cm] | 85 |
| Długość sekcji podnóżka [cm] | 50 |
| Waga kozetki [kg] | 35 |
| Numer katalogowy produktu | SR3-ST-185-56-50-T_(5)-0-N-W |
| Kod PKWiU | 32.50.30.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 5904126-SRVP |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | Klasa I, reguła 1 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | SR3 stół rehabilitacyjny Typ SR |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 1 rok |
| Gwarancja na tapicerkę standardową | 1 rok |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka paletowa |
| Rodzaj palety | paleta przemysłowa bezzwrotna |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg] | 55 |
| Producent wyrobu | [37] TECH-MED Zakład Techniki Medycznej sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska] ☎ 52 360 58 50 @ techmed@techmed.com.pl |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [37] PL-MF-000009262 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 52 360 58 50 w. 41 @ reklamacje@techmed.com.pl |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24