

## MDBW/1k.7035

mobilna szafa lekarska 1-skrzydłowa 2-komorowa popielata na kołach



Polski producent  
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa  
na terenie Polski



ral 7035  
jasny popielaty



ral 9010  
biały




ral 1015  
jasny beż



ral 5010  
ciemny niebieski




ral 6033  
mętowy zielony

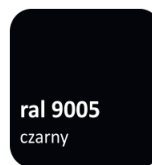

ral 9005  
czarny



ral 7032  
szary

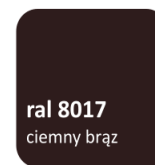

ral 8017  
ciemny brąz



ral 2011  
pomarańczowy



ral 3020  
czerwony

Kolorystyka szaf  
lakier proszkowy



Szafa lekarska 1-skrzydłowa z oddzielnie zamykaną górną i dolną komorą szafy, wykonana z czarnej blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7035 (popielaty jasny). Górna komora szafy posiada od frontu stalowe drzwi w typie witryny z przeszkleniem wykonanym z bezpiecznego szkła hartowanego. Z tego samego szkła przeszklono również boki górnej komory korpusu szafy. Dolna komora posiada pełne drzwi stalowe bez przeszklenia. Wszystkie drzwi osadzone są na zawiasach kołkowych. Każde skrzydło drzwi posiada 3-punktowe ryglowanie zwalniane umieszczonym w drzwiach zamkiem baszkwilowym (bębenkowy, patentowy) z obracającym uchwytem klamkowym.

Standardowym wyposażeniem szafy lekarskiej są 3 półki, których położenie można regulować w pionie przenosząc półkę na kolejne wsporniki umieszczone w narożnikach szafy. Półki wykonane są z bezpiecznego szkła hartowanego. Nośność każdej półki wynosi 25 kg. W opcjach wyposażenia dodatkowego szafę można doposażyć w jedną lub dwie dodatkowe półki.

Podstawa szafy lekarskiej wyposażona jest w 4 koła nadające szafie lekarskiej mobilności w obrębie gabinetu lekarskiego lub placówki medycznej, w tym 2 koła stałe i 2 kierunkowe (skrętne). 1 koło wyposażone jest w hamulec postojowy (blokadę jazdy).

Szafa lekarska MDBW/1k.7035 spełnia wymagania zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do leków i środków medycznych na poziomie podstawowym i jest dedykowana do powszechnego stosowania w gabinetach lekarskich i zabiegowych placówek ochrony zdrowia, a także w szkolnych gabinetach pielęgniarskich oraz w stacjonarnych punktach pierwszej pomocy przedlekarskiej znajdujących się na terenie biur, zakładów pracy i innych obiektów niemedycejskich.

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

KART-MAP Spółka Jawna  
Nikielkowo, ul. Parkowa 3; 10-376 Olsztyn  
89 535 71 50 | biuro@janpol.pl



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl) <https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

# DANE TECHNICZNE

Rodzaj szafy	wolnostojąca na stopkach
Typ szafy lekarskiej	1-skrzydłowa 2-drzwiowa
Podział szafy	2-komorowa
Kolor korpusu szafy	<b>RAL 7035 popielaty jasny</b>
kolor drzwi szafy	<b>dostępne różne kolory</b>
Materiał szafy	<b>blacha stalowa</b>
Przeszklenie witrynowe szafy	<b>tylko górna komora - drzwi i boki</b>
Wysokość całkowita korpusu szafy	<b>190 cm</b>
Szerokość całkowita szafy	<b>60 cm</b>
Głębokość całkowita szafy	<b>42 cm</b>
Podstawa szafy	<b>4 koła</b>
Usługa wniesienia szafy do lokalu	<b>dostępna</b>
Konstrukcja	<b>metalowa</b>
Konstrukcja - materiał	<b>czarna blacha stalowa</b>
Grubość blachy [mm]	<b>0,8</b>
Powłoka malarska szafy	<b>lakier proszkowy (epoksydowo-poliestrowy)</b>
Zawiasy szafy	<b>kolkowe</b>
Rodzaj zamka drzwi	<b>baskwilowy z obrotowym uchwytem klamkowym</b>
Ryglowanie drzwi	<b>3-punktowe</b>
Przeszklenie drzwi - materiał	<b>bezpieczne szkło hartowane</b>
Przeszklenie korpusu na bokach - materiał	<b>bezpieczne szkło hartowane</b>
Liczba półek na wyposażeniu	<b>3 półki</b>
Materiał półek	<b>bezpieczne szkło hartowane</b>
Rozstaw półek w pionie	<b>regulowany</b>
Maksymalne obciążenie 1 półki [kg]	<b>25</b>
Kółka	<b>2 koła stałe i 2 kierunkowe (1 koło z hamulcem)</b>
Szerokość szafy [cm]	<b>60</b>
Głębokość szafy [cm]	<b>42</b>
Wysokość szafy bez wyposażenia dodatkowego [cm]	<b>180</b>
Wysokość szafy z kółkami [cm]	<b>190</b>
Ciężar szafy [kg]	<b>55</b>
Numer katalogowy produktu	<b>MDBW/1k RAL 7035</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>atest bezpieczeństwa (nie wymaga znaku CE)</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>23%</b>

Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka paletowa</b>
Rodzaj palety	<b>paleta EUR 1 (120x80 cm) bezzwrotna</b>
Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg]	<b>70</b>
Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy	<b>odpłatna</b>
Producent wyrobu	<b>[15] KART-MAP Krzysztof Lachacz sp.j. ☎ Nikielkowo, ul. Parkowa 3; 10-376 Olsztyn [Polska] ☎89 535 71 50 @ biuro@janpol.pl</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>☎ 89 535 71 50 @ handlowy@kart-map.com.pl</b>
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	<b>producent (dane powyżej)</b>

## Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym  
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)  
GSM/SMS: **533 99 22 01**  
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)  
E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)  
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.  
Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.  
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.  
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.  
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.  
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10d  
40-013 Katowice  
NIP 9542784362  
NIP UE: PL9542784362  
REGON 368734116  
KRS 0000703242  
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000  
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24