


SS-E02.65 Plus

stół stacjonarny do rehabilitacji i masażu 3-częściowy elektryczny



Polski producent
Polski serwis techniczny

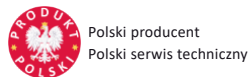

Wyrób medyczny
MDR 2017/745/EU



Darmowa dostawa
na terenie Polski





Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Maksymalna waga
pacjenta



Dostępność Plus
Dostępność AOS

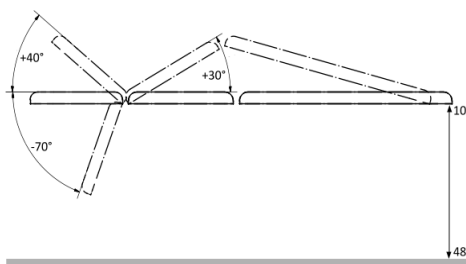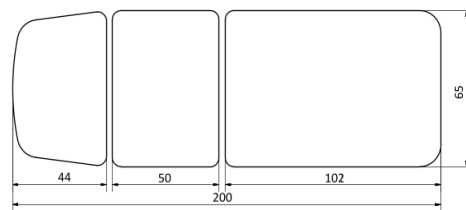

Stacjonarny stół rehabilitacyjny wyposażony w łamanie leża w części środkowej do pozycji Pivota oraz elektryczną regulację wysokości standardowo przewodowym pilotem ręcznym, a opcjonalnie również przewodowym pilotem nożnym lub ramą sterującą umieszczoną w podstawie stołu. Regulacja wysokości leża odbywa się płynnie i szybko dzięki zastosowaniu łożysk w systemie podnoszenia i opuszczania stołu. Wersja Plus z maksymalnym obciążeniem statycznym stołu do 200 kg, dzięki zastosowaniu silownika elektrycznego o większej sile podnoszenia.

Stół rehabilitacyjny SS-E02.65 Plus oferuje 3-częściowe leże o szerokości 65 cm i długości 200 cm z sekcją zagłówka regulowaną pneumatycznie (sprężyna gazowa) w zakresie powyżej i poniżej poziomu leża oraz sekcjami: piersiową i lędźwiowo-nożną standardowo regulowanymi pneumatycznie (sprężyny gazowe) do pozycji Pivota z tzw. łaniem leża ku górze, a opcjonalnie regulowane elektrycznie silownikiem elektrycznym umieszczonym pod leżem. Wypełnienie leża wykonano z pianki PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w wielu kolorach do wyboru z palety standard lub palety Prestige. Przy sekcji piersiowej oraz lędźwiowo-nożnej znajdują się obustronne relingi do mocowania pasów stabilizujących pacjenta.

Stół rehabilitacyjny wykonany jest na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie i zadrapania oraz promieniowanie UV. Podstawa stołu do rehabilitacji wyposażona jest standardowo w cztery podgumowane stopki z regulacją umożliwiającą poziomowanie stołu na nierównym podłożu gabinetu. Opcjonalnie podstawa może być doposażona w system kół opuszczanych nadających mobilności stołowi rehabilitacyjnemu. Opuszczając koła dźwignią nożną następuje jednocześnie wypchnięcie stopek ku górze. Stół można wtedy przetaczać w obrębie gabinetu lub placówki bez konieczności jego podnoszenia. Koła ułatwiają manewrowanie stołem i posiadają miękkie oponki do twardych podłoży.

Stół rehabilitacyjny SS-E02.65 Plus można doposażyć w wyposażenie dodatkowe. Zagłówek może być wyposażony w otwór do oddychania z wymiową zatyczką, a także opcjonalnie w dwa opuszczane podłokietniki dla wygodnego podparcia przedramion pacjenta ułożonego na brzuchu. W sekcji piersiowej mogą być opcjonalnie wykonane półki boczne otwierane w dół, aby podczas zabiegu lub masażu ręce pacjenta ułożonego na brzuchu mogły pozostawać w swobodnym zwisie. Do leża w jego tylnej części można zamontować uchwyt na podkładki higieniczne w rolce.



TAPICERKA paleta STANDARD

Podmiot odpowiedzialny za wyrób medyczny

(aktualne dane podmiotu z bazy EUDAMED Komisji Europejskiej)

[PL-MF-000045163](https://ec.europa.eu/eudamed/entry/PL-MF-000045163)

PRODUCENT



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11



DANE PRODUKTU

| | |
|--|--|
| Przeznaczenie stołu stacjonarnego | rehabilitacja masaż klasyczny |
| Regulacja wysokości leża | elektryczna ręczna/nożna (pilot/trama) |
| Zakres regulacji wysokości leża od podłoża | 48-100 cm |
| Liczba sekcji leża | 3 sekcje (3-częściowe) |
| Sekcja zagłówka | regulowana +/- poziomiu leża |
| Sekcja piersiowa | regulowana - łamanie leża |
| Sekcja lędźwiowo-nożna | regulowana (łamanie leża) |
| Wymiary obrysowe leża (dł. x szer.) | 200 x 65 cm |
| Pozycja Pivota | Tak |
| Funkcja fotela | Nie |
| Pozycja Trendelenburga | Nie |
| Pozycja antyTrendelenburga | Nie |
| Funkcja CPR | Nie |
| Podłokietniki przy zagłówku | opuszczane - wyposażenie opcjonalne |
| System jezdyny | 4 kola - wyposażenie opcjonalne |
| Dopuszczalne obciążenie | 200 kg |
| Usługa wniesienia stołu do lokalu | dostępna |
| Model/seria produkcyjna stołu | SS (WSTech) |
| Statyczna wytrzymałość leża [kg] | 200 |
| Rodzaj ramy dolnej stołu | prostokątna |
| Materiał ramy dolnej stołu | lakierowane profile stalowe |
| System podnoszenia leża | silownik elektryczny |
| Pilot ręczny przewodowy | w standardzie |
| Pilot nożny przewodowy | opcjonalnie |
| Regulacja wysokości ramą wokół podstawy stołu | opcjonalnie |
| Długość sekcji zagłówka [cm] | 44 |
| Sposób regulacji zagłówka | pneumatyczny |
| Zakres regulacji zagłówka | -70° do +40° |
| Otwór w zagłówku | opcjonalnie |
| Podłokietniki przy zagłówku | opcjonalnie |
| Podłokietniki - sposób regulacji | ręczny lub pneumatyczny |
| Podłokietniki - zakres regulacji | 0 do -18 cm od poziomu zagłówka |
| Długość sekcji piersiowej [cm] | 50 |
| Sposób regulacji sekcji piersiowej | pneumatyczny lub opcjonalnie elektryczny |
| Zakres regulacji sekcji piersiowej | 0-30° |
| Opuszczane boki sekcji piersiowej (zwis ramion pacjenta) | opcjonalnie |
| Sposób łamania leża w cz. środkowej | pneumatyczny lub opcjonalnie elektryczny |
| Zakres łamania leża w cz. środkowej | 0-30° |
| Długość sekcji lędźwiowo-nożnej [cm] | 102 |
| Sposób regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej | pneumatyczny lub opcjonalnie elektryczny |

| | |
|---|--|
| Zakres regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej | 0-15° |
| Relingi do pasów stabilizacyjnych | obustronne |
| Wieszak na podkłady higieniczne | opcjonalnie |
| System jezdyny - typ | opcjonalnie 4 opuszczane koła kierunkowe z blokadą jazdy |
| Zasilanie elektryczne | AC 230 V 50 Hz |
| Waga stołu bez wyposażenia dodatkowego [kg] | 96 |
| Numer katalogowy produktu | SS-E02 Plus 200x65 |
| Kod PKWU | 32.50.21.0 |
| Kod CN | 9018 90 84 |
| Certyfikacja produktu | CE/MDD/MDR |
| Dokument certyfikacji produktu | deklaracja zgodności |
| Nomenklatura wg dyrektyw MDD i MDR | wyrób medyczny |
| Kod Basic UDI-DI | 5900415491SIEISseCX |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego | klasa I, reguła 13 |
| Organ zgłoszenia wyrobu medycznego | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |
| Nazwa zgłoszona do organu | SS-E02 Plus stacjonarny stół rehabilitacyjny elektrycznie sterowany |
| Stawka podatku VAT na produkt | 8% |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny) |
| Gwarancja ogólna | 2 lata |
| Gwarant udzielający gwarancji | producent wyrobu / produktu |
| Gwarancja na konstrukcję | 2 lata |
| Gwarancja na elementy elektryczne | 1 rok |
| Gwarancja na elementy pneumatyczne | 1 rok |
| Gwarancja na tapicerkę standardową | 2 lata |
| Gwarancja na tapicerkę premium | 3 lata |
| Rodzaj przesyłki z produktem | przesyłka paletowa |
| Rodzaj palety | paleta przemysłowa bezzwrotna |
| Gabaryt produktu na palecie | 200x80x80 cm |
| Waga przesyłki wraz z paletą (paletami) [kg] | 120 |
| Usługa wniesienia towaru do lokalu odbiorcy | odpłatna |
| Producent wyrobu | [36] WS TECH Lorens sp.j. ☎ ul. Leopolda Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska] ☎13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu |
| SRN - kod producenta w bazie EUDAMED Komisji Europejskiej | [36] PL-MF-000045163 |
| Serwis techniczny w Polsce | fabryczny producenta |
| Serwis techniczny - kontakt | ☎ 13 464 44 49 @ biuro@wstech.eu |
| Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu w Polsce | producent wyrobu medycznego (dane powyżej) |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | producent (dane powyżej) |
| Zgłaszanie incydentów medycznych | [36] ☎ 13 464 44 49 biuro@wstech.eu |

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24